

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	助行器使用 Walker Walking				
編號	A31000-Q05-W-B53	制定者	N09 陳美如	公布日期	105 年 11 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 1.4 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作助行器使用技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）助行器使用目的：

1. 輔助下肢無力及活動功能不佳的病人於行走時支撐肢體以確保穩定度，避免或減輕身體負重。
2. 作為使用手杖或拐杖前的練習。
3. 增進自我照顧能力與獨立功能。

（二）用物準備：助行器 1 副。

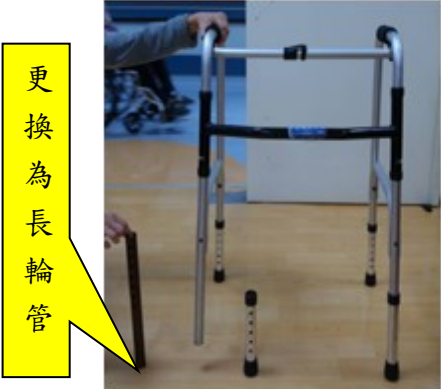
（三）步驟及要點說明：

步驟	說明
1. 按下開關，展開助行器兩側並確定開關卡榫已固定。（圖 1、圖 2） 2. 檢查助行器安全性。 (1)外觀有無斷裂。 (2)螺絲無鬆托。 (3)手把有止滑功能。 (4)四邊底部橡皮墊完整有止滑功能。	 圖 1：助行器展開前

主題名稱	助行器使用	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B53	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	2/7

步驟	說明
	 圖 2：助行器展開後
3. 測量及調整輪管高度，選擇符合身高之助行器。 (1)測量方法：身體挺直站立，雙手抓握手把，手肘應彎曲 20-30 度。(圖 3-1) (2)輪管可依照身高調整高度。(圖 3-2) (3)身高 175 公分以上需更換輪管。(圖 3-3) (4)檢查四邊輪管高度皆需調整一致。	 圖 3-1：助行器測量方法  圖 3-2：助行器輪管高度調整

主題名稱	助行器使用	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q05-W-B53	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數 3/7

步驟	說明
	 圖 3-3：身高 175 公分以上需更換輪管
4. 助行器行步行方法： (1)雙手分別握住助行器兩側的手把。(圖 4-1) (2)身體稍前傾將重心放在助行器及健肢上。(圖 4-2) (3)提起助行器向前移動 25-30 公分。(圖 4-3) (4)先跨出患側腳，步伐勿過大，且不超出助行器以免重心不穩。 (5)再移動健側腳，向前邁進步伐。(圖 4-4)	 圖 4-1：雙手分別握住助行器兩側手把  圖 4-2：身體稍前傾將重心放在助行器及健肢上

主題名稱	助行器使用	制定單位	護理部
編號	A31000-Q05-W-B53	版本	第 1.4 版
		頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
	 圖 4-3：提起助行器向前移動 25-30 公分  圖 4-4：再移動健側腳，向前邁進步伐 1. 行走前先站穩，注意步伐勿過大。 2. 雙手握住手把，保持身體平衡。 3. 身體儘量站直。 4. 每個步伐皆應同樣距離（大小）。 5. 行進間應目視前方。
5. 使用後將助行器收起，避免阻礙走道。	

主題名稱	助行器使用	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B53	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	5/7

(四) 注意事項：

- 1.勿於上下樓梯時使用助行器。
- 2.行走時應穿著適當長度褲子及合腳防滑的鞋子，
- 3.走道應保持乾燥、明亮且無障礙物以預防跌倒。
- 4.第一次使用助行器時，須有醫護人員或家屬協助指導，以防跌倒。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、 使用表單

(略)

五、 流程圖

(略)

六、 參考資料

- (一) 胡月娟、林淑燕 (2024) 。活動與運動。胡月娟等主編，照顧服務員訓練指引 (第 8 版，235-296) 。台北市：華杏。
- (二) Duesterhaus Minor, M. A. & Duesterhaus Minor, S. (2021) 。使用行動輔具行走。周玉萍譯，圖解復健照護技巧 (第 7 版，289-422) 。台北市：合記。

七、 附件

(略)

主題名稱	助行器使用	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B53	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
105.11.01	1.0	新制定。	105 年 11 月 01 日護理部技術標準委員會通過；105 年 11 月 01 日公布。
106.09.18	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	1.1	第二項新增（含中興分院）。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過。
108.12.16	1.2	第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 12 月 09 日護理技術組會議通過；108 年 12 月 11 日護理長會議通過；108 年 12 月 16 日督導會議通過公布。
109.12.14	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.12.13	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.03.07	1.3	第三項第三目步驟 1.新增說明內容。	111 年 12 月 19 日護理技術組會議通過；112 年 02 月 08 日護理長會議通過；112 年 03 月 07 日督導會議通過公布。
112.12.19	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.16	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	助行器使用	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B53	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	7/7

115.04.07	1.4	1.第三項第三目內容修辭修正。 2.文獻更新	114 年 12 月 15 日護理技術組會議通過； 115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。