

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血氧濃度感測儀操作標準 NPB-295 Oximeter Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B05	制定者	N09 陳美如	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 07 月 08 日
版本/總頁數	第 2.5 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 02 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解血氧濃度感測儀之操作步驟、要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

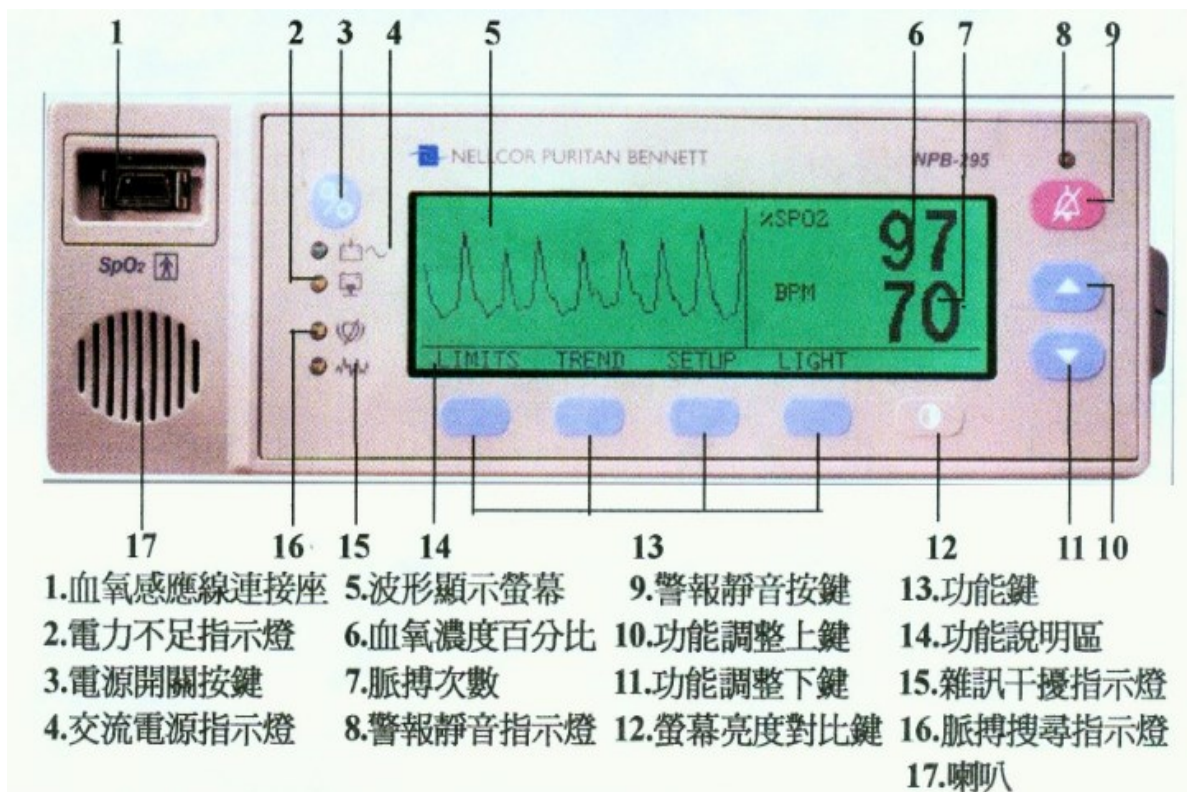
二、範圍

護理部各單位。

三、說明

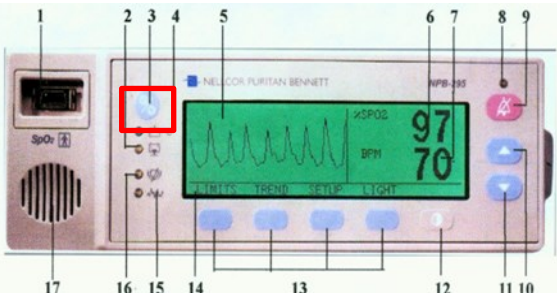
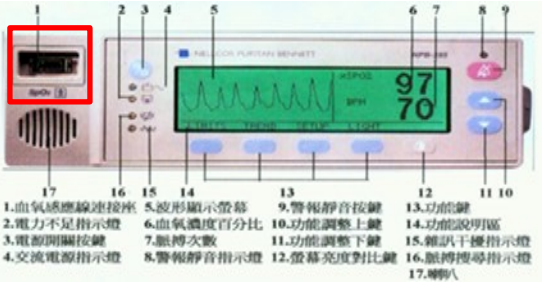
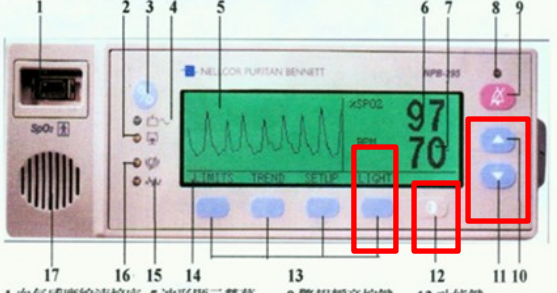
(一) 廠牌規格：NPB-295

(二) 儀器面板功能鍵說明

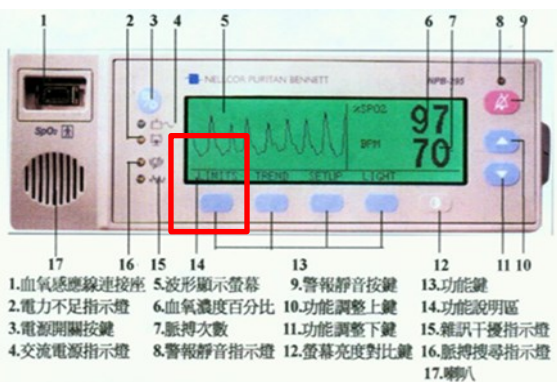
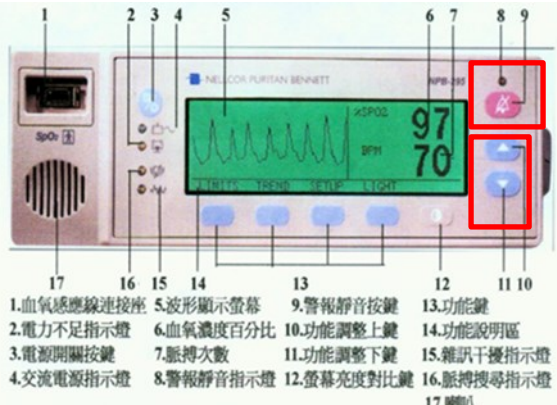
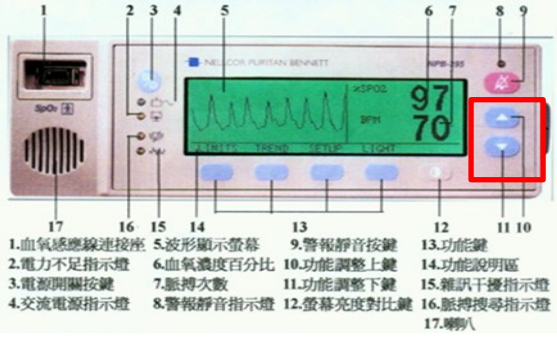


(三) 儀器操作步驟及要點說明

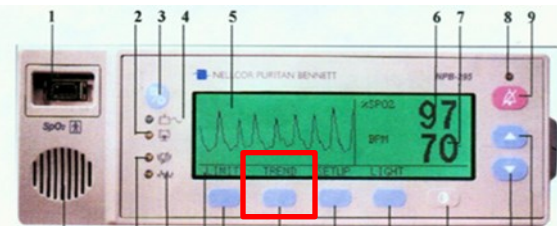
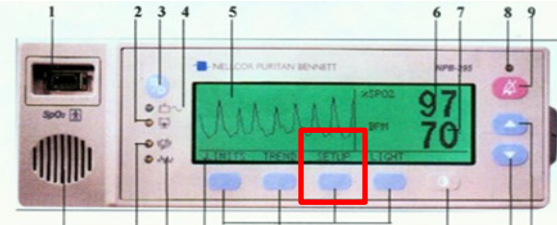
主題名稱	血氧濃度感測儀 NPB-295 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	2/8

步驟	說明
1. 接上電源，打開面板左上角之電源開關。 	儀器面板功能鍵說明-編號 3。  1.血氧感應線連接座 5.波形顯示螢幕 9.警報靜音按鍵 13.功能鍵 2.電力不足指示燈 6.血氧濃度百分比 10.功能調整上鍵 14.功能說明區 3.電源開關按鍵 7.脈搏次數 11.功能調整下鍵 15.雜訊干擾指示燈 4.交流電源指示燈 8.警報靜音指示燈 12.螢幕亮度對比鍵 16.脈搏搜尋指示燈 17.喇叭
2. 打開面板左上角 SpO₂ sensor 鎖蓋，再插入 SpO₂ sensor，將感應夾夾在病人手指端，即可監測病患。	儀器面板功能鍵說明-編號 1。  1.血氧感應線連接座 5.波形顯示螢幕 9.警報靜音按鍵 13.功能鍵 2.電力不足指示燈 6.血氧濃度百分比 10.功能調整上鍵 14.功能說明區 3.電源開關按鍵 7.脈搏次數 11.功能調整下鍵 15.雜訊干擾指示燈 4.交流電源指示燈 8.警報靜音指示燈 12.螢幕亮度對比鍵 16.脈搏搜尋指示燈 17.喇叭
3. 如螢幕亮度不清楚，按面板下方右側之第一個藍色功能鍵(Light)，打開背光功能。再按住其右側螢幕亮度對比鍵  不放，同時按面板右側之  或  調整設定至螢幕顯示清晰即可。	儀器面板功能鍵說明-編號 10、11、12。  1.血氧感應線連接座 5.波形顯示螢幕 9.警報靜音按鍵 13.功能鍵 2.電力不足指示燈 6.血氧濃度百分比 10.功能調整上鍵 14.功能說明區 3.電源開關按鍵 7.脈搏次數 11.功能調整下鍵 15.雜訊干擾指示燈 4.交流電源指示燈 8.警報靜音指示燈 12.螢幕亮度對比鍵 16.脈搏搜尋指示燈 17.喇叭
4. 按面板左側下方之第一藍色鍵，螢幕會顯示 SpO₂ 及 pulse rate 之警報上下限值。連續按 limits 之藍色功能鍵切換至預調整之項目。	按  或  調整其數值。如欲離開，按 EXIT 下方之藍色功能鍵，或過 3 秒後螢幕會自動回復監測畫面，儀器面板功能鍵說明-編號 13。

主題名稱	血氧濃度感測儀 NPB-295 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
	 1.血氧感應線連接座 5.波形顯示螢幕 9.警報靜音按鍵 13.功能鍵 2.電力不足指示燈 6.血氧濃度百分比 10.功能調整上鍵 14.功能說明區 3.電源開關按鍵 7.脈搏次數 11.功能調整下鍵 15.雜訊干擾指示燈 4.交流電源指示燈 8.警報靜音指示燈 12.螢幕亮度對比鍵 16.脈搏搜尋指示燈 17.喇叭
5. 按住右上角之  不放，當螢幕顯示 30、60、90、120、Off 等訊息時，按  或  即可調整循環設定警報靜音之期限。調整警報音量時，按住  不放，直到螢幕顯示 VOL1-10 等訊息，按  或  即可調整警報之音量。	設定 Off 即永遠關掉警報功能，儀器面板功能鍵說明-編號 9、10、11。  1.血氧感應線連接座 5.波形顯示螢幕 9.警報靜音按鍵 13.功能鍵 2.電力不足指示燈 6.血氧濃度百分比 10.功能調整上鍵 14.功能說明區 3.電源開關按鍵 7.脈搏次數 11.功能調整下鍵 15.雜訊干擾指示燈 4.交流電源指示燈 8.警報靜音指示燈 12.螢幕亮度對比鍵 16.脈搏搜尋指示燈 17.喇叭
6. 脈搏同步之聲響，直接於測量時按  或  即可調整大小聲。	儀器面板功能鍵說明-編號 10、11。  1.血氧感應線連接座 5.波形顯示螢幕 9.警報靜音按鍵 13.功能鍵 2.電力不足指示燈 6.血氧濃度百分比 10.功能調整上鍵 14.功能說明區 3.電源開關按鍵 7.脈搏次數 11.功能調整下鍵 15.雜訊干擾指示燈 4.交流電源指示燈 8.警報靜音指示燈 12.螢幕亮度對比鍵 16.脈搏搜尋指示燈 17.喇叭
7. 欲檢查病患之數值統計記錄時，按下方 Trend 訊息下之藍色功能鍵，即可觀察 SpO₂ 及 pulse rate 之統計圖形。	此鍵也能顯示 SpO₂ 及 pulse rate 之量測值分布統計，儀器面板功能鍵說明-編號 13。

主題名稱	血氧濃度感測儀 NPB-295 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
	 1.血氧感應線連接座 5.波形顯示螢幕 9.警報靜音按鍵 13.功能鍵 2.電力不足指示燈 6.血氧濃度百分比 10.功能調整上鍵 14.功能說明區 3.電源開關按鍵 7.脈搏次數 11.功能調整下鍵 15.雜訊干擾指示燈 4.交流電源指示燈 8.警報靜音指示燈 12.螢幕亮度對比鍵 16.脈搏搜尋指示燈 17.喇叭
8. 按下螢幕下方之 Setup 訊息下之藍色功能鍵，可設定成螢幕全數字顯示及時間之設定。	儀器面板功能鍵說明-編號 13。  1.血氧感應線連接座 5.波形顯示螢幕 9.警報靜音按鍵 13.功能鍵 2.電力不足指示燈 6.血氧濃度百分比 10.功能調整上鍵 14.功能說明區 3.電源開關按鍵 7.脈搏次數 11.功能調整下鍵 15.雜訊干擾指示燈 4.交流電源指示燈 8.警報靜音指示燈 12.螢幕亮度對比鍵 16.脈搏搜尋指示燈 17.喇叭

(四) 異常簡易故障排除方法

錯誤碼/錯誤信息	處理方法
4/電池不足	1. 檢查電源線與儀器連接是否完整無鬆脫。 2. 電池幾乎沒電，不能再使用蓄電功能，可選擇插電使用。 3. 檢查電壓選擇開關是否設置為正確電壓，關閉儀器讓電池充電約 10 分鐘，然後重新打開儀器，如果錯誤碼仍然出現，關閉儀器繼續充電。 4. 如果充電超過 30 分鐘依然出現錯誤碼，請通知維修人員。
SENSOR DISCONNECTED/ 感應器與電線斷開或電線與測定儀斷開連接	1. 按警報靜音鍵靜止警報，檢查連接。 2. 若問題仍未解決，則更換感應器或電纜。
按電源開關鍵無反應	1. 檢查電源線與儀器連接是否完整無鬆脫。 2. 如果是使用交流電，可能是保險絲被燒斷，可請修更換保險絲。 3. 若是使用電池供電，則可能是電池沒電。
脈搏搜尋指示圖標亮起超過 10 秒鐘	1. 檢查感應器用法是否正確，與電源線是否連接良好。 2. 把感應器在其他人身上測試一下。

主題名稱	血氧濃度感測儀 NPB-295 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	5/8

錯誤碼/錯誤信息	處理方法
	1. 改變感應器放置的位置。 2. 感應器重新清潔擦拭。

(五) 清潔保養注意事項

1. 以非腐蝕性的日用清潔劑浸濕抹布，輕輕擦拭儀器的表面。
2. 勿將液體噴濺、傾倒到儀器及附件上。
3. 感應器可以使用清水沾濕抹布輕輕擦拭。
4. 電源線及接頭部分請乾燥清潔，以免線路損壞。
5. 定期檢視插頭、電線是否有斷裂現象，若有請提出請修。
6. 儀器應放置穩固適當平面上，且勿放置其他物品、食物或液體，避免傾倒造成儀器損壞。

(六) 其他注意事項

1. 無任何操作超過 30 秒時，監測儀將自動儲存當時設定並回到數值顯示畫面。
2. 列印模式下，目錄鍵無法操作。
3. 當警報發生超過 15 秒時，將發生一個警報事件，而之後每五分鐘則會記錄一次在感應線中的晶片，通常晶片最多可儲存 100 個事件。
4. 參數範圍及預設值。

參數	範圍	預設值
%SpO2 警報上限	(警報下限+1) ~ 100%	100%
%SpO2 警報下限	20% ~ (警報上限-1)	85%
脈搏頻率警報上限	(警報下限+1) ~ 250bpm	170bpm
脈搏頻率警報下限	30bpm ~ (警報上限-1bpm)	40bpm
警報靜音期	30、60、90、120 秒、OFF	30 秒
警報音量	1~10	10
脈搏蜂鳴音量	0~10	10

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	血氧濃度感測儀 NPB-295 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	6/8

四、使用表單

(一) 血氧濃度感測儀使用說明評核表 NPB-295 (編號：A31000-Q18-F-B05)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	血氧濃度感測儀 NPB-295 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.18	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行臨時檢閱。	
102.05.31	2.1	增加（二）儀器面板功能鍵說明，增修（三）儀器操作步驟及要點說明及調整（六）4.參數範圍及預設值表格間距。	102 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.2	1. 主題名稱新增「操作標準 operating standards」。 2. 第三項第三目內容文字修訂。 3. 第三項第四目異常簡易故障排除方法新增說明。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.3	1. 第三項第四目異常簡易故障排除方法內容新增說明。 2. 第三項第五目清潔保養注意事項新增注意事項。 3. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過;108 年 06 月 12 日護理長會議 通過;108 年 06 月 18 日督導會議通 過公布。
109.06.16	2.4	1. 第三項第三目之 1、2 使用說明內容新增說明。 2. 第三項第五目清潔保養注意事項內容新增第 6 點說明。	109 年 06 月 04 日 照護標準組會議 通過;109 年 06 月 10 日護理長會議 通過;109 年 06 月 16 日督導會議通 過公布。
110.02.04	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	血氧濃度感測儀 NPB-295 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
111.06.02	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.11	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.07.08	2.5	1. 第三項第三目內容文字修訂 2. 第三項第五目清潔保養注意事項內容，第六點內容文字修訂	114 年 06 月 05 日照護標準組會議通過;114 年 06 月 11 日護理長會議通過;114 年 07 月 08 日督導會議通過公布。
115.02.05	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	