

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血氧濃度監測儀 N65 操作標準 Nellcor N-65 Oximeter Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B22	制定者	N15 王素鴻	公布日期	105 年 12 月 27 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 1.2 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解血氧濃度感測儀(N-65)之操作步驟、要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。


二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）廠牌規格：Nellcor N-65

（二）儀器面板功能鍵說明（如編號 1~33 的說明）

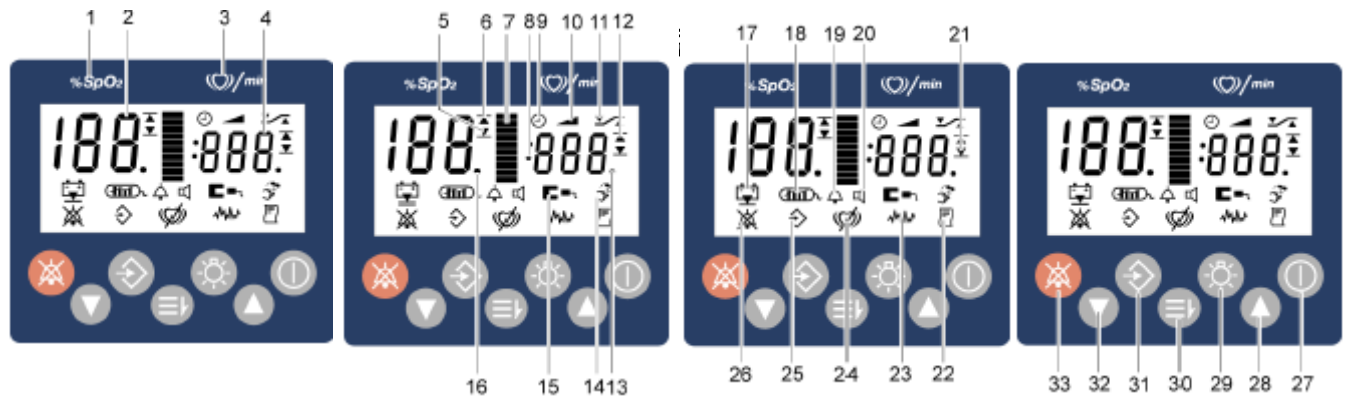

1~4 的功能鍵說明	5~16 的功能鍵說明	17~26 的功能鍵說明	27~33 的功能鍵說明
1. %SpO2 顯示區域 2. 測得的%SpO2 3. 每分鐘脈搏次數 (BPM)顯示區域 4. 測得的脈搏	5. %SpO2 警報下限指示 6. %SpO2 警報上限指示 7. 脈搏幅度 8. 時間冒號 9. 調整時間模式指示 10. 調整音量指示	17. 電池電量不足 18. 感應線內有數據顯示 19. 警報音量調整 20. 脈搏蜂鳴音量調整 21. BPM 警報下限指示	27. 電源鍵 28. 向上鍵 29. 背光燈按鍵 30. 目錄鍵 31. 數據（記錄/列印）按鍵 32. 向下鍵 33. 警報靜音鍵

主題名稱	血氧濃度感測儀 N65 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B22	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	2/6

1~4 的功能鍵說明	5~16 的功能鍵說明	17~26 的功能鍵說明	27~33 的功能鍵說明
	11. 設置界限模式指示 12. BPM 警報上限指示 13. BPM 警報界限已更改指示 14. 感應線與患者分離指示 15. 感應線脫離機器指示 16. %SpO2 限制已更改指示	22. 列印指示 23. 干擾指示 24. 脈搏搜索指示 25. 數據指示 26. 警報已靜音	

(三) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 打開面板上右上角之電源開關  。	按此鍵可以開啟/關閉電源
2. 按下目錄鍵  可進入參數目錄，反覆按此鍵，即可選擇所要調整參數。若 30 秒內無任何操作，螢幕將自動回到數據顯示畫面。	使用目錄鍵設定參數。
3. 按下向下鍵  ：正常操作時按此鍵，可減少脈搏蜂鳴的音量。若按下目錄後，此鍵功能為減少該參數值（設定值）。 按下向上鍵  ：正常操作時按此鍵，可增加脈搏蜂鳴的音量。若按下目錄後，此鍵功能為增加該參數值（設定值）。	調整脈搏蜂鳴的音量與調整設定值。
4. 按住警報靜音鍵  3 秒鐘，即可調出“警報靜音目錄”（30、60、90、120 sec 或 off），以上下鍵設定後，再按一次此鍵即設定完成。	按下警報靜音鍵，在螢幕上會出現  圖示，代表警報已靜音，當警報靜音期設置為 OFF 時，此燈即閃爍，並每 3 分鐘發出一聲警報提示音。
5. 按下背光鍵  可以開啟/關閉背光功能。背光大約會維持 10 分鐘。	
6. 按下數據（記錄/列印）按鍵  ，可以保存目前所顯示的 SpO2 及脈搏數據。在列印模式下，按此鍵可以列印所保存的數據（監測儀僅能以紅外線連接印表機）。	機器可儲存 50 筆記錄
7. 使用 N-65 的警示訊息參考如下： (1)  干擾指示：可能是周圍光線、電子噪音、電磁干擾、患者行為造成。	

主題名稱	血氧濃度感測儀 N65 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B22	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
(2)  脈搏搜尋：無法偵測到脈搏訊號超過 20 秒時即閃爍，超過 40 秒時，螢幕數值顯示為零並閃爍，此訊號亦繼續閃爍。 (3)  脈搏蜂鳴音量調整：當機器處於警報音量調整目錄內時將顯示。 (4)  調整時間：當機器處於時間/日期設置時將顯示。 (5)  設置界限：當機器處於警報界限时將顯示。 (6)  調整音量：當機器處於音量調整時將顯示。	

(四) 異常簡易故障排除方法

錯誤碼/錯誤信息	處理方法
電池電量不足 	- 剩餘電量不足 15 分鐘時，此圖將閃爍，一組新電池可使用 15-40 小時，視電池型態而定。 - 請打開儀器背面，進行更換 3 號電池共四顆。如果依然出現此訊息，請通知醫工組維修人員。
感應線脫離機器  或是感應線與患者分離 	- 按警報靜音鍵靜止警報，檢查連接。 - 若問題仍未解決，則更換感應器或電纜。
按電源開關鍵無反應	- 若是使用電池供電，則可能是電池沒電。 - 若是更換電池後仍無法開啟，請通知醫工組維修人員。
脈搏搜尋指示圖標亮起超過 10 秒鐘	- 檢查感應器用法是否正確，與電線是否連接良好。 - 把感應器在其他人身上測試一下。 - 改變感應器放置的位置。
Er+錯誤碼 10/17/19/275/277/280/282	檢查/更換 感應線/延長線
Er+錯誤碼 11	更換電池、通知維修人員
Er+錯誤碼 273/523	重新啟動監測儀、設置時間及日期、通知維修人員
Er+錯誤碼 274	通知維修人員，重新設置內部設定
Er+錯誤碼 276	更換感應線
Er+錯誤碼 521/522	更換電池
Er+錯誤碼 525/539	重新啟動監測儀、通知維修人員
Er+錯誤碼 538/543	設置時間及日期

主題名稱	血氧濃度感測儀 N65 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B22	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	4/6

（五）清潔保養注意事項

- 1.以非腐蝕性的清潔劑或70%酒精，輕輕擦拭儀器的表面。
- 2.勿將液體噴濺、傾倒到儀器及附件上。
- 3.感應器可以使用清水沾濕抹布輕輕擦拭。

（六）其他注意事項

- 1.修改時間方式如下：按下右上角電源鍵，待螢幕上出現時間，長按目錄鍵，利用向上/向下鍵調整時間，螢幕會依序出現時間（按第一下）、日期（按第二下）、年份（按第二下）。
- 2.無任何操作超過 30 秒時，監測儀將自動儲存當時設定並回到數值顯示畫面。
- 3.列印模式下，目錄鍵無法操作。
- 4.當警報發生超過 15 秒時，將發生一個警報事件，而之後每五分鐘則會記錄一次在感應線中的晶片，通常晶片最多可儲存 100 個事件。
- 5.參數範圍及預設值，參考如下：

參數	範圍	預設值
%SpO2 警報上限	（警報下限+1）~ 100%	100%
%SpO2 警報下限	20% ~ （警報上限-1）	85%
脈搏頻率警報上限	（警報下限+1）~ 250bpm	170bpm
脈搏頻率警報下限	30bpm ~ （警報上限-1bpm）	40bpm
警報靜音期	30、60、90、120 秒、OFF	30 秒
警報音量	1~10	10
脈搏蜂鳴音量	0~10	10

（七）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- （一）血氧濃度感測儀使用說明評核表 N-65（編號：A31000-Q18-F-B22）。

主題名稱	血氧濃度感測儀 N65 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B22	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	5/6

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	血氧濃度感測儀 N65 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B22	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	6/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
105.12.27	1.0	新制定。	105 年 12 月 27 日 護理部照護標準 委員會通過；105 年 12 月 27 日公布
106.05.31	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	1.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	1.2	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會議 通過公布。
109.06.04	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.02.02	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.02.01	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	