

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	胃、胸腔低壓引流泵 D-F500 操作標準 D-F500 Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B23	制定者	N11 莊淑娟	公布日期	106 年 04 月 12 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 1.2 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解胃、胸腔低壓引流泵(D-F500)之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

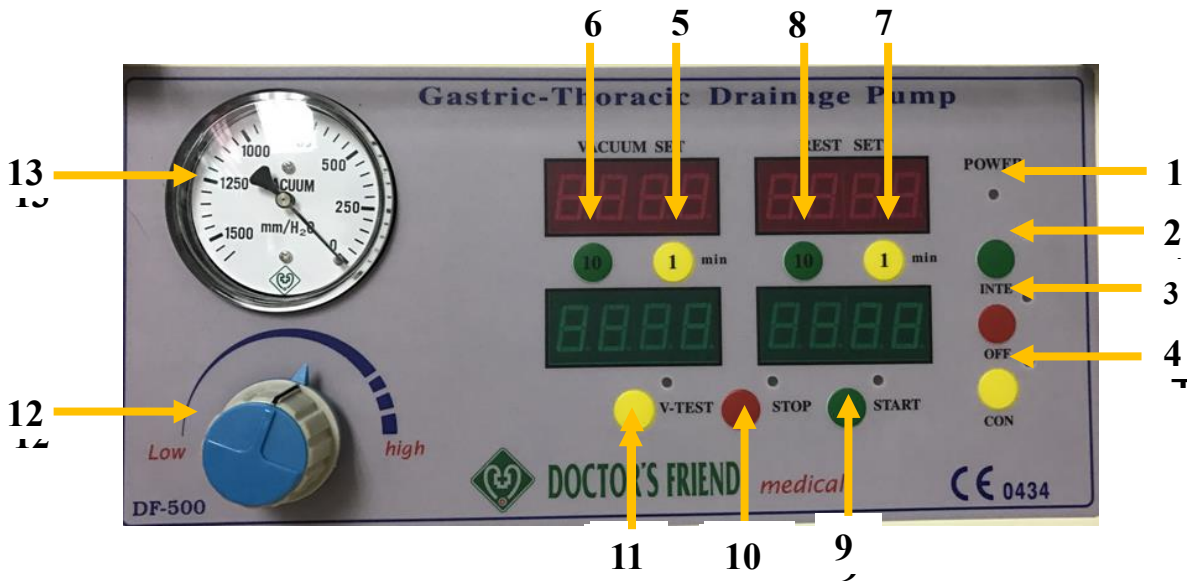
三、說明

（一）廠牌規格：D-F500



主題名稱	胃、胸腔低壓引流泵 D-F500 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B23	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	2/6

(二) 儀器面板功能鍵說明

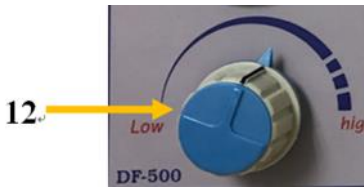
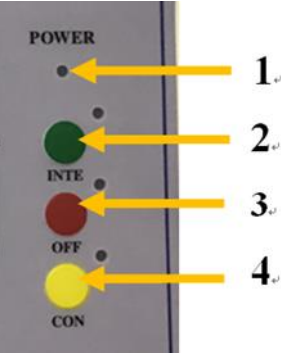


- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. 電源指示燈 POWER | 8. 休息時間設定 10min |
| 2. 間接性按鈕 INTE | 9. 間接性啟動鈕 START |
| 3. 停止按鈕 STOP | 10. 更改時間停止鈕 STOP |
| 4. 持續性按鈕 CON | 11. 抽吸壓力測試鈕 V-TEST |
| 5. 抽吸時間設定 1min | 12. 抽吸壓力調節鈕 |
| 6. 抽吸時間設定 10min | 13. 抽吸負壓計 mm/H ₂ O |
| 7. 休息時間設定 1min | |

(三) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 當電源輸入時（約 3 秒鐘）POWER 燈亮（圖 1），表示待機狀態。	

主題名稱	胃、胸腔低壓引流泵 D-F500 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B23	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
2. 負壓力高低由調節鈕作調節高低功能（圖 12）。	
3. 抽吸負壓高低可由負壓計（圖 13）中顯示出來其單位為 mm/H2O 而壓力高低與時間設定，請依照醫師指示使用。	
4. 使用功能區分：可選擇間歇性 INTE 抽吸功能（圖 2）或持續性 CON 抽吸功能（圖 4）。而持續性功能，則按 CON 鈕持續運轉，停止時請按 OFF 鈕（圖 3）。	
5. 間歇性功能：時間設定，按 INTE 後再做 VACUUM SET 設定，先按 1 min（圖 5）表示個位數分，10 min（圖 6）表示十位數分，設定完成後，再作 REST SET 設定，先按 1 min（圖 7）表示個位數分，10 min（圖 8）表示十位數分。	兩組設定最少 1 分鐘最高 99 分鐘。 
6. 當 VACUUM SET 與 REST SET 兩組時間設定完成後按 START 鈕（圖 9），即可啟動執行。	執行中計時器無法再作調整。
7. 儀器運轉中，需更改設定時間時，請按 STOP（圖 10）鈕，再作時間設定，完成後按 START 鈕，當需要停止本儀器運轉功能時請按 OFF	

主題名稱	胃、胸腔低壓引流泵 D-F500 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B23	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	4/6

步驟	說明
鈕。	
8. 儀器運轉中想查知抽吸壓力高低，可按 V-TEST 鈕（圖 11）。	

（四）異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 壓力不足	1. 自動止水閥未上緊 2. 細菌過濾器破裂、漏氣 3. 引流瓶瓶蓋未蓋緊 4. 引流管與引流瓶接頭未密合	按 V-TEST 查知壓力大小 1. 若壓力正常，查檢細菌過濾器、引流瓶瓶蓋及引流管與引流瓶接頭是否有左列情形並處理之 (1)上緊自動止水閥 (2)更換細菌過濾器 (3)將引流瓶瓶蓋蓋緊 (4)將引流管與引流瓶接頭密合 2. 若壓力不正常且無法排除原因，立即停止使用並通知醫工。
2. POWER 燈不亮		通知醫工。

（五）清潔保養注意事項

1. 引流瓶：

- (1)關閉電源，等吸力慢慢減弱。
- (2)將瓶蓋打開，將引流瓶取出。
- (3)用清水洗，勿使用任何含化學藥劑的清潔劑，否則會造成吸引瓶龜裂或破損。
- (4)此吸引瓶為 PC 材質，可耐高溫、可用高壓消毒，建議瓶口朝上放入高壓鍋消毒，以 120°C 高溫下連續消毒 20 分。

2. 引流管：

- (1)每次使用後，請每次吸清水約 30c.c.清洗吸引管內部，直到清洗乾淨為止。
- (2)再以乾淨的布擦拭引流管表面。

3. 過濾器：

- (1)未受汙染，每半年更換一次。

主題名稱	胃、胸腔低壓引流泵 D-F500 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B23	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	5/6

(2)當水溢滿或過濾器受損時，立即更換過濾器。

(六) 其他注意事項

1. 本儀器適用胃減壓及胸腔引流使用，壓力大小均由醫師開立於醫囑上。

(1)胸腔：壓力大約在 250~300 mmH₂O，不超過 600mmH₂O。

(2)胃減壓：壓力大約在 800~1000 mmH₂O 之間，不超過 1200 mmH₂O。

2. 單位換算如下：

(1)10mmH₂O = 1cmH₂O

3. 使用時須向病人及家屬解釋儀器之功能，並告知不可任意調動儀器。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 胃、胸腔低壓引流泵使用說明評核表 D-F500 (編號：A31000-Q18-F-B23)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	胃、胸腔低壓引流泵 D-F500 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B23	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	6/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
106.04.12	1.0	新制定。	106 年 04 月 12 日護理部照護標準委員會通過；106 年 04 月 12 日公布
107.06.13	1.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日護理長會議通過
108.06.06	1.2	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日照護標準組會議通過；108 年 06 月 12 日護理長會議通過；108 年 06 月 18 日督導會議通過公布。
109.06.04	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.02.02	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.02.01	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	