

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	電動式搬運架秤 PA01-2150 操作標準 Bed Scales Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B25	制定者	N12 高淑娟	公布日期	106 年 06 月 26 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 1.2 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解電動式搬運架秤之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

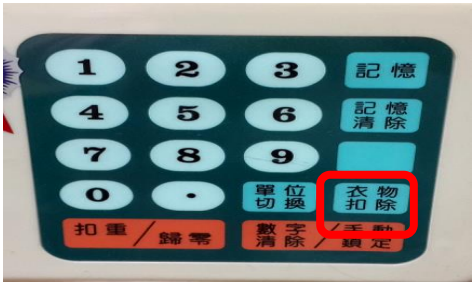
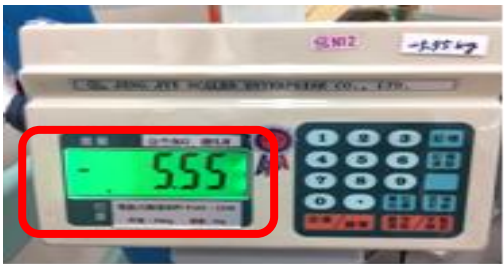
三、說明

(一) 廠牌規格：PA01-2150

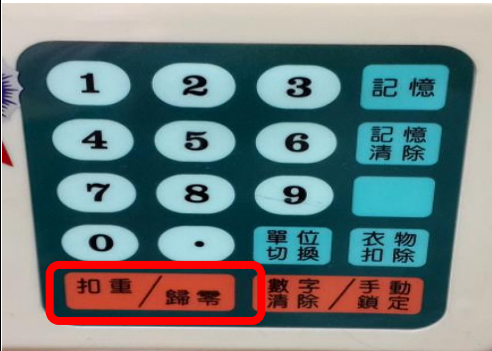
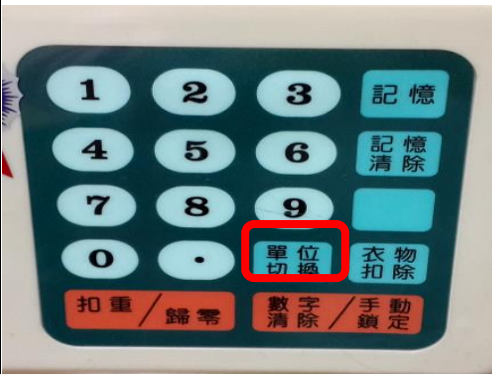
(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
電動式搬運架秤 PA01-2150	
1. 重量顯示器開機。	

主題名稱	電動式搬運架秤 PA01-2150 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B25	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明
2. 擔架預扣功能操作，扣重擔架重量為 5.55Kg，擔架直接放在機器上面即可扣除擔架重量，不需要將擔架拿起來扣重。 3. 請按數字鍵“5550”再按“衣物扣除”鍵，即會呈現-5.55。	 ☆注意：須每次測量都要歸零。
4. 將擔架置於病人身側，使病人側躺，擔架之一端推至病人背部下，再讓病人平躺由另一端將擔架拉出，並調整擔架或病人使其重心位於擔架中心位置，以避免承重時重心不穩。	
5. 將擔架之吊孔置入骨架之掛勾內後，運用手控器使吊架升起，擔架升起至少離病床 2 吋之高度（務必確保掛勾有置入吊孔內，才可以升起擔架）。	
6. 確定所有動作無誤後，按下“手動鎖定”鍵即可測量到病人體重。	

主題名稱	電動式搬運架秤 PA01-2150 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B25	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
7.如欲將當時秤體重暫時保留於螢幕時按此“記憶”鍵。	
8.若儀表有殘值必須完成“扣重/歸零”，才能進行下次測量。	
9.按“單位切換”鍵可作公斤或英磅之重量單位切換。	
10. 使用完畢後，將擔架以消毒液擦拭晾乾，並將擔架捆捲放置固定位置。	

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
------	------	------

主題名稱	電動式搬運架秤 PA01-2150 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B25	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	4/6

1. 異常鈴聲或顯示訊號	電池電力不足	1. 當顯示欄充電指示處出現燈號符號，表示電壓不足應即時充電。 2. 若重量欄螢幕出現“-----”時，即表示沒電，請關閉電源開關，馬上充電。 3. 機器每秒出現兩短聲，低電量〔紅、黃燈亮〕，提醒應盡快充電。 4. 每秒三短聲，低電量〔紅燈亮〕，立刻充電。 5. 每秒六短聲，極低電量〔全不亮〕，立刻充電。 6. 間隔一秒三短聲，電池有問題，更換電池。 7. 三長聲，電力超載，過量的電力，立刻充電。
2. 升降系統無法上升或下降		1. 使用緊急下降裝置，以順時針方向旋轉，使之下降。 2. 若故障仍無法排除，需通知廠商維修。
3. 顯示螢幕無法顯示	長期使用或太用力按壓造成毀損	顯示螢幕故障，通知廠商維修。
4. 擔架布出現裂縫	長期使用造成破損	聯絡廠商。
5. 擔架放置盒破裂	置放擔架布時太過用力	聯絡廠商。

（四）清潔保養注意事項

1. 使用清水扭乾的軟布擦拭機體，待乾燥後即可。
2. 檢查螺絲是否鬆動，有鬆動時連絡醫工以工具栓緊，在未修復前，應避免使用。
3. 各個轉動的聯桿處或輪軸處需不定期上油。
4. 擔架放入擔架放置盒時需輕慢放入，禁止快速放下擔架放置盒會造成破裂。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- （一）電動式搬運架秤使用說明評核表 PA01-2150（編號：A31000-Q18-F-B25）。

主題名稱	電動式搬運架秤 PA01-2150 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B25	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	5/6

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	電動式搬運架秤 PA01-2150 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B25	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	6/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
106.06.26	1.0	新制定。	106 年 06 月 26 日 護理部照護標準委員會通過；106 年 06 月 26 日公布
107.06.13	1.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	1.2	第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施， 改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布 實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議通 過；108 年 06 月 12 日護理長會議通 過；108 年 06 月 18 日督導會議通過公 布
109.06.04	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.02.02	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.02.01	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	