

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	生理監視器 Mindray iMEC10 操作標準 HP EKG Monitor Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B26	制定者	N13 翁岱鈺	公布日期	108 年 06 月 18 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 1.0 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 02 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解 Mindray iMEC10 生理監視器之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

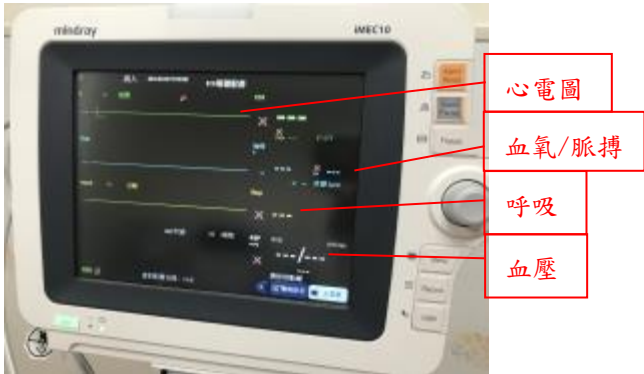
三、說明

（一）廠牌規格：Mindray iMEC10

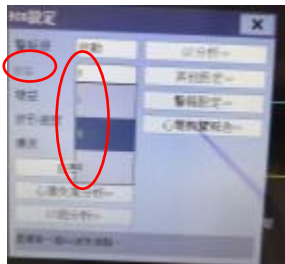
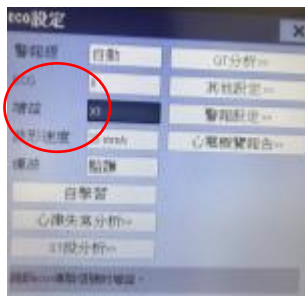
（二）儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 儀器介面介紹	 警報燈 Alarm Reset: 可對所有當前警報進行靜音 Alarm pause: 可以在兩分鐘內暫停或恢復警報 Freeze: 暫停波型更新 旋鈕: 可旋轉進行指令切換, 按下即可執行操作 Menu: 主選單實體按鈕 Record: 可列印當下前後共八秒之波形與數據 NIBP: 按下可啟動或終止血壓測量 電池指示燈 電源指示燈 電源開關 觸控螢幕

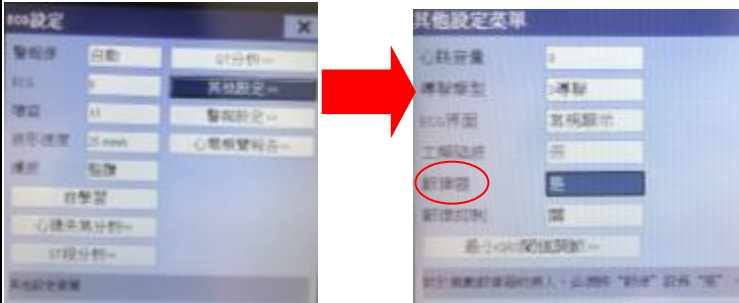
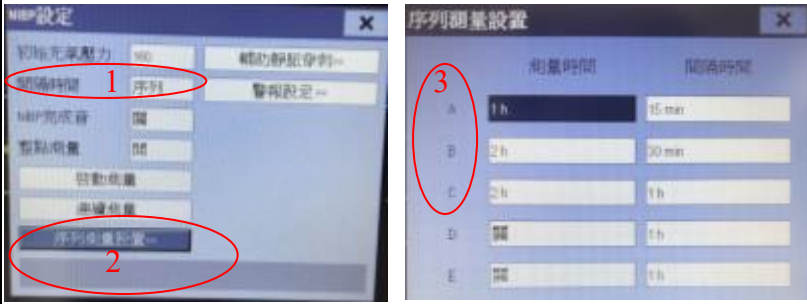
主題名稱	生理監視器 Mindray iMEC10 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B26	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/7

步驟	說明
2. 按下開關。	
3. 螢幕顯示。	依模組設定會顯示不同之參數畫面。 
一、控制面板各硬體鍵操作	
1. 靜音/復原(Silence/Alarm Reset)。	當監視器發出生理警報，可消除警告聲 3 分鐘後自動恢復警報，技術警報則直接解除。
2. 警報暫停(Alarm pause)。	該按鈕發出紅燈，螢幕顯示警報暫停 2 分鐘並倒數，期間仍發出警報閃爍但不發出警報音。 
3. 波型暫停(Freeze)。	暫停波型更新，生理參數仍會更新顯示，可暫時分析異常波型，再按一次可解除暫停功能（大字體介面不適用）。
4. 主選單(Menu)。	進入主選單做進階設定，或回到主畫面。
5. 記錄(Record)。	列印當前畫面波型以及生理參數。
6. 血壓量測(NIBP)。	依照當前設定的量測時間開始自動量測血壓。
7. 觸控螢幕操作。	點選觸控螢幕上該區塊，可進入該參數進階設定。

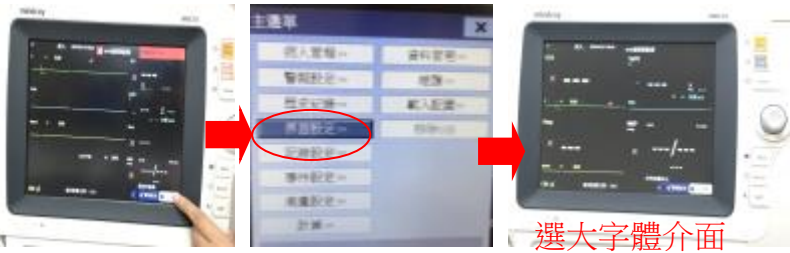
主題名稱	生理監視器 Mindray iMEC10 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B26	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
8. 警報設定。	請依據「成人生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準（編號：A31000-Q02-W-O07）」設定警報上下限，致命性警報無法關閉。
9. 觸控螢幕主選單。	與硬體按鈕進入相同畫面，長按約 3 秒可進入鎖定觸控螢幕狀態，長按該區約 3 秒可解除鎖定。
二、心電圖模組設定	
1. 按下觸控螢幕 ECG 區塊。	ECG 模組可使用 3 或 5 導程 ECG，可依照需求更換病人端導程，同時監測 3 或 5 種不同之導程（最多可選 I、II、III、aVF、aVL、aVR）。 
2. 改變導程。	由 ECG 設定中選擇想要觀察的 I、II、III 或 5 導程的 aVF、aVR、aVF 導程。 
3. 調整增益與波型速度。	由 ECG 設定中，選擇增益或波型速度調整 ECG 波形顯示。 
4. 波形干擾過濾選擇。	由 ECG 設定中，指定相關過濾等級（分為監護、診斷、ST、手術），通常使用監護。 

主題名稱	生理監視器 Mindray iMEC10 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B26	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
5. 心臟節律器(Pacemaker)。	由 ECG 設定的其他設定中，節律器選項中選擇是或否設定該病人是否有使用節律器（若未設定而判斷疑似波型會在螢幕中提示）。 
三、呼吸模組設定	
1. 按下畫面上 Resp 區塊。	
2. 調整波型增益與速度。	選擇增益或速度，調整呼吸波形大小與速度。
四、非侵入血壓設定	
1. 按下畫面 NIBP 區塊。	設定自動量測間隔。
2. 自動/手動/序列/連續量測。	<u>自動量測</u>：根據所設定的量測時間定時量測血壓。 <u>手動量測</u>：按下按鈕之 NIBP 鍵即測量一次。 <u>連續量測</u>：5 分鐘內快速重複量測血壓。 <u>序列量測</u>：介面中設定好序列時程，可設定 A-E 五組自動量測的間隔，例如：A 時段 1 小時中每 15 分鐘自動量測一次，1 小時後進入 B 時段 2 小時中每 30 分鐘自動量測一次。 
3. 改變充氣壓力。	可依病患狀態調整初次壓脈袋充氣壓力。
五、血氧飽和濃度設定	
1. 按下畫面上 SpO2 區塊。	可調整心跳音量、是否與 NIBP 同時量測。
六、螢幕顯示調整	
1. 點選主選單進入介面設定。	介面設定畫面中可調整「按鍵音量」、「畫面亮度」或「介面佈局」更改顯示介面切換成大字體介面方便遠距離觀看生

主題名稱	生理監視器 Mindray iMEC10 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B26	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/7

步驟	說明
	理參數。 
七、記錄儀調整	
1. 點選主選單進入記錄設定	記錄設定中設定要列印出的波型（最多 3 道波型），設定列印的波型長度與速度。
八、病患資料登入解除	
1. 點選主選單的病人管理	選擇「接收病人」在病例號方框中輸入病歷號，再次接收病人時會自動將上一位病人資料解除保存，或是選擇「解除病患」讓 iMEC10 完全清空病患資料。

（三）異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 觸控螢幕無法準確操作	使用過久。	「主選單」→「維護」→「觸控式螢幕校準」。
2. 記錄儀異常	1. 記錄器卡紙。 2. 記錄器無反應。 3. 記錄器印出空白頁。 4. 列印時未出現波型。	1. 將卡紙輕輕拉出；若看不到卡紙，請將記錄器門打開取出卡紙。 2. 按「Record」鍵，調整空白紙卷，避免撕紙時將紙拉歪。 3. 檢查記錄紙熱感方向是否正確。 4. 檢查「記錄設定」的波型是否有開啟波型。
3. 蓄電池無法充電	後方電源線沒有牢固接上。	1. 檢查後方電源線是否接上主機，並確認是否連接牢固。 2. 檢查主機正面左下角交流電 LED 燈與電池 LED 燈是否恆亮。
4. 生理參數未出現	1. 感測線未接上。 2. 感測線故障。	1. 檢查病人端是否接妥。 2. 更換感測線。

（四）清潔保養注意事項

1. 檢查電源線是否完整及生理監視器外觀是否完整。

主題名稱	生理監視器 Mindray iMEC10 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B26	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/7

2. 每次使用後執行清潔保養，維持生理監視器主機之清潔，檢測附件之完整性。
3. 清潔方式請將清水噴於布料對主機進行擦拭，禁用漂白水或酒精直接噴於螢幕或後方功能孔。
4. 儀器為鋰電池，不使用仍建議持續充電。

(五) 警告層次其代表意義說明

警告顏色	警告聲	代表意思
紅色	連續急促聲	危急情況，如致命性心律不整、電池電量過低。
黃色	連續音調	病患參數值超越設定範圍，如心跳超越上下限。 開機預設 HR：50-120 次/分，SPO2：90-100%， Resp：8-20 次/分
黃色	單次定時音調	導線脫落。

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 生理監視器評核表 Mindray iMEC10 (編號：A31000-Q18-W-B26)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	生理監視器 Mindray iMEC10 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B26	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	7/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
108.06.12	1.0	新制定。	108 年 06 月 12 日 護理長會議通過； 108 年 06 月 18 日 督導會議通過公布。
109.06.04	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.04.01	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.02.06	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	