

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	膀胱容量測量儀 BVI 9400 操作標準 Bladder Scan (BVI 9400) Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B28	制定者	R14 李嘉綺	公布日期	108 年 12 月 16 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 12 月 16 日
版本/總頁數	第 1.0 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解膀胱容量測量儀 BVI 9400 之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

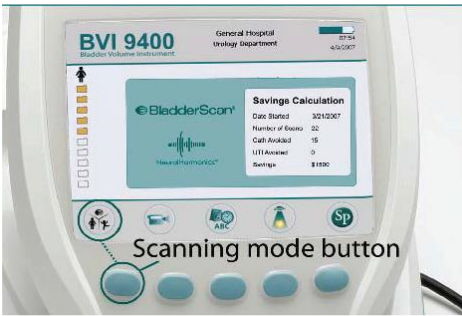
三、說明

(一) 廠牌規格：Bladder Scan BVI 9400

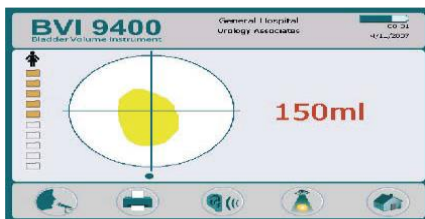
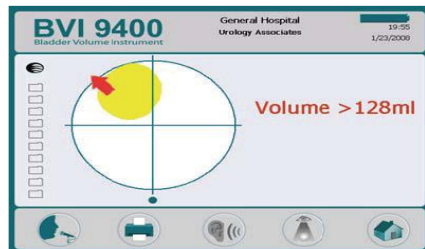
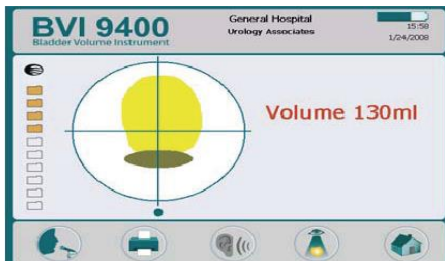


主題名稱	膀胱容量測量儀 Bladder Scan BVI 9400 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B28	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/6

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 開啟 BVI 9400 電源 按下 BVI 9400 儀器上的電源開關鍵“ON/OFF”	 A photograph of the BVI 9400 device. A blue arrow points to a circular power button on the front panel, labeled "On/Off button".
2. 選擇測量型態  受測者身高不足48英吋(122公分)及體重不足60磅(27公斤)，建議選擇此選項。  如測量者為女性，請選擇此選項（如子宮已切除之患者，請改選一般模式）。  此為一般模式。 BVI 9400 的使用限制： 腹水、恥骨上方開過刀或有傷口之病人、懷孕的婦女，可能導致測量結果不準確。	 A photograph of the BVI 9400 screen. The screen displays "BVI 9400" and "General Hospital Urology Department". Below the screen, a blue arrow points to a button labeled "Scanning mode button".
3. 替受測者塗抹超音波傳導膠 (1) 採平躺並維持輕鬆的姿勢。 (2) 於恥骨上方約三公分處塗抹超音波傳導膠（約 50 元硬幣量）。 (3) 塗抹於下腹部的傳導膠應確認無氣泡附著，避免影響測量數據。	
4. 尋找適當測量位置 站於病人側邊，探頭放在塗抹超音波傳導膠位置，並將探頭對準預估膀胱位置。大多數受測者，膀胱位置約在尾椎骨的方向。	 A photograph showing an ultrasound probe being used on a patient's abdomen. The probe is held against the skin, and a blue overlay on the image indicates the internal bladder location.
5. 按下測量鍵進行測量 測量鍵位於探頭下方，按下測量鍵即可進行測量。測量聲響結束後，及完成測量。	 A photograph of the ultrasound probe. A blue arrow points to a button on the handle, labeled "Scan button".

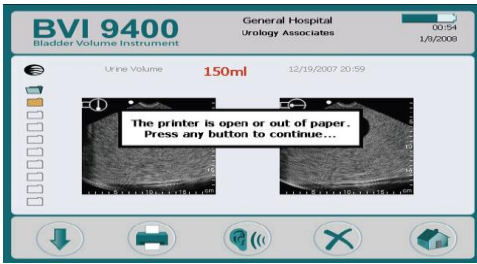
主題名稱	膀胱容量測量儀 Bladder Scan BVI 9400 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B28	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
6. 確認掃描 掃描膀胱的位置必須正確地落在螢幕十字準心的正中央（圖一），探頭螢幕會閃爍8隻箭頭（圖二）。若無請依下列說明重新掃描。 (1) 重新掃描 掃描的膀胱圖形不完整，探頭可依照箭頭指示方向調整，再次進行測量，如出現的指示符號，是固定不閃爍的，則只需要稍微調整探頭方向，再次進行測量。如果主機畫面中未看到掃描的膀胱圖示，則必須重新尋找膀胱位置。 (2) 重新掃描時需要注意的準則如下：（結構角度） 螢幕中十字準心下方的小圓點代表受測者的腳部方向。螢幕中的十字準星上方，代表為受測者頭部方向。在左上方紅色箭頭指示處（9點鐘方向到12點鐘方向中間）表示為受測者的右肩（如圖三）。此方位定向方式可幫助重新瞄準探測出完整的膀胱。 (3) 出現恥骨影像 當螢幕上看見恥骨被掃描到時，需要重新測量（如圖四）。因膀胱影像有被掃描出來，但可能會有部分的膀胱被恥骨遮蔽的可能性，故建議重新測量直到只顯示完整的膀胱影像。	 圖一  圖二  圖三  圖四
7. 儲存、查閱及列印掃描結果 (1) 儲存結果：測量完成後必須對結果下達語音紀錄始儲存。語音紀錄方式：按下主機上的”Record”選項，當進入語音紀錄模式後，即可透過探頭上的麥克風進行錄音，錄音停止按”Stop”選項，錄音結束後，按下”Listen”選項聽取錄音。 (2) 查閱紀錄：按下主機上的”Review”選項即可（必須進行資料的儲存後，即可查閱）。 (3) 列印：按下”Print”選項，即可列印測量報告。 (4) 進行下一筆測量：按”Home”選項即可進行下一筆的測量。	 

主題名稱	膀胱容量測量儀 Bladder Scan BVI 9400 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B28	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/6

步驟	說明
8. 完成測量 完成測量後，擦拭受測者及探頭上的超音波傳導膠。	
9. 如果單位電腦有設定ScanPoint用戶，登錄ScanPoint網站後，所有的語音紀錄，將會自動連接所設定的電腦，將資料上傳並儲存。	

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 儀器無法啟動	(1)通常是電池完全沒電，檢查螢幕右上角電量圖示。 (2)當電池電量偏低儀器仍可正常運作（電量太低不影響內部電路系統運作）儀器會顯示下列訊息： battery charge level is too low for instrument operation. recharge before next use.	電池必須充電或更換。
2. 印表機常見問題-沒紙	BladderScan BVI 9400 會自動偵測紙匣是否有紙，當印表機缺紙時會顯示下列圖像。 印表機缺紙訊息 	請更換熱感紙裝置，需確認正確。（更換方式可參考中文儀器手冊第27頁）
3. 印表機常見問題-過熱	BVI 9400列印器太熱會顯示TOO HOT的訊息。	請立即關掉BVI 9400。太熱也可能產生卡紙，看到有卡紙以清除卡紙方式處理。
4. 印表機常見問題-卡紙		若印表機不能繼續往前送紙，請向後溫柔地推出卡紙，逆時針方向轉動微型旋輪。若卡紙無法取出時，不要試圖拆卸印表機，請線上申請請修儀器或聯絡醫工。

主題名稱	膀胱容量測量儀 Bladder Scan BVI 9400 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B28	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/6

(四) 清潔保養注意事項

Bladder Scan BVI 9400 清潔及消毒：

1. 每次探頭使用完畢後，使用衛生紙將傳導膠擦拭乾淨。
2. 消毒可使用紗布沾少量 75%酒精或使用酒精棉片擦拭探頭及主機（但主要螢幕避免擦拭），直到完全乾淨。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 膀胱容量測量儀使用說明評核表Bladder Scan BVI9400（編號：
A31000-Q18-F-B28）。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	膀胱容量測量儀 Bladder Scan BVI 9400 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B28	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
108.12.16	1.0	新制定。	108 年 12 月 11 日護理長會議通過；108 年 12 月 16 日督導會議通過公布。
109.06.04	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.02.04	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.11	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	