

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血氧濃度感測儀 Schiller Argus OXMC 操作標準 Schiller Argus OXMC Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B29	制定者	N15 王素鴻	公布日期	109 年 05 月 19 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	109 年 05 月 19 日
版本/總頁數	第 1.0 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 02 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解血氧濃度感測儀(Schiller Argus OXMC)之操作步驟、要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：Schiller Argus OXMC (如右圖)

(二) 儀器面板功能鍵說明

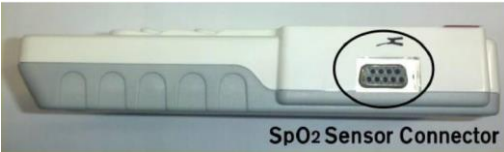
1. 外觀



- | | |
|-----------------|------------|
| 1、電源鍵 | 7、USB 孔 |
| 2、警報開/關鍵 | 8、直流電 DC 孔 |
| 3、上 | 9、LCD |
| 4、下 | 10、血氧感應線孔 |
| 5、主選單/輸入/變更顯示模式 | 11、固定架 |
| 6、選擇/趨勢參數確認鍵 | 12、揚聲器 |

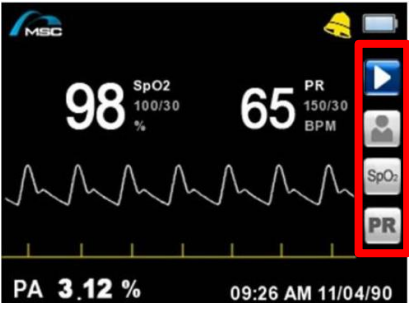
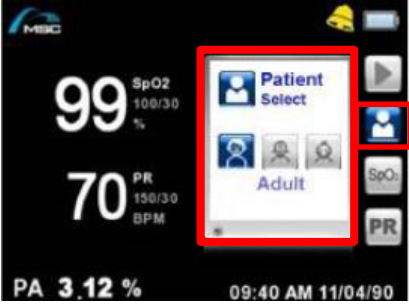
主題名稱	血氧濃度感測儀 Schiller Argus OXMC 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B29	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/8

2. 功能說明

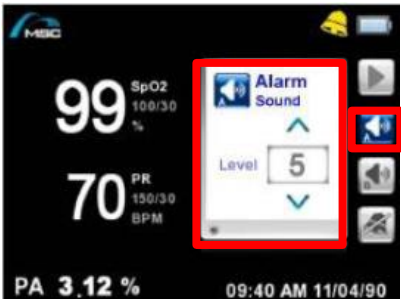
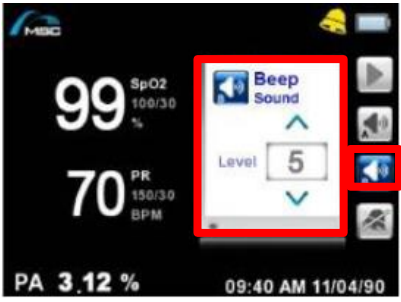
 DC Power Port	1. 將電源線接上儀器左側的電源連接孔。 2. 確認電源指示燈亮起。 3. 在電源關閉情況下充電，由完全沒電狀態至充飽電需時120分鐘。 4. 在完全充飽電且無警報啟動時約可使用5小時。 ※若指示燈未亮，請檢查電源線與電源連接器														
 SpO2 Sensor Connector	1. 傳感器(Sensor)連接口 ※連接口位於儀器右側														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>電量指示</th><th>狀態</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>充電中</td></tr> <tr> <td></td><td>已充飽 (藍色)</td></tr> <tr> <td></td><td>剩餘 100~50% (藍色)</td></tr> <tr> <td></td><td>剩餘50~20% (黃色)</td></tr> <tr> <td></td><td>剩餘20~10% (紅色)</td></tr> <tr> <td></td><td>低於 10% (黑色)</td></tr> </tbody> </table>	電量指示	狀態		充電中		已充飽 (藍色)		剩餘 100~50% (藍色)		剩餘50~20% (黃色)		剩餘20~10% (紅色)		低於 10% (黑色)	電池充電顯示 1. 若電池處於低電量或沒電時，請先接上電源進行充電後再使用。 2. 在電量低於10%時，請將電源線接上充電，否則機器將在10分鐘內自動關機。
電量指示	狀態														
	充電中														
	已充飽 (藍色)														
	剩餘 100~50% (藍色)														
	剩餘50~20% (黃色)														
	剩餘20~10% (紅色)														
	低於 10% (黑色)														
	1. 電源開/關鍵：按壓約 3 秒鐘，即可開/關機 2. 警報開/關：警報靜音；開/關 3. 上/下選擇鍵： ✓ 上鍵-主選單往上、在list menu中調高音量 ✓ 下鍵-主選單往下、在list menu中降低音量 4. 選單/輸入/變更顯示模式 ✓ 測量頁面：進入選單 ✓ 選單首頁：離開選單 ✓ 在選單模式設定頁面：進入選單首頁 ✓ 長按：變更顯示模式 5. 選擇/趨勢參數確認鍵 ✓ 選單模式：選擇 ✓ 長按：進入趨勢模式														

主題名稱	血氧濃度感測儀 Schiller Argus OXMC 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B29	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/8

(三) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 電源開/關鍵  ：按壓約3秒鐘，即可開/關機。	按此鍵可以開啟/關閉電源。
2. 進入系統設定，設定如下： (a)系統模式與設定變更：在基礎測量模式畫面按下  就會進入設定模式畫面。 (b)選定需調整的項目後，項目數值將在螢幕右側出現。數值可由上下鍵  來調整。 (c)完成設定後按一下  就可退回基本測量畫面。 (d)設定後的數值將會自動儲存，就算是設定後關機或重新開機也都會自動呈現上次調整後的數值。	
3. 進行3種病患類型設定：成人、兒童、新生兒。 (a)在基礎測量畫面按下  。 (b)利用上下鍵移動選取框至病患選擇  。 (c)按下選定  。 (d)利用上下鍵選擇需要的病患類型：成人、兒童、新生兒。 (e)選擇結束後，按  回到基礎測量畫面。	
4. 設定血氧濃度警報上下值： (a)在基礎測量畫面按下  。 (b)利用上下鍵移動選取框至設定血氧濃度警報上下值  。 (c)按下選定  。 (d)利用上下鍵調整數值（最高值區間100~92次/分，最低值區間99~85次/分），建議警告下限值至少設定90%以上。 (e)選擇結束後，按  回到基礎測量畫面。	
5. 設定脈搏警報上下值： (a)在基礎測量畫面按下  。 (b)利用上下鍵移動選取框至設定脈搏警報上下值  。 (c)按下選定  。 (d)利用上下鍵調整數值（最高值區間250~65次/分，最低值區間115~25次/分）。 (e)選擇結束後，按  回到基礎測量畫面。	
6. 設定警報音量：	

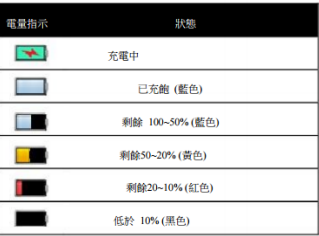
主題名稱	血氧濃度感測儀 Schiller Argus OXMC 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B29	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
(a)在基礎測量畫面按下 ()。 (b)利用上下鍵移動選取框至警報音量 ( )。 (c)按下選定 ()。 (d)利用上下鍵調整數值 (音量區間：1~9)。 (e)選擇結束後，按 () 回到基礎測量畫面。	
7. 設定Beep音量： (a)在基礎測量畫面按下 ()。 (b)利用上下鍵移動選取至設定Beep音量 ( )。 (c)按下選定 ()。 (d)利用上下鍵調整數值 (音量區間：0~9)。 (e)選擇結束後，按 () 回到基礎測量畫面。	
8. 設定警報靜音週期： (a)在基礎測量畫面按下 ()。 (b)利用上下鍵移動選取至設定警報靜音週期 ( )。 (c)按下選定 ()。 (d)利用上下鍵調整數值 (10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 秒)。 (e)選擇結束後，按 () 回到基礎測量畫面。	
9. 設定背光程度： (a)在基礎測量畫面按下 ()。 (b)利用上下鍵移動選取至設定背光程度 ( )。 (c)按下選定 ()。 (d)利用上下鍵選擇監測數值呈現的方式- (1~5)。 (e)選擇結束後，按 () 回到基礎測量畫面。	
10. 設定時間設定： (a)在基礎測量畫面按下 ()。 (b)利用上下鍵移動選取至設定時間 ( )。 (c)按下選定 ()。 (d)利用上下鍵選擇監測數值呈現的方式。 (e)按下選定 () 後，可跳下一行做設定，年 (Year)→月 (Month)→日 (Day)→時 (Hour)→分 (Minute)。 (f)選擇結束後，按 () 回到基礎測量畫面。	

主題名稱	血氧濃度感測儀 Schiller Argus OXMC 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B29	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/8

步驟	說明
11.恢復原廠設定 (a)在基礎測量畫面按下 () 。 (b)利用上下鍵移動選取至恢復原廠設定 () 。 (c)按下選定 () 。 (d)利用上下鍵選擇-是 (Yes) 或否 (No) 。 (e)選擇結束後，按 () 回到基礎測量畫面。	

(四) 異常簡易故障排除方法

NO	故障問題	檢查事項	處理方法
1		電池	1. 若電池處於低電量或沒電時，請先接上電源進行充電後再使用。 2. 在電量低於 10%時，請將電源線接上充電，否則機器將在 10 分鐘內自動關機
2		若 ARGUS OXM C 開機鍵無作用，或畫面無法開啟或開啟時無聲響等異常情形	1. 關閉主機。 2. 可能為保險絲問題，請先聯絡醫工組進行更換電源保險絲，若無法修復醫工組會協請廠商處理。 3. 若設備以內建電池運作中，請充電。
3		若主機指出內建電池使用中，但已連結電源	確定 ARGUS OXM C 電源線連結無誤。

(五) 異常訊息時，顯示病人狀況描述

Message 訊息	Description 描述
SENSOR OFF	病人端血氧濃度感應線脫落
NO SENSOR	機器端未接血氧濃度感應線
SpO2 HIGH LIMIT	當血氧濃度數值高過警報上限
SpO2 LOW LIMIT	當血氧濃度數值低於警報上限
PR HIGH LIMIT	脈搏數值高過警報上限
PR LOW LIMIT	脈搏數值低於警報上限
SIGNAL WEAK	當病人生理訊號微弱或消失
SIGNAL NOT DETECT	感應不到或感應微弱

主題名稱	血氧濃度感測儀 Schiller Argus OXMC 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B29	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/8

(六) 清潔保養注意事項

1. 以非腐蝕性的清潔劑或70%酒精，輕輕擦拭儀器的表面。
2. 勿將液體噴濺、傾倒到儀器及配件上。
3. 感應器可以使用清水沾濕抹布輕輕擦拭。

(七) 其他注意事項

參數範圍，參考如下：

參數	範圍
%SpO2 警報上限	最高值區間 100~91%
%SpO2 警報下限	最低值區間 99~85%
脈搏頻率警報上限	最高值區間 250~65 次/分
脈搏頻率警報下限	最低值區間 115~25 次/分
警報靜音期	10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 秒
警報音量	1~9
脈搏蜂鳴音量	0~9

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 血氧濃度感測儀使用說明評核表 Schiller Argus OXMC (編號：
A31000-Q18-F-B29)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

主題名稱	血氧濃度感測儀 Schiller Argus OXMC 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B29	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	7/8

七、附件

(略)

主題名稱	血氧濃度感測儀 Schiller Argus OXMC 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B29	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	8/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
109.05.19	1.0	新制定。	109 年 05 月 13 日 護理長會議通過；109 年 05 月 19 日督導會議通過公布。
110.02.04	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.02.06	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	