

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	紫外線消毒燈 EZU-130 型操作標準 UV Disinfection Light Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B30	制定者	M09 李姿月	公布日期	109 年 06 月 16 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 07 月 08 日
版本/總頁數	第 1.2 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 07 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解紫外線消毒燈之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

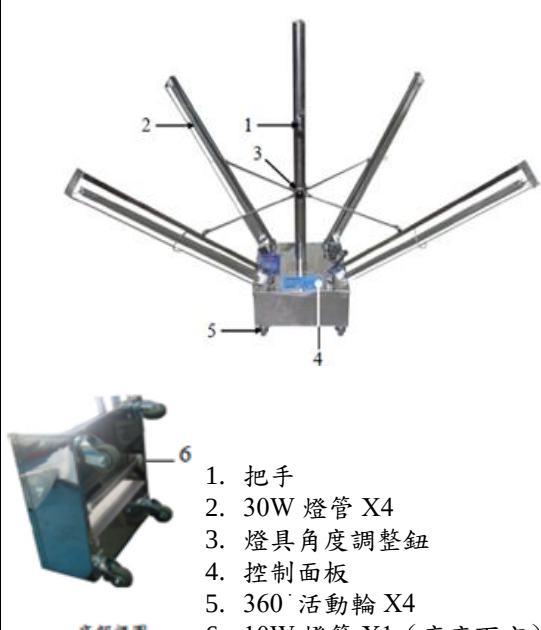
二、範圍

護理部各單位。

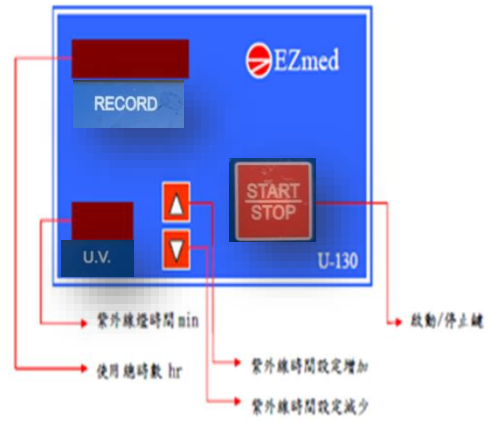
三、說明

(一) 廠牌規格：EZU-130 型

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 將燈具移至欲殺菌環境的位置。	外觀說明  1. 把手 2. 30W 燈管 X4 3. 燈具角度調整鈕 4. 控制面板 5. 360°活動輪 X4 6. 10W 燈管 X1 (底座下方) 底部視圖
2. 將燈具打開至最大範圍。	
3. 插上 110V 電源插頭。	
4. 此時面板會自動顯示上次設定時間數字。	

主題名稱	紫外線消毒燈 EZU-130 型操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B30	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明
5. 設定殺菌計時開關（一般建議設定 30 分鐘以上）。	
6. 按 START//STOP 鍵會自動啟動和停止。	操作面板說明  RECORD: 紫外線燈使用總時數顯示 U.V: 紫外線時間設定顯示 STAR/STOP: 啟動/停止鍵 ✧ 使用總時數歸零：啟動鍵&紫外線時間設定減少鍵一起按著約 12 秒即可歸零
7. 警示聲響 30 秒內工作人員儘速離開現場。	
8. 待 30 秒後紫外線燈亮起後開始殺菌。	
9. 紫外線滅菌設定時間到達後，紫外線燈會自動關閉。	
10. 殺菌完成時，警示聲響，表示殺菌完畢。	
11. 如中途要重新設定或停止，則按 START//STOP 鍵即可。	
12. 殺菌完畢時拔除電源插頭，並把電源線收好。	
13. 收起燈具至最小體積，收藏時注意避免碰撞。	
注意事項	
1. 使用前請確認插座之電壓是否為 110V。	
2. 每次使用時要檢視燈管是否全正常。	
3. 必要可於操作時戴上防護眼鏡，勿直視紫外線燈。	
4. 每 8000 小時需定期更換燈管，以確保殺菌效果。	
5. 移動前請先收起燈具，避免移動時碰撞燈管及燈座。	
6. 移動時請拉把手，切勿拉燈管保護座。	
7. 更換燈管後請將使用總時數(RECORD)歸零，同時按住紫外線時間設定減少及啟動/停止鍵 12 秒。	

主題名稱	紫外線消毒燈 EZU-130 型操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B30	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
8. 新燈管在使用前，應以 75%酒精的紗布擦拭清除油漬、手汗及灰塵。	
9. 紫外線殺菌能力取決於照射強度與照射時間，且殺菌的速度與紫外線照射之時間，需再考量紫外線燈管總瓦數與照射物體的距離。建議紫外線消毒燈，若要達 99.9%殺菌效果，總瓦數 120-140W，距離 6 公尺，建議照射至少 2 小時以上。本紫外線消毒燈 EZU-130 型總瓦數 130W（30W*4 支、底座下方 10W*1 支），請依環境現況距離調整照射時間。	
10. 燈管上之灰塵、油漬都會直接影響其穿透能力，故隨時保持乾淨。	

（三）異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 燈管不亮	1. 保險絲燒毀 2. 啟動器故障 3. 變壓器故障 4. 燈管故障	進行系統報修，由醫工室進行維修。

（四）清潔保養注意事項

1. 使用後清潔方式：

(1) 一般病人使用後，請用清水擦拭清潔。

(2) 接觸性隔離之病人使用後，請使用 1000 ppm 漂白水擦拭消毒。

2. 燈管更換：

(1) 當燈管不亮時，請醫工檢視是否需更換。

(2) 當一般使用下，請每年申請請修，請醫工進行評估，或當累積時數達 8000 小時。

（五）注意事項

1. 設備損壞：

(1) 對於非抗紫外線之物品（例如：塑膠類製品及壓克力等材質等等），需移開至照射範圍之外，以避免紫外線破壞其物品材質而造成龜裂或損壞，或者使用深色的布簾加以遮蓋物品，防止紫外線的穿透。

(2) 請勿讓液體流入控制箱內，以免導致內部的控制系統短路損壞。

(3) 請勿使紫外線殺菌裝置暴露於過度潮濕的地方，以免系統短路損壞。

2. 爆炸危險：當處於可燃性麻醉氣體環境時，請勿操作此紫外線殺菌裝置。

主題名稱	紫外線消毒燈 EZU-130 型操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B30	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	4/6

3. 觸電危險：

(1)當電源裝置未關閉時，請勿移動此燈。

(2)確認適當地完成電源接地。

4. 人員傷害：

(1)紫外線殺菌裝置具有光線殺菌之功能，其殺菌力及範圍非常廣泛，因此對於使用單位及人員須特別注意使用時人員於照射範圍的管制。

(2)紫外線之穿透力極強，若人員必須進入照射範圍內，眼睛請勿直視照射源，以免眼睛受到傷害。

5. 錯誤危險：

(1)請勿使用非殺菌燈配件於此產品上，或使用非此廠牌製造的殺菌燈配件於產品上，以避免殺菌燈/配件發生損壞或對病人/人員造成傷害。

(2)使用者應對此紫外線殺菌裝置的操作與控制熟練，否則將可能發生嚴重的人員傷害或機件損壞。

（六）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

主題名稱	紫外線消毒燈 EZU-130 型操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B30	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	5/6

七、附件

(略)

主題名稱	紫外線消毒燈 EZU-130 型操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B30	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	6/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
109.06.16	1.0	新制定	109 年 06 月 10 日 護理長會議通過； 109 年 06 月 16 日 督導會議通過公布。
110.07.08	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.02.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.03.19	1.1	第三項第二目注意事項 9.刪除 1952 年文獻。	113 年 02 月 01 日 照護標準組會議通過；113 年 03 月 13 日護理長會議通過；113 年 03 月 19 日督導會議通過公布
114.07.08	1.2	第三項第四目第一點使用後清潔方式：(2)接觸性隔離之病人使用後，請使用 0.05%漂白水擦拭消毒。修正為：請使用 1000ppm 漂白水擦拭消毒。	114 年 06 月 05 日 照護標準組會議通過；114 年 06 月 11 日護理長會議通過；114 年 07 月 08 日督導會議通過公布。