

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | “生訊”無線生理信號傳導器操作標準<br>“BST” Wireless Vital Sign Transducer |     |         |      |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q17-W-B31                                          | 制定者 | N13 翁岱鈺 | 公布日期 | 109 年 07 月 21 日 |
| 制定單位   | 護理部                                                       | 核准者 | 吳姿蓉     | 修正日期 | 109 年 07 月 21 日 |
| 版本/總頁數 | 第 1.0 版/8 頁                                               | 審查者 | 劉俞均     | 檢閱日期 | 114 年 06 月 05 日 |

## 一、目的

讓護理人員了解“生訊”無線生理信號傳導器之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

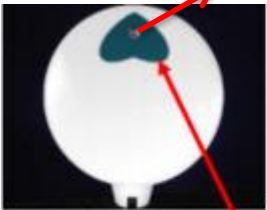
## 二、範圍

心臟內外科病房及同位素治療中心。

## 三、說明

(一) 廠牌規格：VT2000

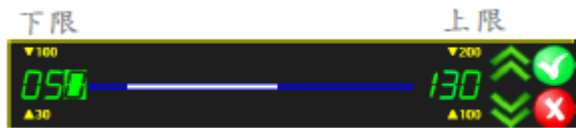
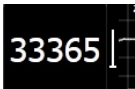
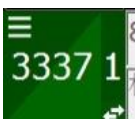
(二) 儀器操作步驟及要點說明

| 步驟                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、儀器介紹及如何組裝                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
|  <p>指示燈號</p> <p>正面</p> <p>開關</p>  <p>反面</p> <p>金屬扣</p> <p>生理信號傳導器</p> |  <p>生理信號導線</p>                                                                       |
| 1. 先將生理信號傳導器對準防呆卡榫後，接上生理信號導線                                                                                                                                                                                                                |   |

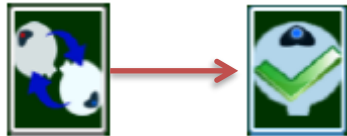
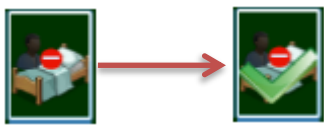
|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | “生訊”無線生理信號傳導器操作標準 | 制定單位 | 護理部     |        |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B31  | 版本   | 第 1.0 版 | 頁碼/總頁數 | 2/8 |

| 步驟                                                     | 說明                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 按下生理信號傳導器                                           |                                                                                                                                                                        |
| 3. 生理信號傳導器底下的扣子扣上電極貼片並貼至軀幹左下方，生理信號導線的扣子扣上電極貼片並貼至軀幹右上方。 |    |
| <b>二、病人入院如何裝置</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. 按下傳導器上按鈕開關                                          |                                                                                                                                                                       |
| 2. 點擊任一未使用區域開始設定                                       |                                                                                                                                                                       |
| 3. 可連結 HIS 中資料選擇床號與病人                                  |                                                                                                                                                                      |

|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | “生訊”無線生理信號傳導器操作標準 | 制定單位 | 護理部     |        |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B31  | 版本   | 第 1.0 版 | 頁碼/總頁數 | 3/8 |

| 步驟                                      | 說明                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 若無法連結 HIS 資料可手動輸入病人 ID (必填) 與姓名      |     |
| 5. 按下確認按鈕                               |    |
| 6. 顯示 10 秒鐘測試訊號                         |     |
| 7. 出現此圖片表示連線成功，可將機器裝置病人身上。              |     |
| 8. 將傳導器扣上電極貼片並貼於病人身上                    |   |
| 9. 滑鼠右鍵點擊心跳區間設定參數上下限                    |   |
| 10. 點選欲修改的數字，選擇增加或減少後，點選確定(V)，若要取消點選(X) |  |
| <b>三、換床流程</b>                           |                                                                                      |
| 1. 點擊使用中床號                              |   |
| 2. 點擊床號按鈕                               |   |
| 3. 選擇新房/床號                              |   |

|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | “生訊”無線生理信號傳導器操作標準 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B31  | 版本   | 第 1.0 版 | 頁碼/總頁數 | 4/8 |

| 步驟                        | 說明                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 按下換床功能按鈕後，再按下確認按鈕(V)   |    |
| <b>四、換傳導器流程</b>           |                                                                                     |
| 1. 按下新傳導器上按鈕開關            |    |
| 2. 點擊使用中床號                |    |
| 3. 點擊換傳導器按鈕               |    |
| 4. 按下更換傳導器功能按鈕，再按下確認按鈕(V) |    |
| 5. 新傳導器繼續監測               |  |
| 6. 舊傳導器充電備用               |  |
| <b>五、病人出院如何移除裝置</b>       |                                                                                     |
| 1. 點擊使用中床號                |  |
| 2. 按下移除功能按鈕後，按下確認按鈕(V)    |  |
| 3. 關機完成無訊號顯示              |  |
| 4. 取下傳導器充電備用              |  |

|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | “生訊”無線生理信號傳導器操作標準 | 制定單位 | 護理部     |        |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B31  | 版本   | 第 1.0 版 | 頁碼/總頁數 | 5/8 |

### (三) 生理信號傳導器指示燈號說明

| 燈號 | 燈號狀態 | 裝置狀態        |
|----|------|-------------|
| 藍燈 | 閃爍   | 正常傳輸        |
| 紅燈 | 持續   | 充電中         |
| 綠燈 | 持續   | 充電完成        |
| 紅燈 | 閃爍   | 失去接收器訊號、低電量 |
| 綠燈 | 閃爍   | 切換至其他接收器    |

### (四) 護理站中控電腦版面介紹

#### Vital Guard Workstation





|      |                   |        |         |
|------|-------------------|--------|---------|
| 主題名稱 | “生訊”無線生理信號傳導器操作標準 | 制定單位   | 護理部     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B31  | 版本     | 第 1.0 版 |
|      |                   | 頁碼/總頁數 | 6/8     |



#### (五) 異常簡易故障排除方法

| 異常情形                                        | 可能原因及解決方法                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 傳導器配戴在身上卻顯示 LEAD OFF (持續或斷斷續續) 或 ECG 基線雜訊過大 | 電極貼片配戴不良或失去黏性，重新配戴，皮膚可用酒精清潔後再用水濕潤。 |
| 病患無異常卻顯示 asystole                           | 電極貼片互黏會導致此狀況，重新配戴                  |

#### (六) 清潔保養及注意事項

##### 1. 傳導器

- (1) 檢查傳導器塑膠外殼、金屬扣、接頭與金屬接點外觀是否完整無破損或歪斜，無液體或固體殘留，開關處是否黏貼牢固無破損。
- (2) 用軟乾布擦拭生理信號傳導器的表面。儀器為鋰電池，不使用仍建議持續充電。
- (3) 若不慎沾黏導電膠或其他汙漬，以微濕潤的軟布擦拭將表面污垢移除，隙縫處以非金屬工具挑除乾淨後再以酒精棉片清潔（應避開開關與接頭處）最後再用乾布擦乾。

|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | “生訊”無線生理信號傳導器操作標準 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B31  | 版本   | 第 1.0 版 | 頁碼/總頁數 | 7/8 |

(4)保養後需確認傳導器之接頭及本體保持乾燥，並且無異物嵌入。

(5)充滿電的傳導器應至少可連續使用 7 天，若低於 7 天可考慮更換內部電池或檢修。

## 2. 傳導線

(1)檢查傳導線，外觀應平順沒有無法恢復之變形，無破損或斷裂。

(2)若不慎沾黏導電膠或其他汙漬，以微濕潤的軟布擦拭將表面污垢移除，隙縫處以非金屬工具挑除乾淨再以酒精棉片清潔（應避開接頭處）最後再用乾布擦乾，請避免使用有機溶劑或腐蝕性溶液擦拭，接頭部位請勿沾濕。

(3)保養後需確認傳導線之接頭及本體保持乾燥，並且無異物嵌入。

## （七）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

## 四、使用表單

（一）無線生理信號傳導器使用說明評核表（編號：A31000-Q18-F-B31）

## 五、流程圖

（略）

## 六、參考資料

（略）

## 七、附件

（略）

|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | “生訊”無線生理信號傳導器操作標準 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B31  | 版本   | 第 1.0 版 | 頁碼/總頁數 | 8/8 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明            | 備註                                                     |
|-----------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 109.07.21 | 1.0 | 新制定。            | 109 年 07 月 08 日<br>護理長會議通過；109 年 07 月<br>21 日督導會議通過公布。 |
| 110.07.08 | 1.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |                                                        |
| 111.06.02 | 1.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |                                                        |
| 112.02.02 | 1.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |                                                        |
| 113.02.01 | 1.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |                                                        |
| 114.06.05 | 1.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |