

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	ACCUVEIN AV500 靜脈定位器操作標準 ACCUVEIN AV500 Vein Viewing Lector Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B32	制定者	RCC 譚靖馨	公布日期	109 年 12 月 22 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	109 年 12 月 22 日
版本/總頁數	第 1.0 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解靜脈定位器之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

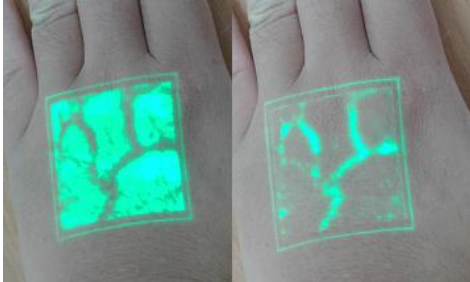
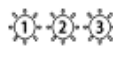
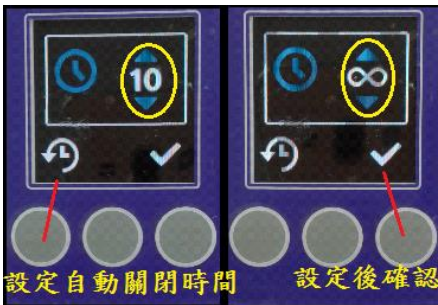
三、說明

(一) 廠牌規格：ACCUVEIN AV500 (如圖一、圖二)。



主題名稱	ACCUVEIN AV500 靜脈定位器操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B32	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/6

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 打開電源開關：點擊紫色按鈕進行機器開/關。	
2. 啟動後螢幕顯示如右圖。	 電量顯示 反轉設定 超時設定 投射強度設定 操作設定按鈕
3. 設定操作： (可依實際需求給予設定，於設定後可輔助周邊靜脈留置針之放置) (1)螢幕左按鈕  為反轉設定，可反轉靜脈投影顯示方式，選擇靜脈顯示為綠光或暗色。	 改變反轉設定可改善靜脈的可見度和眼睛舒適度。
(2)螢幕中按鈕  為投射強度，可用於調節控制靜脈投影的亮度。	
(3)螢幕右按鈕  為超時設定，決定靜脈顯示燈關閉前的時間長度，可以設定為10分鐘或∞（無限時）。	 設定自動關閉時間 設定後確認

主題名稱	ACCUVEIN AV500 靜脈定位器操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B32	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
	此設定有助於延長 AV500 電池使用時間。
4. AV500 用於靜脈定位及評估： (1)操作時將設備置於皮膚表面上方 15 至 25 公分處，掃描並查看感興趣區。 (2)選擇靜脈後，確保靜脈顯示燈位於靜脈中心線的正上方。 (3)透過調整高度和角度來提高顯示品質。 (4)根據患者的靜脈系統、室內照明和靜脈深度，將設備移近或遠離皮膚，可以幫助顯示更多的靜脈。	 靜脈顯示燈亮起時照射在患者皮膚上，可在觸診前快速掃描皮膚，以幫助縮小可能的位置範圍，或在觸診後用以確認靜脈位置和適合性。
5. 確認靜脈並依護理部標準技術放置靜脈留置針：以 AV500 輔助，並透過常規醫療技術和良好的醫學判斷(例如靜脈視診、觸診和其他醫療技術)確認靜脈的位置和適合性。	AV500 可用於輔助定位表淺靜脈，但不能替代靜脈視覺及觸覺定位和評估，且定位可能因患者皮膚問題、毛髮、斑痕、靜脈深淺及脂肪等因素，影響靜脈燈之顯示。
6. 使用完畢，請關機放回充電座上，避免儀器設備摔壞故障。	1. 充電時會顯示充電圖標，只有在偵測到設備時，充電座上的指示燈才會亮起。 2. 電池量不足時，電池指示燈將以黃色閃爍並反覆發出蜂鳴聲，在電池耗盡前，螢幕上顯示需為電池充電之警報，充電後可恢復正常操作。 

主題名稱	ACCUVEIN AV500 靜脈定位器操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B32	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/6

(三) 異常故障處理方法

異常狀況	發生原因	處理方法
	故障 若 AV500 偵測到設備無法正常操作，將關閉靜脈顯示燈，並顯示警報或故障螢幕。	如果出現故障螢幕，應立即停止使用 AV500。關閉設備並聯絡醫工室處理，並告知故障螢幕上顯示的序號和故障代碼。
	溫度過低警報 設備溫度過低。	停止使用設備，聯絡醫工室處理。
	溫度過高警報 設備溫度過高。	停止使用設備，聯絡醫工室處理。
充電問題	若AV500持續插入經認證的原廠充電座上，而充電座上的指示燈未亮則表示內部電池發生異常	聯絡醫工室處理。

(四) 清潔保養注意事項

1. 為達最佳性能，AV500背面的光學表面和鏡頭應保持清潔，可使用酒精濕巾擦拭。
2. 如果靜脈查看視窗有刮痕或髒汙請勿使用；靜脈查看視窗若有刮痕，請連絡醫工檢視。
3. 請勿將AV500及充電座等配件弄濕或浸入液體中。
4. 請勿使用高溫或高壓滅菌方式對AV500進行消毒。
5. 請勿清潔放在充電座或免提配件內的AV500。
6. 清潔充電座之前，先拔下充電座插頭。
7. 請勿自行拆卸、改裝或維修AV500及其充電配件。

(五) 其它注意事項

1. 靜脈顯示視窗上有污垢或刮痕，在靜脈投影中顯示為暗色陰影。

主題名稱	ACCUVEIN AV500 靜脈定位器操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B32	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/6

2. 如果在其溫度範圍之外操作，可能無法顯示。

3. 如果在陽光等強光下操作，可能無法顯示。

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) ACCUVEIN AV500 靜脈定位器使用說明評核表 (編號：A31000-Q18-F-B32)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	ACCUVEIN AV500 靜脈定位器操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B32	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
109.12.22	1.0	新制定。	109 年 12 月 09 日 護理長會議通過；109 年 12 月 22 日督導會議通過公布。
110.07.08	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.02.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.02.01	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	