

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	輸液/輸血加溫器 Barkey S – line 操作標準 Barkey S – line Infusion/Blood Warmer Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B33	制定者	CCU 李涵蓁	公布日期	110 年 04 月 06 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	110 年 04 月 06 日
版本/總頁數	第 1.0 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

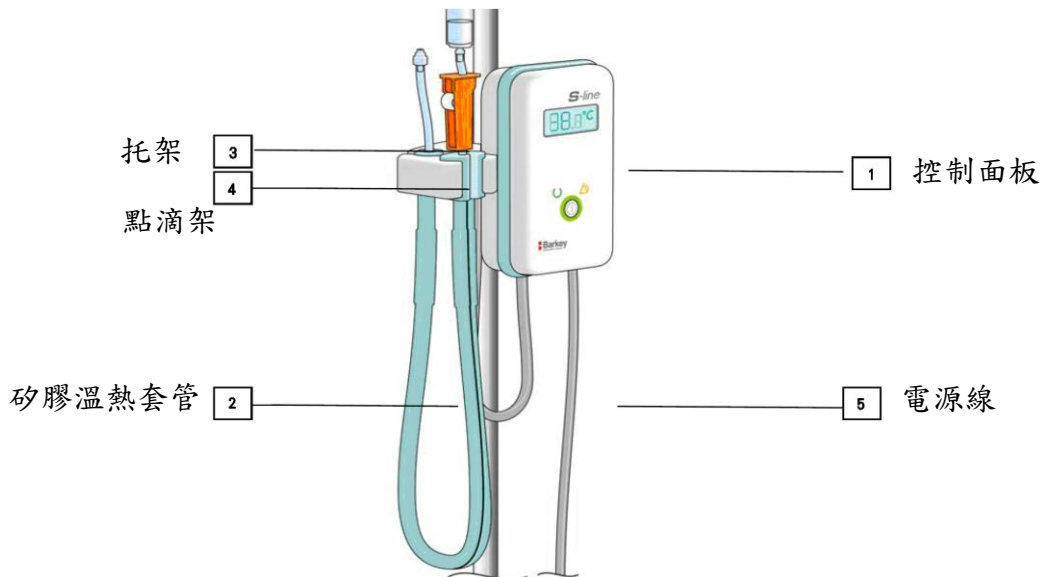
讓護理人員了解輸液/輸血加溫器之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

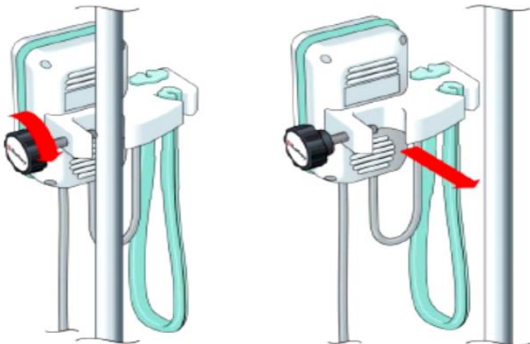
三、說明

(一) 廠牌規格：Barkey S – line

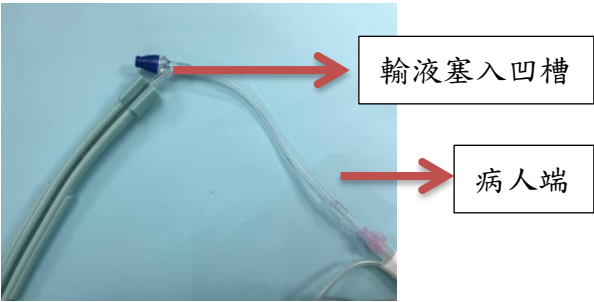


主題名稱	輸液/輸血加熱器 Barkey S-line 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B33	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/6

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明														
1. 控制面板須固定鎖緊在點滴架上避免晃動或滑落。如未固定好，可能會使機組滑落，導致輸液位置過低，影響流速。															
2. 插上電源，輕觸電源開關啟動電源。 啟動電源，開始自我測試，首先為黃色指示燈顯示，出現聲音警訊約 1 秒鐘之後光環會變成綠色。 控制面板符號代表的意義： <table border="1" data-bbox="153 976 737 1344"> <tr> <td></td><td>觸控式開關</td></tr> <tr> <td></td><td>如觸控式開關外圍的光環顯示綠色時，表示電源開啟可以使用</td></tr> <tr> <td></td><td>當綠色光環亮燈時，機組可以使用</td></tr> <tr> <td></td><td>如觸控式開關外圍的光環顯示黃色時，表示機組故障，不可以使用</td></tr> <tr> <td></td><td>黃色符號亮燈時，表示機組發生故障同時警報聲會響起</td></tr> <tr> <td></td><td>此符號表示矽膠溫熱套管正在加熱。符號會出現在LCD顯示幕的左上方。</td></tr> <tr> <td></td><td>此符號表示過溫保護測試進行中。符號會出現在LCD顯示幕的左下方。此時請勿進行輸液加熱</td></tr> </table>		觸控式開關		如觸控式開關外圍的光環顯示綠色時，表示電源開啟可以使用		當綠色光環亮燈時，機組可以使用		如觸控式開關外圍的光環顯示黃色時，表示機組故障，不可以使用		黃色符號亮燈時，表示機組發生故障同時警報聲會響起		此符號表示矽膠溫熱套管正在加熱。符號會出現在LCD顯示幕的左上方。		此符號表示過溫保護測試進行中。符號會出現在LCD顯示幕的左下方。此時請勿進行輸液加熱	 由黃燈變綠燈
	觸控式開關														
	如觸控式開關外圍的光環顯示綠色時，表示電源開啟可以使用														
	當綠色光環亮燈時，機組可以使用														
	如觸控式開關外圍的光環顯示黃色時，表示機組故障，不可以使用														
	黃色符號亮燈時，表示機組發生故障同時警報聲會響起														
	此符號表示矽膠溫熱套管正在加熱。符號會出現在LCD顯示幕的左上方。														
	此符號表示過溫保護測試進行中。符號會出現在LCD顯示幕的左下方。此時請勿進行輸液加熱														
3. Barkey S-line 開始加熱工作，矽膠溫熱套管的內部導體會開始加熱到 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$ (約 1-2 分鐘)。	 加熱到 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$														

主題名稱	輸液/輸血加熱器 Barkey S-line 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B33	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
4. 打開矽膠溫熱套管的末端凹槽將輸液 IV 管接近病人輸注端先放置到裡面，從輸液 IV 管約 3 公分處開始放置。	
5. 以大拇指輕壓輸液 IV 管讓矽膠溫熱套管凹槽將輸液 IV 管完全包覆其中，直到矽膠溫熱套管的前端的位置，將矽膠溫熱套管的前端掛在托架的前側。	
6. 待溫度到達 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$ 時即可使用。	顯示幕上所顯示的是矽膠溫熱套管實際加熱的溫度。

主題名稱	輸液/輸血加熱器 Barkey S – line 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B33	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/6

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 過溫保護（控制面板顯示黃色警訊）	(1) 當溫度達到 42°C +/-1°C，矽膠溫熱套管加熱裝置會切斷電源，控制面板會顯示黃色警訊，以及聲音警訊響起。 (2) 矽膠溫熱套管內的加熱導體有缺陷。 (3) 感知器或感知器電線毀損。 (4) 電子組件溫度過高。	請將機組電源關閉並拔除插頭，約等候 5 分鐘機組冷卻，再次啟動電源。如果依舊發生故障警示，則請修處理。

(四) 清潔保養注意事項

1. 關閉電源，插頭應與電源插座分離。
2. 消毒可使用紗布沾少量酒精或清水擦拭面板及套管，直到完全乾淨。
3. 請勿以高壓、高溫或熱化學劑滅菌。

(五) 使用注意事項

1. 矽膠溫熱套管不可扭曲或彎折，以免影響流速。
2. 請勿擅自修改矽膠溫熱套管外型、長短或任意破壞。
3. 請勿直接對矽膠溫熱套管覆蓋物品、加熱或冷卻。
4. 勿讓病人皮膚接觸矽膠溫熱套管，以免燙傷病人。

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 輸液/輸血加熱器 Barkey S – line 操作說明評核表（編號：A31000-Q18-F-B33）。

主題名稱	輸液/輸血加溫器 Barkey S – line 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B33	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/6

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	輸液/輸血加溫器 Barkey S – line 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B33	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
110.04.06	1.0	新制定。	110 年 03 月 17 日護理長會議通過；110 年 04 月 06 日督導會議通過公布。
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.02.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.02.01	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	