

中山醫學大學附設醫院

|        |                                 |     |         |      |                 |
|--------|---------------------------------|-----|---------|------|-----------------|
| 主題名稱   | 注射筒幫浦 TOP-5530 操作標準             |     |         |      |                 |
|        | Syring Pump Operating Standards |     |         |      |                 |
| 編號     | A31000-Q17-W-B35                | 制定者 | R10 陳倩芳 | 公布日期 | 110 年 04 月 06 日 |
| 制定單位   | 護理部                             | 核准者 | 吳姿蓉     | 修正日期 | 110 年 04 月 06 日 |
| 版本/總頁數 | 第 1.0 版/6 頁                     | 審查者 | 劉俞均     | 檢閱日期 | 114 年 06 月 05 日 |

### 一、目的

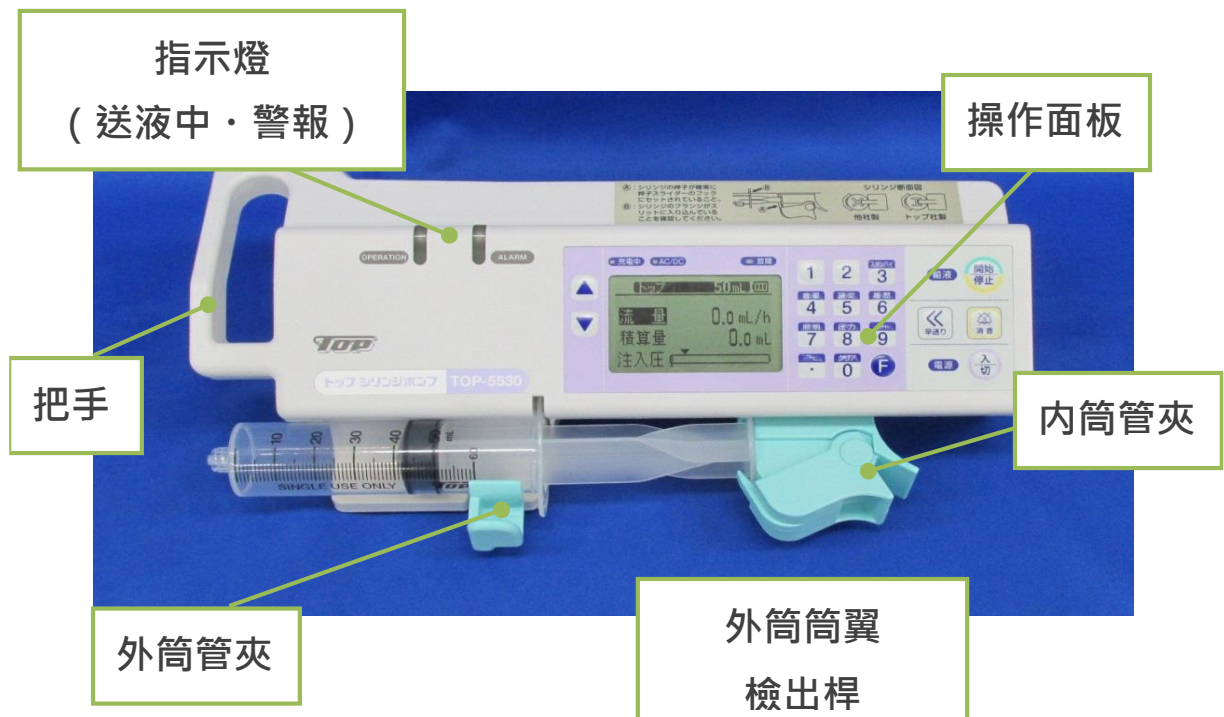
讓護理人員了解注射筒幫浦(TOP-5530)之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

## 二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

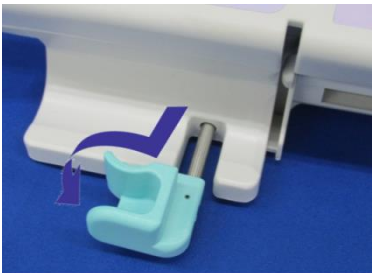
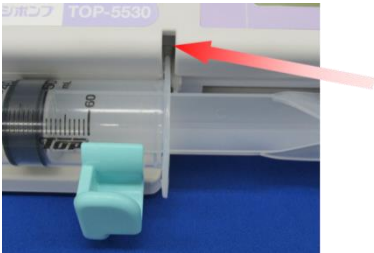
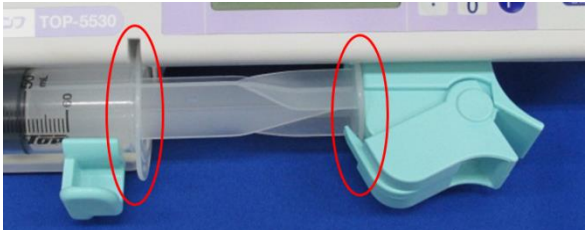
### 三、說明

(一) 廠牌規格：TOP-5530

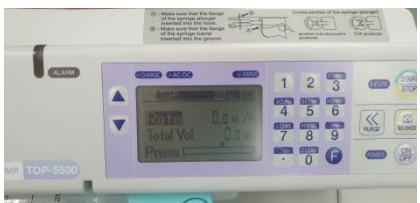


|      |                     |      |         |        |     |
|------|---------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 注射筒幫浦 TOP-5530 操作標準 | 制定單位 | 護理部     |        |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B35    | 版本   | 第 1.0 版 | 頁碼/總頁數 | 2/6 |

## (二) 儀器操作步驟及要點說明

| 步驟                                            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.連接 AC 電源線、按下電源鍵。<br>※蜂鳴器響起，機台進行 <u>自主檢測</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.安裝注射筒。                                      | <p>(1) 拉出外筒夾，向左回轉。</p>  <p>(2) 注射筒的外筒筒翼安裝在溝槽中。</p>  <p>(3) 抓住內筒滑動部的扳手後移動，置入注射筒後移動內筒滑動部夾在注射筒內筒上。</p>   |

|      |                     |      |         |        |     |
|------|---------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 注射筒幫浦 TOP-5530 操作標準 | 制定單位 | 護理部     |        |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B35    | 版本   | 第 1.0 版 | 頁碼/總頁數 | 3/6 |

| 步驟            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.確認注射筒廠牌及尺寸。 | <p>(1) 選擇注射筒廠牌。</p>  <p>(2) 確認注射筒廠牌及尺寸是否一致</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.設定流量（投藥量）。  | <p>流量項目反黑，以數字鍵盤輸入數值。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.輸液開始。       | <p>確保輸液路徑後，按下『開始/停止』鍵，開始輸液。</p> <p>※送液指示燈開始綠色閃爍</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.輸液中的流量變更。   | <p>(1) 輸液開始後、按下【 + 】鍵，流量部分會點滅閃爍。</p> <p>(2) 以數字鍵輸入流量。</p> <p>(3) 再次按下【 + 】就完成流量變更。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.其他注意事項      | <p>(1) 快送鍵 ：需快速輸送時可使用，快送鍵按 2 次後，就可以繼續按。</p> <p>(2) 歸零總量： + </p> <p>(3) 待機模式： + </p> <p>(4) 蜂鳴器音量變更： + </p> |

|      |                     |      |         |        |     |
|------|---------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 注射筒幫浦 TOP-5530 操作標準 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B35    | 版本   | 第 1.0 版 | 頁碼/總頁數 | 4/6 |

| 步驟 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(5) 設定模式： + </p> <p>(6) 履歷機能： + </p> <p>(7) 背光 ON/OFF： + </p> <p>(8) 注入中的壓力顯示： + </p> <p>(9) 鎖鍵： + </p> |

### (三) 異常簡易故障排除方法

| 異常狀況                        | 發生原因                                                             | 處理方法                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蜂鳴器發出 Beep 長音<br>警報指示器閃爍    | 1.注射筒脫離。<br>2.待機超過三分鐘。<br>3.阻塞。<br>4.輸液結束。<br>5.內部電池耗盡。<br>6.故障。 | 1.正確安裝注射筒。<br>2.開始使用或關閉電源。<br>3.排除阻塞後重新安裝。<br>4.若需繼續輸液請更換注射筒。<br>5.連接外部電源。<br>6.重新開機，若無法排除即送修。 |
| 蜂鳴器發出 3 短 Beep 音<br>警報指示器閃爍 | 7.未完成流量設定。<br>8.注射筒內剩餘藥量已不多。<br>9.低電量。                           | 1.設定流量後開始輸液。<br>2.請按靜音鍵，準備更換注射筒。<br>3.連接外部電源線插頭，提供電源。                                          |
| 機器按開始鍵後沒反應。                 | 4.沒有電源。<br>5.故障。                                                 | 連接外部電源線插頭，重新開機，若無法排除即送修。                                                                       |

### (四) 清潔保養注意事項

- 1.儀器上不可以放置任何物品，如飲料...等。
- 2.儀器平時要蓄電，避免轉送病人途中機器沒電。
- 3.藥液附著或有不乾淨時，請以溫水沾濕柔軟的布料擦拭，不要用酒精或稀釋劑等有機溶劑來擦拭機體。
- 4.平時電線需用繞圈方式捲好，勿來回對折電源線，避免電線折損造成接觸不良甚至漏電。

|      |                     |      |         |        |     |
|------|---------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 注射筒幫浦 TOP-5530 操作標準 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B35    | 版本   | 第 1.0 版 | 頁碼/總頁數 | 5/6 |

#### (五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

### 四、使用表單

(一) 注射筒幫浦TOP-5530使用說明評核表（編號：A31000-Q18-F-B35）。

### 五、流程圖

(略)

### 六、參考資料

(略)

### 七、附件

(略)

|      |                     |      |         |        |     |
|------|---------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 注射筒幫浦 TOP-5530 操作標準 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q17-W-B35    | 版本   | 第 1.0 版 | 頁碼/總頁數 | 6/6 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明            | 備註                                                     |
|-----------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 110.04.06 | 1.0 | 新制定。            | 110 年 03 月 17 日<br>護理長會議通過；110 年 04 月<br>06 日督導會議通過公布。 |
| 111.06.02 | 1.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |                                                        |
| 112.02.02 | 1.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |                                                        |
| 113.02.01 | 1.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |                                                        |
| 114.06.05 | 1.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |
|           |     |                 |                                                        |