

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血氧濃度感測儀Schiller Argus OXM Plus操作標準 Schiller Argus OXM Plus Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B37	制定者	N17 陳瑩婕	公布日期	110 年 07 月 06 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	110 年 07 月 06 日
版本/總頁數	第 1.0 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解血氧濃度感測儀(Schiller Argus OXM Plus)之操作步驟、要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

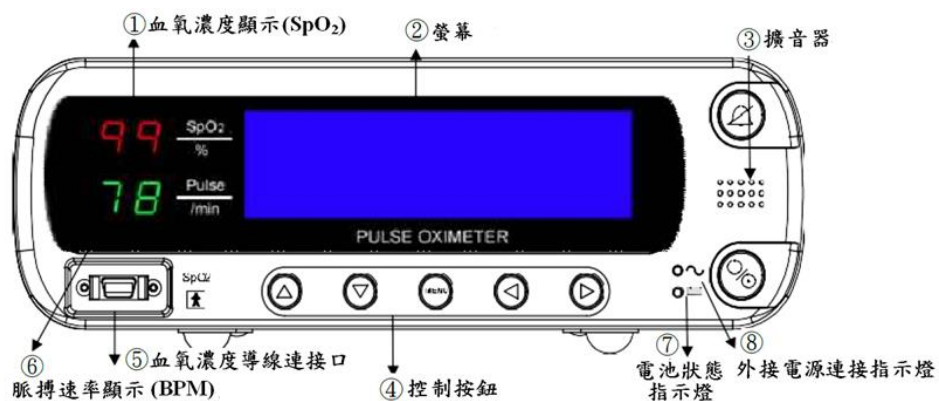
三、說明

(一) 廠牌規格：Schiller Argus OXM Plus



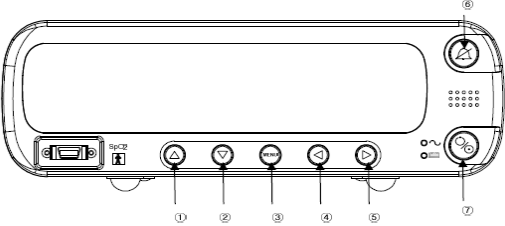
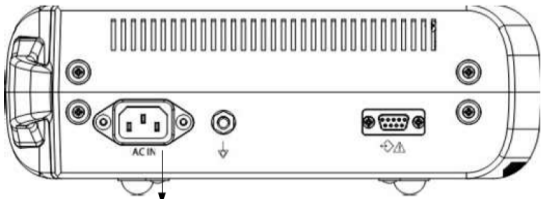
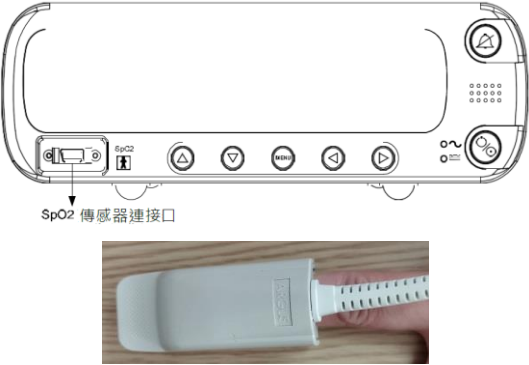
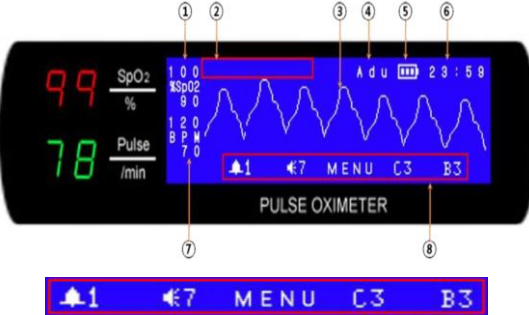
(二) 儀器面板功能鍵說明

1.外觀



2.功能說明

主題名稱	血氧濃度感測儀(Schiller Argus OXM Plus)操作標準	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q17-W-B37	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數 2/8

	1.▲按鍵：上選/增加。 2.▼按鍵：下選/降低。 3.Menu按鍵：進入/離開選單模式介面。 4.◀按鍵：增加。 5.▶按鍵：降低。 6.關閉警報音：警報音開啟/關閉。 7.電源開關：長按電源開/關。												
 電源連接口	1.將電源線連接到儀器背面的電源連接口。 2.電源開/關鍵：按壓約2秒鐘以上，即可開/關機。 3.確認電源指示燈已開啟。 4.在電源關閉情況下充電，由完全沒電狀態至充飽電需時200分鐘。 5.完全充飽電且無警報啟動，約可使用4小時30分鐘。 注意：電源指示燈未亮，請檢查電源線與電源連接器。												
 SpO2 傳感器連接口	1.將 SpO2 感應器(sensor)連接到儀器正面的傳感器連接口。 2.將 SpO2 感應器(sensor)定位夾在病人手指上後，儀器上的螢幕約 5 秒鐘內開始顯示血氧飽和度(SpO2)和脈搏(Pulse)數值及圖形信號。 3.在連續測量下，應每 2-3 小時檢查病人手指上的 SpO2 感應器(sensor)位置。 4.如果病人手指表面長時間暴露於 SpO2 感應器(sensor)內，應將 SpO2 感應器(sensor)變換連接其他手指。												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Display</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Fully Charged</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Remaining 90-50%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Remaining 50-10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Remaining Under 10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Charging (AC Power Connecting)</td> </tr> </tbody> </table>	Display	Status		Fully Charged		Remaining 90-50%		Remaining 50-10%		Remaining Under 10%		Charging (AC Power Connecting)	電池充電顯示 1.若電池處於低電量或沒電時，請先接上電源進行充電後再使用。 2.在電量低於10%時，請將電源線接上充電，否則機器將在10分鐘內自動關機。
Display	Status												
	Fully Charged												
	Remaining 90-50%												
	Remaining 50-10%												
	Remaining Under 10%												
	Charging (AC Power Connecting)												
	1.SpO2 警報上/下限值：顯示目前設定之 SpO2 警報上下限值。 2.訊息：顯示警報、系統訊息。 3.波形：顯示體積描計圖形。 4.病人模式：顯示目前選擇之病人模式。 5.電量狀態：顯示剩餘電池。 6.時間：顯示目前時間設定。												

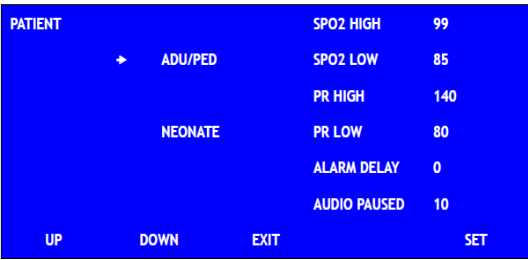
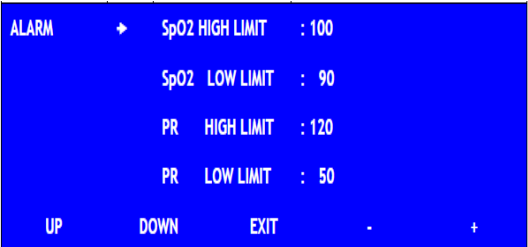
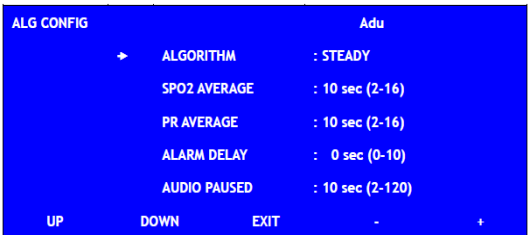
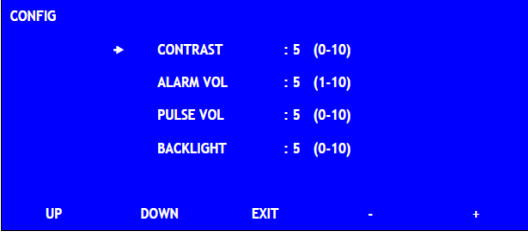
主題名稱	血氧濃度感測儀(Schiller Argus OXM Plus)操作標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q17-W-B37	版本	第 1.0 版
		頁碼/總頁數	3/8

	7.脈搏警報上/下限值：顯示目前設定之脈搏警報上下限值。 8.選單欄：快速鍵（警報音量、脈搏音量、對比、背光）以及其他設定參數。 9. 顯示警報音量設定；顯示靜音；顯示脈搏體積設定；顯示 LCD 對比度及背光設定。
--	--

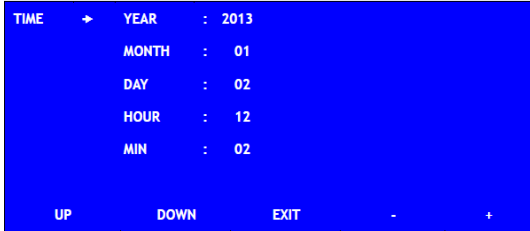
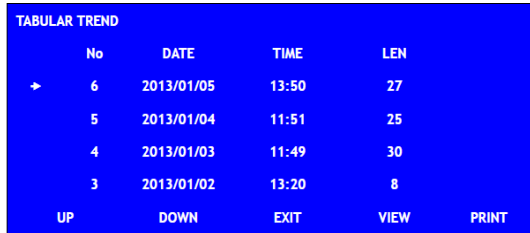
（三）儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 電源開/關鍵  ：按壓約2秒鐘以上即可開/關機。	按此鍵可以開啟/關閉電源。
2. 將SpO2感應器(sensor)定位夾在病人手指上後，即可測量。	
3. 進入系統設定，設定如下： (1)系統模式與設定變更：在基礎測量模式畫面按下選單欄(MENU)按鍵就會進入設定模式畫面。 (2)藉由UP和DOWN按鍵來移動箭頭，以選定需調整的項目，再按ENTER按鍵進入需調整項目的設置畫面。 (3)完成設定後按一下EXIT按鍵，就可退回原測量畫面。 (4)設定後的數值將會自動儲存，就算是設定後關機或重新開機也都會自動呈現上次調整後的數值。 (5)選單欄(Menu)項說明如下： a.病人模式(Patient)：設定病人模式。 b.警報設定(Alarm)：設定警報上下限值。 c.系統監測設定(Alg config)設定系統監測相關設定。 d.相關配置(Config)：調整相關設定。 e.時間設定(Time)：設定時間。 f.趨勢(Trend)：瀏覽趨勢資料。 g.工廠設定(Factory)：專業維修工程師操作。	

主題名稱	血氧濃度感測儀(Schiller Argus OXM Plus)操作標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q17-W-B37	版本	第 1.0 版
		頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
4. 進行病人模式(Patient)設定：成人、兒童、新生兒。 (1)在原測量畫面按下Menu按鍵。 (2)藉由UP和DOWN按鍵來移動箭頭至病人模式(Patient)。 (3)按下ENTER按鍵，利用(▲/▼)鍵選擇需要的病人類型：成人、兒童、新生兒。 (4)選擇結束後，按EXIT按鍵退回到選單欄(MENU)畫面。	
5. 進行警報設定(Alarm)設定：設定警報上下限值。 (1)在原測量畫面按下Menu按鍵。 (2)藉由UP和DOWN按鍵來移動箭頭至警報設定(Alarm)。 (3)按下ENTER按鍵，利用(▲/▼)鍵選擇欲更改的參數。 (4)利用(◀/▶)增加或降低預設值。 (5)選擇結束後，按EXIT按鍵退回到選單欄(MENU)畫面。	
6. 進行系統監測設定(Alg config)：設定系統監測相關設定。 (1)在原測量畫面按下Menu按鍵。 (2)藉由UP和DOWN按鍵來移動箭頭至系統監測設定(Alg config)。 (3)按下ENTER按鍵，利用(▲/▼)鍵選擇欲更改的參數（測量模式、SpO2平均測量秒數、PR平均測量秒數、警報延遲時間、警報暫停時間）。 (4)利用(◀/▶)增加或降低預設值。 (5)選擇結束後，按EXIT按鍵退回到選單欄(MENU)畫面。	
7. 進行相關配置(Config)：調整相關設定。 (1)在原測量畫面按下Menu按鍵。 (2)藉由UP和DOWN按鍵來移動箭頭至相關配置(Config)。 (3)按下ENTER按鍵，利用(▲/▼)鍵選擇欲更改的參數（對比、警報音量、脈搏監測音量、	

主題名稱	血氧濃度感測儀(Schiller Argus OXM Plus)操作標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q17-W-B37	版本	第 1.0 版
		頁碼/總頁數	5/8

步驟	說明
背光亮度)。 (4)利用(◀/▶)增加或降低預設值。 (5)選擇結束後，按EXIT按鍵退回到選單欄(MENU)畫面。	
8. 進行時間設定(Time)：設定時間。 (1)在原測量畫面按下Menu按鍵。 (2)藉由UP和DOWN按鍵來移動箭頭至時間設定(Time)。 (3)按下ENTER按鍵，利用(▲/▼)鍵選擇欲更改的時間（年、月、日、時、分）。 (4)利用(◀/▶)增加或降低預設值。 (5)選擇結束後，按EXIT按鍵退回到選單欄(MENU)畫面。	
9. 進行趨勢(Trend)：瀏覽趨勢資料。 (1)在原測量畫面按下Menu按鍵。 (2)藉由UP和DOWN按鍵來移動箭頭至趨勢(Trend)。 (3)按下ENTER按鍵，利用(▲/▼)鍵選擇欲瀏覽的資料夾。 (4)按下(▶)鍵進入欲瀏覽的資料夾。 (5)選擇結束後，按EXIT按鍵退回到選單欄(MENU)畫面。	

(四) 異常簡易故障排除方法

項目	故障問題	處理方法
1	電池電量	1. 若電池處於低電量或沒電時，請先接上電源進行充電後再使用。 2. 在電量低於 10%時，請將電源線接上充電，否則機器將在 10 分鐘內自動關機。
2	若按壓電源鈕仍無法開機	1. 可能是因為保險絲故障所造成，請聯繫醫工組會協助請廠商處理。 2. 若是內電池故障所造成的問題，請聯繫醫工組會協助請廠商更換新的內電池。
3	若連接外接電源時，機器仍顯示使用內建電池	1. 請確認外接電源線正確連接。 2. 請確認外接電源無故障情形，正常狀況當連接外接電源時，機器將會切換至外接電源模式。 3. 若仍有問題，請聯繫醫工組會協助請廠商處理。

主題名稱	血氧濃度感測儀(Schiller Argus OXM Plus)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B37	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/8

4	螢幕凍結或按鍵無法正常運作	請強制關閉電源（長按電源鍵 10 秒鐘），重新開機後若仍無法正常運作，請聯繫醫工組會協助請廠商處理。
5	螢幕訊息欄顯示 Error Code	1. 若顯示 System Error 1 或 System Error 2：請聯繫醫工組會協助請廠商處理。 2. 若顯示 System Error 3，請輕按各按鈕各一次，若狀況仍無改善，請聯繫醫工組會協助請廠商處理。

（五）異常訊息時，顯示病人狀況描述

Message 訊息	Description 描述
SENSOR OFF	病人端血氧濃度感應線脫落
NO SENSOR	機器端未接血氧濃度感應線
SpO2 HIGH LIMIT	當血氧濃度數值高過警報上限
SpO2 LOW LIMIT	當血氧濃度數值低於警報上限
PR HIGH LIMIT	脈搏數值高過警報上限
PR LOW LIMIT	脈搏數值低於警報上限
SIGNAL WEAK	當病人生理訊號微弱或消失
SIGNAL NOT DETECT	感應不到或感應微弱

（六）清潔保養注意事項

- 1.以非腐蝕性的清潔劑或酒精，輕輕擦拭儀器的表面。
- 2.勿將液體噴濺、傾倒到儀器及配件上。
- 3.感應器可使用清水沾濕抹布輕輕擦拭。

（七）其他注意事項

參數範圍，參考如下：

參數	範圍
%SpO2 警報上限	最高值區間 86~100%
%SpO2 警報下限	最低值區間 85~99%
脈搏頻率警報上限	最高值區間 250 次/分
脈搏頻率警報下限	最低值區間 26 次/分
警報靜音期	10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 秒
警報音量	1~10
脈搏蜂鳴音量	0~10

主題名稱	血氧濃度感測儀(Schiller Argus OXM Plus)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B37	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	7/8

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 血氧濃度感測儀使用說明評核表 Schiller Argus OXM Plus (編號：A31000-Q18-F-B37)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	血氧濃度感測儀(Schiller Argus OXM Plus)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B37	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	8/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
110.07.06	1.0	新制定。	110 年 05 月 12 日 護理長會議通過； 110 年 07 月 06 日 督導會議通過公布。
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.04.06	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	