

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	微量空針注射幫浦 Agilia SP MC Z018694 操作標準 Syring Pump Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B38	制定者	R11 吳淑鈞	公布日期	110 年 09 月 07 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	110 年 09 月 07 日
版本/總頁數	第 1.0 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解微量空針注射幫浦之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

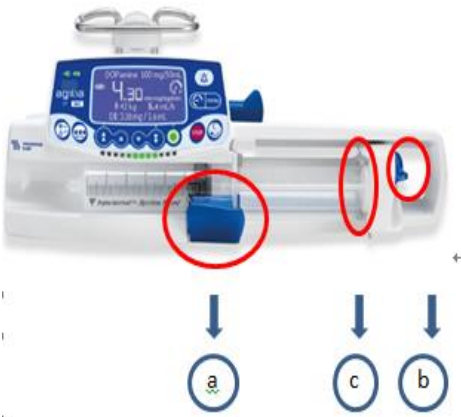
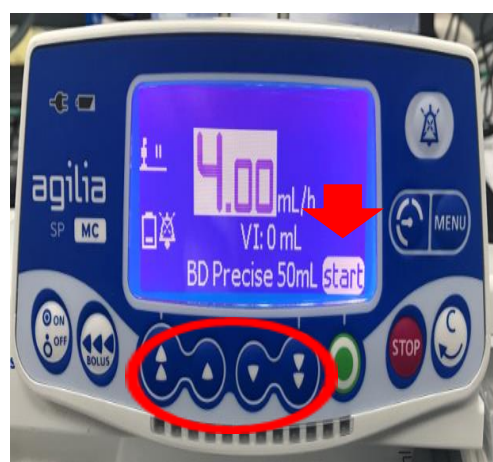
三、說明

(一) 廠牌規格：Agilia SP MC Z018694。

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 打開面板上左邊之電源開關。 	 ON/OFF 電源開關。
2. 安裝空針注射筒。 	a. 先將藍色固定夾向下拉開，再將空針注射筒的筒翼放入溝槽內，藍色固定夾向上向內推回固定。

主題名稱	微量空針注射幫浦 Agilia SP MC Z018694 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B38	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明
	b. 離合桿後方的藍色按鈕，向下按壓來控制左右方向移動離合桿。 
	c. 離合桿後方的藍色按鈕，向下按壓來控制內側的灰色兩個夾子，讓上下灰色夾子輕輕的夾住注射筒的內筒筒翼並固定住。 
3. 確認空針尺寸與品牌。 	a. 按 OK 確認螢幕顯示的針筒，或按 C 作更改，已預設於 Injectomat Spr.（空針廠牌）。  b. 5、10、20、30、50、60cc 空針皆可以設定。
4. 設定流速後按綠色確認鍵。 	a. 按箭頭鍵可對流速進行編程。 b. 檢查輸送路徑的完整性（注射器和 IV 接入裝置）。 c. 檢查注射器或延伸裝置中是否有空氣。 d. 確認注射器已正確安裝在幫浦中。 e. 將注射器的延伸裝置連接到病人的 IV 接入裝置。 f. 按 start 鍵開始輸液。

主題名稱	微量空針注射幫浦 Agilia SP MC Z018694 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B38	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
5. 大量注射 BOLUS。 	a. 先按快推  後，按綠色按鈕確認 bolus。 b. 再長按  開始輸注；放開即停止並回到原本設定流速。
6. 靜音鍵。 	a. 按<SLIENCE ALARM (靜音警報)>鍵  ，使聲音訊號不發出聲音。 b. 預防性靜音步驟:更換空針時不發出任何聲音訊號，先按<STOP (停止)>鍵停止輸注，然後按<SLIENCE ALARM (靜音警報)>鍵，再更換空針。

(三) 異常簡易故障排除方法

1. 警報注意事項：

警報原因（於面板螢幕會顯示）									
安裝空針	SYRINGE INSTALLATION （空針安裝）	輸注量/ 時間	END OF VOL/TIME PREALARM （輸注量/時間結束預警）						
輸注	END OF INFUSION PRE-ALARM（輸注結束預警）		END OF VOL/TIME ALARM （輸注量/時間結束警報）						
	END OF INFUSIONALARM （輸注結束警報）	壓力	OCCLUSION PRE ALARM （阻塞預警）						
輸注量 範圍	END OF LIMIT VOLUME PRE ALARM（輸注量範圍結束預警）		OCCLUSION ALARM （阻塞警報）						
	END OF LIMIT VOLUME ALARM（輸注量範圍結束警報）		PRESSURE DROP （壓力降低）						
				PRESSURE INCREASE （壓力增加）					
		<table><tr><td>輸注進行中</td><td> 閃綠燈 </td></tr><tr><td>預警</td><td> 閃橘燈 </td></tr><tr><td>警報</td><td> 閃紅燈 </td></tr></table>		輸注進行中	閃綠燈	預警	閃橘燈	警報	閃紅燈
輸注進行中	閃綠燈								
預警	閃橘燈								
警報	閃紅燈								

主題名稱	微量空針注射幫浦 Agilia SP MC Z018694 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B38	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/6

2. 簡易故障排除方法：

異常狀況	發生原因	處理方法
機器發出警示聲響。	查看面板警示資訊。 1. 空針安裝。 2. 輸注。 3. 輸注量範圍。 4. 輸注量/時間。 5. 壓力。 6. 如出現錯誤息，Er01,Er02……等。	按壓靜音鍵，依面板警示資訊排除障礙。 1. 正確安裝空針。 2. 若需繼續輸液更換注射筒輸液。 3. 若需繼續輸液調整輸注量範圍。 4. 若需繼續輸液調整輸注量時間。 5. 排除壓力、阻塞，重新運作。 6. 按下<OFF>鍵（需要 10 至 15 秒鐘）停止裝置運作。若再度開啟裝置警示仍在，勿對病人繼續使用，請更換機器，聯絡醫工室檢查。

（四）清潔保養注意事項

- 1.儀器平時要蓄電，避免轉送病人途中機器沒電。
- 2.清潔前請先拔除電源。
- 3.清潔需用乾淨的抹布，擰乾水後擦拭，若藥物滴到機器須立即擦拭乾淨。
- 4.若幫浦遭到血液或體液汙染，以 75%酒精噴在濕布擦拭清潔消毒。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（一）微量空針注射幫浦Agilia SPMC Z018694使用說明評核表（編號：A31000-Q18-F-B38）。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

主題名稱	微量空針注射幫浦 Agilia SP MC Z018694 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B38	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/6

七、附件

(略)

主題名稱	微量空針注射幫浦 Agilia SP MC Z018694 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B38	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
110.09.07	1.0	新制定。	110 年 08 月 11 日 護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.04.06	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	