

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 連續中央靜脈血氧飽和濃度監視器 PULSION CeVOX 操作標準<br>Central Venous Oxygen Saturation (ScvO2) Operating Standards |     |        |      |                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q17-W-C03                                                                                   | 制定者 | MI 賴美玉 | 公布日期 | 101 年 08 月 01 日 |
| 制定單位   | 護理部                                                                                                | 核准者 | 吳姿蓉    | 修正日期 | 108 年 06 月 18 日 |
| 版本/總頁數 | 第 2.3 版/6 頁                                                                                        | 審查者 | 劉俞均    | 檢閱日期 | 114 年 06 月 05 日 |

## 一、目的

讓護理人員能了解 ScVO2 機器之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

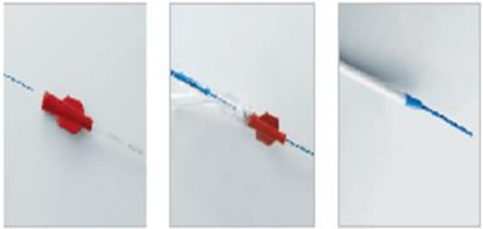
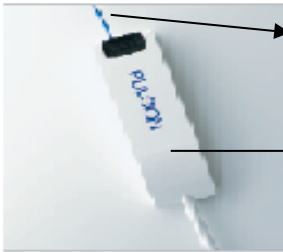
## 二、範圍

護理部各單位。

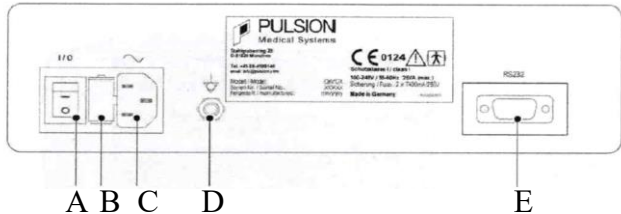
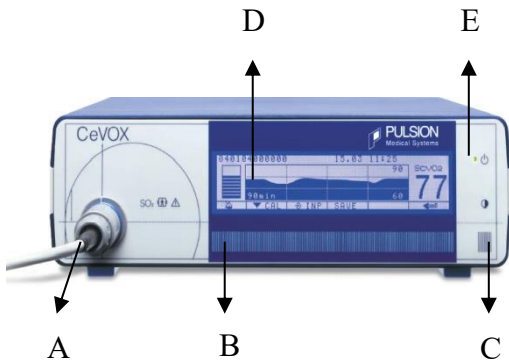
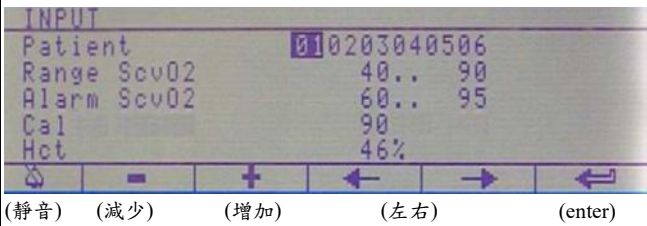
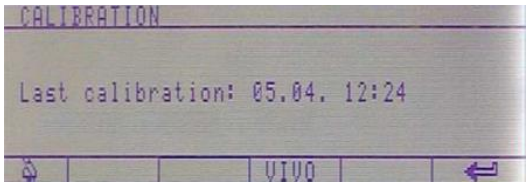
## 三、說明

(一) 廠牌規格：PULSION CeVOX

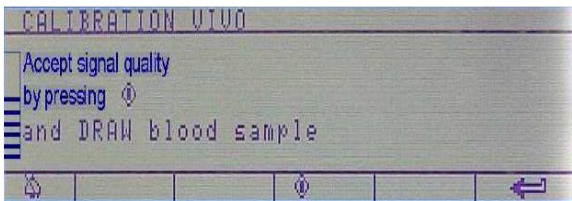
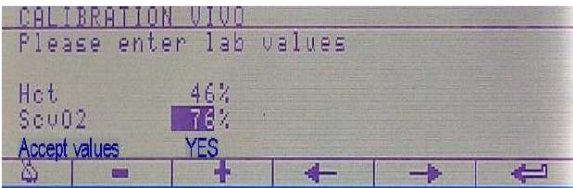
(二) 儀器操作步驟及要點說明

| 步驟                                                                                 | 說明                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 協助醫師將 2Fr 光纖探針於既有之中央靜脈導管遠端腔置入，探針頂端約位於上腔靜脈處（進入右心房前），利用不同波長之光源與紅血球作用計算中央靜脈氧氣飽和濃度。 | CeVOX 光纖探針放置方法<br> |
| 2. 將光纖探針與中心靜脈導管固定後，接上 CeVOX 光學感應線即可進行。                                             | <br>光纖探針<br>光纖卡夾   |

|      |                                    |        |         |
|------|------------------------------------|--------|---------|
| 主題名稱 | 連續中央靜脈血氧飽和濃度監視器 PULSION CeVOX 操作標準 | 制定單位   | 護理部     |
| 編號   | A31000-Q17-W-C03                   | 版本     | 第 2.3 版 |
|      |                                    | 頁碼/總頁數 | 2/6     |

| 步驟                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. 打開電源，機器自動做系統測試。</p>  <p>A. 電源開關                      B. 保險絲座<br/>C. 電源線插座                D. 接地線連接埠<br/>E. RS-232 傳輸連接埠</p>                                                                                  | <p>面板功能介紹</p>  <p>A. 光纖模組連接埠<br/>B. 功能按鍵<br/>C. 螢幕亮度調整鍵<br/>D. 監測參數顯示畫面<br/>E. 交流電源指示燈</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>4. 輸入病人資料及設定參數</p>  <p>(靜音) (減少) (增加) (左右) (enter)</p> <p>Patient：病歷號碼<br/>Rnge ScvO2：中央靜脈血氧飽和顯示範圍設定<br/>Alarm ScvO2：中央靜脈血氧飽和警報範圍設定<br/>Cal：CeVOX 光纖探針校正係數 (ex:cal 98 即輸入 98)<br/>Hct/Hb：以血球容積比或血紅素設定基準值</p> | <p>設定時以  與  鍵選擇欲設定之項目，以  與  鍵設定數值之調整，更改完畢按  鍵即可完成此畫面設定。</p> <p>➤ 若修改病歷號碼，機器自動將過去之監測數值刪除。</p> |
| <p>5. 參數校正設定</p> <p>每 8 小時（每班一次）抽中央靜脈血液驗 vein gas，再依以下順序輸入</p> <p>(1) 顯示上次最後校正日期與時間，按  進入參數校正畫面</p>                          | <p>設定時以  與  鍵選擇欲設定之項目，以  與  鍵設定數值之調整，更改完畢按  鍵即可完成此畫面設定。</p> <p>➤ ScvO2 正常值為大於 70%。</p>       |

|      |                                    |        |         |
|------|------------------------------------|--------|---------|
| 主題名稱 | 連續中央靜脈血氧飽和濃度監視器 PULSION CeVOX 操作標準 | 制定單位   | 護理部     |
| 編號   | A31000-Q17-W-C03                   | 版本     | 第 2.3 版 |
|      |                                    | 頁碼/總頁數 | 3/6     |

| 步驟                                                                                                                                                                                                                                   | 說明                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(2)參數校正畫面</p>  <p>(3) 輸入測量完成的 Hct/Hb 及 ScvO2 值，確認無誤後選擇 YES</p>  | <p>觀察螢幕左側訊號品質 BAR，若確認無誤後按  開始進行參數校正</p> |
| <p>6. 連續監測畫面說明</p> <p>訊號品質 BAR      連續監測參數數值</p>  <p>連續監測趨勢曲線</p>                                                                                  |                                                                                                                            |
| <p>7. 結束後清潔建議：</p> <p>噴灑 75%酒精消毒或 1：1000 漂白水擦拭</p>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |

### (三) 異常簡易故障排除方法

| 異常狀況                 | 發生原因                                           | 處理方法                 |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 1. OM Disconnected   | 光學模組連接未妥                                       | 檢查光學模組或光纖探針是否連接正確。   |
| 2. Unstable Baseline | ScvO2 和 Hct/Hb 參數異常變動                          | 重新進行校正動作。            |
| 3. Wall Artifact     | 1.光纖探針頂端偵測血流不穩定<br>2.光纖探針頂端堵塞<br>3.光纖探針頂端卡在血管壁 | 重新確認光纖探針位置並重新進行校正動作。 |

|             |                                    |             |         |               |     |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------|---------------|-----|
| <b>主題名稱</b> | 連續中央靜脈血氧飽和濃度監視器 PULSION CeVOX 操作標準 | <b>制定單位</b> |         | 護理部           |     |
| <b>編號</b>   | A31000-Q17-W-C03                   | <b>版本</b>   | 第 2.3 版 | <b>頁碼/總頁數</b> | 4/6 |

#### (四) 清潔保養注意事項

##### 1. 機器外觀清潔保養

(1) 先將機器外觀髒污擦拭乾淨。

(2) 再噴灑 75%酒精消毒或 1：1000 漂白水擦拭。(避開光纖模組連接埠)

##### 2. 光學感應 CABLE 線

(1) 清潔步驟同上。

#### (五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

### 四、使用表單

(一) 連續中央靜脈血氧飽和濃度監視器使用說明評核表 PULSION CeVOX (編號：A31000-Q18-F-C03)。

### 五、流程圖

(略)

### 六、參考資料

(略)

### 七、附件

(略)

|      |                                    |      |                    |
|------|------------------------------------|------|--------------------|
| 主題名稱 | 連續中央靜脈血氧飽和濃度監視器 PULSION CeVOX 操作標準 | 制定單位 | 護理部                |
| 編號   | A31000-Q17-W-C03                   | 版本   | 第 2.3 版 頁碼/總頁數 5/6 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                              | 備註                                                                                             |
|-----------|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101.08.01 | 1.0 | 新制定。                                              | 101 年 08 月 01 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過                                                            |
| 102.02.19 | 2.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度<br>臨時檢閱。                   |                                                                                                |
| 102.05.31 | 2.1 | 修改三、說明：儀器操作步驟及要點說明的第 5 項，<br>ScvO2 正常值為大於 70%。    | 102 年 05 月 31 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過                                                            |
| 103.06.30 | 2.1 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                   |                                                                                                |
| 104.05.31 | 2.1 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                   |                                                                                                |
| 105.05.31 | 2.1 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                   |                                                                                                |
| 106.05.31 | 2.1 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                   |                                                                                                |
| 107.06.13 | 2.2 | 主題名稱新增「操作標準 operating standards」。                 | 107 年 06 月 13 日<br>護理長會議通過                                                                     |
| 108.06.06 | 2.3 | 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改<br>為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 | 108 年 06 月 06 日<br>照護標準組會議<br>通過；108 年 06<br>月 12 日護理長會<br>議通過；108 年 06<br>月 18 日督導會議<br>通過公布。 |
| 109.02.06 | 2.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                   |                                                                                                |
| 110.07.08 | 2.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                   |                                                                                                |
| 111.06.02 | 2.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                   |                                                                                                |
| 112.06.08 | 2.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                   |                                                                                                |

|             |                                    |             |         |               |     |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------|---------------|-----|
| <b>主題名稱</b> | 連續中央靜脈血氧飽和濃度監視器 PULSION CeVOX 操作標準 | <b>制定單位</b> |         | 護理部           |     |
| <b>編號</b>   | A31000-Q17-W-C03                   | <b>版本</b>   | 第 2.3 版 | <b>頁碼/總頁數</b> | 6/6 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明            | 備註 |
|-----------|-----|-----------------|----|
| 113.02.01 | 2.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |    |
| 114.06.05 | 2.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |    |
|           |     |                 |    |