

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	顱內壓監視器_美麗康操作標準 Intracranial Pressure Monitor Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C05	制定者	SI 朱卉愉	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 2.2 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解顱內壓監視器之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：美麗康

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 病人端與儀器端連接。	
2. 按下開關鍵。	
3. 呈現 ICP 波形。	 ICP 值呈現波形 按「SCALE」調整適當波形顯示。
4. 顯示 ICP 之收縮壓及舒張壓。	 顯示 ICP 之收縮壓及舒張壓 按 SYS/DIA 以顯示收縮/舒張壓。

主題名稱	顱內壓監視器_美麗康操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C05	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
5. HIGH ICP 警告值設定。	 調整警告值升降 按 UP 鍵兩次後以 UP 或 DOWN 鍵選定 HIGH ICP 警告設定值。 ※如顯示 OFF，則是取消 ICP 警告設定功能。 ※設定後，稍候 5 秒，即恢復 ICP 顯示畫面。
6. 警告復原。	 按 SILENCE ALARM 將使警告靜音 3 分鐘，以提供適當處置時間。
7. ICP 追蹤記錄。	 按 TREND 乙次以顯示過去 12 小時 ICP 記錄。 按 TREND 兩次以顯示過去 24 小時 ICP 記錄。

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. ICP 值呈現負值	ICP catheter 植入初期，因 mass lesion 被移除故 ICP 呈現負值。	12-24 小時內將恢復實際 ICP 值。

(四) 清潔保養注意事項

1. 電源供應

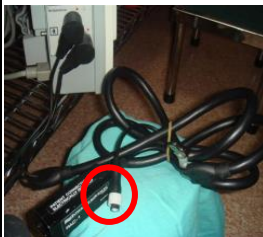
(1) 電源接上時，電池自動進入充電狀態。

(2) 如 Low Batt Indicator 亮時，電池電力僅能供應 2 小時。

(五) 注意事項

步驟	說明
1. CT follow。	將 connector 拔除，CT follow 後，直接接上，無須歸零。
2. 避免拉扯、彎折 catheter。	易導致損壞。

主題名稱	顱內壓監視器_美麗康操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C05	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	3/5

3. 白色頭測量為顱內溫度切勿扭轉。	
--------------------	--

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 顱內壓監視器_美麗康使用說明評核表(編號：A31000-Q18-F-C05)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	顱內壓監視器_美麗康操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C05	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.2	第三項第六日本辦法經委員會通過後公布實施，改 為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會 議通過公布。
109.04.09	2.2	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
110.07.08	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.11	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	顱內壓監視器_美麗康操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C05	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
114.06.05	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	