

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	復甦球操作標準 Bag Valve Mask (BVM) Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C15	制定者	SI 朱卉愉	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 2.5 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 04 月 10 日

一、目的

讓護理人員了解復甦球之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

裝備：

復甦球基本組成：病人端（含進氣及吐氣的單向閥）、甦醒球體、甦醒球的進儲氣閥組、儲氣袋。

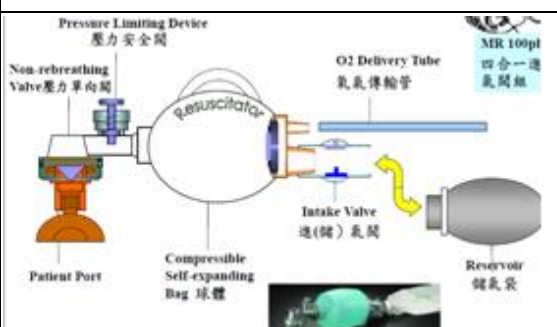
氧氣管(one way)。

甦醒球用面罩。

氧氣流量表。

※注意事項：具傳染性病人應選擇可拋棄式單一使用之甦醒球。

（一）儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 將單向閥、甦醒球體、儲氣閥及儲氣袋組裝畢。	

主題名稱	復甦球 Bag Valve Mask (BVM)操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C15	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
2. 病人確認壓力安全閥，成人—60cmH ₂ O，小孩/嬰兒—45cmH ₂ O。	作用：防止壓力過大，肺泡破裂。
3. 使用前測試復甦球是否漏氣。	用手掌堵住開口處，另外一隻手按壓球體，無氣體漏出球體飽滿則復甦球功能正常，反之則異常，檢查瓣膜或接頭處有無損壞。
4. 復甦球接氧氣管，氧氣流量開到 15L 以上（大人&小孩）或 10L（嬰兒）。	氧氣儲氣袋每次擠壓中間讓其有時間充滿，可提供 100% 氧氣。
5. 站在病人頭部後側，將頭部向後仰，並拖住下顎使其朝上，面罩蓋住病人嘴巴與鼻子，並用拇指和食指緊握住以保持面罩與臉部密合，其他的手指握住下顎，復甦球按壓時手勢必須將上顎上提。	
6. 另外一隻手按壓復甦球，作規律性的壓縮，提供足夠的空氣且應配合病人之呼吸於吸氣時壓氣給病人。	成人：12-15 次、小孩：14-20 次、嬰兒：35-40 次。
7. 插管後復甦球的按壓。	成人、小孩、嬰兒：6-8 次。
8. 使用完畢，Ambu 頭拆開泡醫用酵素清潔劑（15~45 分鐘），將痰塊去除後晾乾，組裝完整後，填寫高壓代消單送供應室滅菌。病人出院時應進行終期消毒，使用中若有污染應予以更換。	酵素清潔劑稀釋比例： 酵素清潔劑 3ml 加入 500ml 清水中稀釋

（二）異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 復甦球漏氣	1. 接頭處鬆脫 2. 接頭處破裂 3. 瓣膜破損	1. 檢查接頭處有無鬆脫 2. 更換破損接頭處 3. 更換破損瓣膜
2. 氧氣儲氣袋無充飽	1. 氧氣流量不足 2. 氧氣儲氣袋破裂 3. 氧氣管鬆脫	1. 氧氣流量應開到 15L 以上（大人&小孩）或 10L（嬰兒） 2. 更換氧氣儲氣袋 3. 檢查氧氣管連接處

（三）清潔保養注意事項

1. 使用完畢，Ambu 頭需拆開泡醫用酵素清潔劑（15~45 分鐘），將痰塊去除後

主題名稱	復甦球 Bag Valve Mask (BVM)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C15	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	3/5

晾乾，組裝完整後，填寫高壓代消單送供應室滅菌。

2. 使用中有汙染應予以更換。

3. 病人出院時應進行終期消毒。

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 復甦球操作使用說明評核表 Bag Valve Mask (BVM)(編號：A31000-Q18-F-C15)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	復甦球 Bag Valve Mask (BVM)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C15	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
102.05.31	2.1	儀器操作步驟及要點說明內圖更換清楚照片。	102 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
103.05.31	2.2	復甦球當使用中若有汙染時就應立即予以更換，無需每 七日定期更換。	103 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
104.05.31	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.3	第三項第（一）目之8修改原使用完畢，Ambu頭需拆 開泡H2O2 15分鐘，改醫用酵素清潔劑（15-45分鐘）。	105 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
106.05.31	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.4	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.5	1. 第三項第一目之 8 甦醒球已全院更換為高壓消毒 的甦醒球，使用後清潔保養方式改為填寫高壓代 消單送供應室滅菌；新增酵素清潔劑稀釋比例 2. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施， 改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布 實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會議 通過公布。
109.06.04	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.02.10	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

