

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	遠紅外線治療儀 TY-601 操作標準 Far Infrared Therapy Unit Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C19	制定者	RCC 譚靖馨	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	109 年 06 月 16 日
版本/總頁數	第 2.3 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解遠紅外線治療儀之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

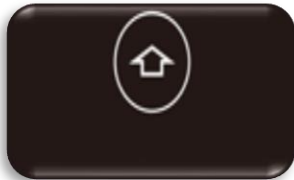
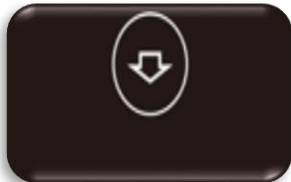
三、說明

（一）廠牌規格：遠紅外線治療儀 TY-601

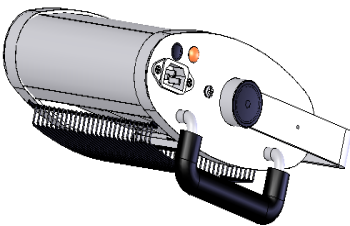
（二）儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 使用前，請先檢查主機電源線是否插上插頭。 2. 將位於控制箱背面的電源開關打開，約 5 秒即可聽到嗶、嗶、嗶聲響，此即代表電腦已處於待機狀態。	
3. 高低升降裝置調整： 本儀器標準照射距離為 30 公分（請勿近於 20 公分，避免高溫造成皮膚過熱）。	 ◇ 注意： 1. 調升治療儀高度時：將調整桿向上扳（調整桿將氣壓棒頂端之開關打開）並暫不放手，此時機器會慢慢上升，到達所需高度時將調整桿放掉。 2. 調降治療儀高度時：將調整桿向上扳並暫不放

主題名稱	遠紅外線治療儀 TY-601 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C19	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明
	手，以手臂和身體的力量施力於控制箱，此時機器會慢慢下降，到達所需高度時再將調整桿放掉。
4. 時間設定： 按“Timer（時間設定）”鍵  “ ”鍵， 字幕即以 10 進位遞增或 5 進位遞減。	◇ 按 Timer（時間設定）鍵： 即可進入時間設定狀態。 
5. 強度設定： 按“Set Power（功率設定）”鍵  “ ”鍵， 鍵強度燈會即以弱、中、強檔依次顯示。	◇ 按 Set Power（功率設定）鍵： 即可進入強度設定狀態。  ◇ 按鍵： 時間字幕將以每 10 分(10、20、30...) 遞增顯示，強度會以弱、中、強檔遞增。  ◇ 按鍵： 時間字幕將以每 5 分鐘增顯示，強度可依次遞減調整。 
6. 啟動使用： 以上使用條件設定好之後，請按“啟動 (Star)”鍵，左上的圓燈亮，表示該機組已經進入使用狀態，開始工作計時了。	◇ 所有設定完成後，需按啟動(Star)鍵，電腦方會輸出電源，選用的機組才開始工作。 ◇ 時間與強度檔需同時設定好，紅色圓燈才會亮，機組才會工作。

主題名稱	遠紅外線治療儀 TY-601 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C19	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
	✧ 若強度設定於非置強檔時，紅色圓燈會以閃爍的方式表現。 
7. 使用停止： 使用中，若欲停止使用或更改任何時間、強度設定，請按“停止(Stop)”鍵，再重新設定操作。	✧ 按停止(Stop)鍵：隨時中止電腦的設定及機組的工作。 
8. 按“全自動(Auto)”鍵，字幕即會自動顯示時間 40 分鐘、強度檔燈號顯示於強檔上，機組並以此設定條件開始工作。若欲終止自動設定的工作，請按“停止”鍵即可。	✧ 按全自動(Auto)鍵：電腦即自動設定時間為 40 分鐘，選擇強度後，選用的機組開始自動操作。 
9. 注意： (1) 臨床使用時須保持安全照射距離(照射源與皮膚表面保持 20~40 公分的距離)。 (2) 照射器表面高溫請勿用手碰觸。 (3) 使用時，嚴禁電源線纏繞機體，以免損壞接頭或電源線，造成危險。	

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1.照射器無溫度或溫度偏低(控制箱正常時)。	1.指示燈不亮。	查看電源。
	2.手臂電線上下接頭未插緊。	將上下接頭插緊。
	3.手臂電線未導通。	手臂送修。
	4.FUSE3 異常。	更換 FUSE3。
	5.照射器電流異常。 (1) 68A 以下需回廠檢修。	照射器送修。

主題名稱	遠紅外線治療儀 TY-601 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C19	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	4/6

異常狀況	發生原因	處理方法
2.無輸入電源（控制箱無顯示）。	1.電線兩端插頭未插緊	將兩端插頭插緊。
	2.電線導通異常。	更換控制箱電線。
	3.FUSE1, FUSE2 發生異常。	更換 FUSE。
	4.控制箱故障。	控制箱送修。

（四）清潔保養注意事項

1. 禁止使用插頭轉接頭及非院方供應的延長線。
2. 避免使用故障之儀器及有破損之插頭與插座，以防觸電受傷。
3. 禁止在醫療儀器上面放置裝有液體之容器，避免液體倒入或濺入儀器內部以致故障或引起火花。
4. 清潔保養治療儀器時，建議採用 75%的酒精(ethyl alcohol)均勻噴灑於紗布後，再進行擦拭。
5. 遠紅外治療儀器附近禁止堆放任何物品，以免妨礙儀器的散熱效果。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- （一）遠紅外線治療儀使用說明評核表 TY-601（編號：A31000-Q18-F-C19）。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	遠紅外線治療儀 TY-601 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C19	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.2	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施， 改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布 實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會 議通過公布。
109.06.16	2.3	第三項第二目之 3 儀器操作步驟及要點說明新增避 免高溫造成皮膚過熱。	109 年 06 月 04 日 照護標準組會議 通過；109 年 06 月 10 日護理長會 議通過；109 年 06 月 16 日督導會 議通過公布。
110.07.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.04.07	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	遠紅外線治療儀 TY-601 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C19	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
113.04.30	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	