

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	電動床 Hill-Rom (MAN 333)操作標準 Versa Care Bed (MAN 333) Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C20	制定者	CCU 李涵蓁	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 2.3 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 02 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解電動床之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

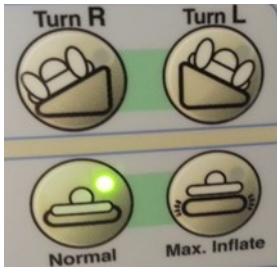
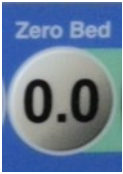
三、說明

（一）廠牌規格：Hill-Rom (MAN 333)。

（二）儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 確認病床已插上電源。	
2. 確認煞車已踩下。	當病床上有病人，未踩住煞車時，指示燈會閃爍並發出警報聲。 
3. 將床欄拉起，向內推進，直到卡進鎖定位置。	當床欄上拉至鎖定位置卡住時，會聽到”喀噠”一聲。
4. 將黑色面板往上拉，將可放下床欄。	
5. 開啟安全啟用。	啟動時安全啟用指示燈會亮 60 秒。 

主題名稱	電動床 Hill-Rom(MAN 333)操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C20	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明
6. 控制病床上升/下降。	
7. 控制頭部及膝部向上/向下。	床頭端床欄上有頭部角度指示器，會顯示抬高角度。 
8. 控制床頭仰臥式和頭高腳低式。	床尾端床欄上有垂頭仰臥式/頭高腳低式角度指示器。 
9. 控制腳部伸長/縮短控制鍵，直到所需位置。	
10. 床墊控制鍵（向左/向右翻身，最大充氣，正常）。	最大充氣模式啟，30 分鐘後沒有選擇其他模式，會自動啟動正常模式。 
11. 腳部控制鍵（病床上升/下降，頭部向上/向下）。	踩下一個踏板 1-3 秒後鬆開踏板，再踩下所需功能的踏板，直達到所需的位置。 
12. 重新歸零體重計：將床上的物品移除，按下安全啟用控制鍵，再按住歸零鍵直到出現 00.0（00.0 顯示後會顯示 HOLD）然後鬆開控制鍵。	鬆開歸零控制鍵後，體重計顯示器會顯示”CALC”，在顯示器停止閃爍”CALC”並顯示”0.0”之前，不要觸摸床病床。 
13. 量體重：病人靜止的躺在床墊中間，床欄拉起，身上管路、導線懸空，按下安全啟用控制鍵，再按體重控制鍵。	體重會以” 磅 ”為單位顯示 10 秒，接著以” 公斤 ”為單位顯示 5 秒。 

主題名稱	電動床 Hill-Rom(MAN 333)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C20	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
14. 病人離床警報系統（病人定位模式/離床模式/下床模式）：按下安全啟用控制鍵，再按下任一個離床警報系統模式控制鍵，直到指示燈關閉。	可按下音量控制鍵，直到音量設定旁的所需音量指示燈亮起後鬆開控制鍵。 
15. CPR 時，拉住紅色之 CPR 臥把，直到頭部和膝部達到水平位置且腳步停止上升。	緊急心肺復甦術時床墊自動充氣至最大充氣。 

（三）異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 病床控制鍵無法使用。	鎖控鈕指示燈亮著。	重新開啟電源，若仍無法開啟請廠商維修。
2. 病床無法降低。	病床下降控制鍵未被鎖住。	檢視床底的障礙物偵測感應器間有無物品。
3. 所有氣墊模式指示燈均在閃爍。	床墊處於無法操作的安全模式。	請確認床墊供氣管接頭已與床架完全連接。

（四）清潔保養注意事項

1. 電源連接於床頭藍色電動床專用插座。
2. 每月以清水擦拭乾淨。
3. 每月定期檢視電動床功能及床墊是否破損。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（一）電動床使用說明評核表 Hill-Rom（編號：A31000-Q18-F-C20）。

五、流程圖

（略）

主題名稱	電動床 Hill-Rom(MAN 333)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C20	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	4/6

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	電動床 Hill-Rom(MAN 333)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C20	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制訂。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
102.05.31	2.1	說明內容部份修辭。	102 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.2	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施， 改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布 實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會 議通過公布。
109.06.04	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.04.07	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	電動床 Hill-Rom(MAN 333)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C20	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
113.04.30	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.02.05	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	