

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	生理監視器 NIHON KOHDEN BSM-6701K 操作標準 NIHON KOHDEN Bedside Monitor Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C26	制定者	MI 賴美玉	公布日期	105 年 02 月 02 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 1.2 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解生理監視器之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍


護理部各單位。

三、說明


(一) 廠牌規格：NIHON KOHDEN BSM-6701K

(二) 儀器操作步驟及要點說明

面板說明：

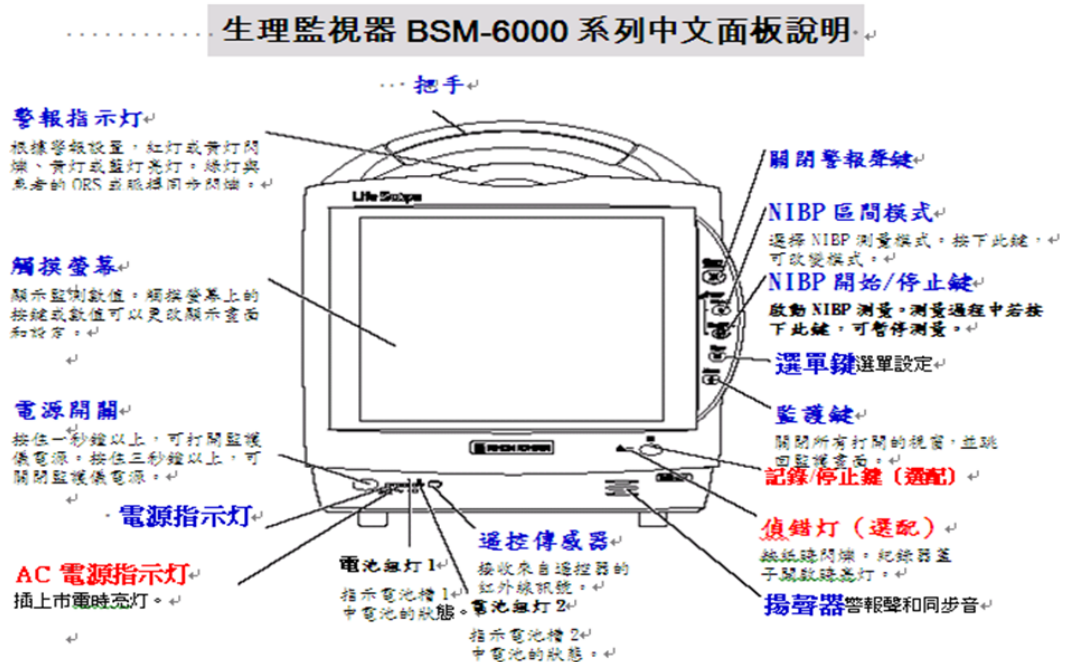

主題名稱	生理監視器 NIHON KOHDEN BSM-6701K 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C26	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	2/8

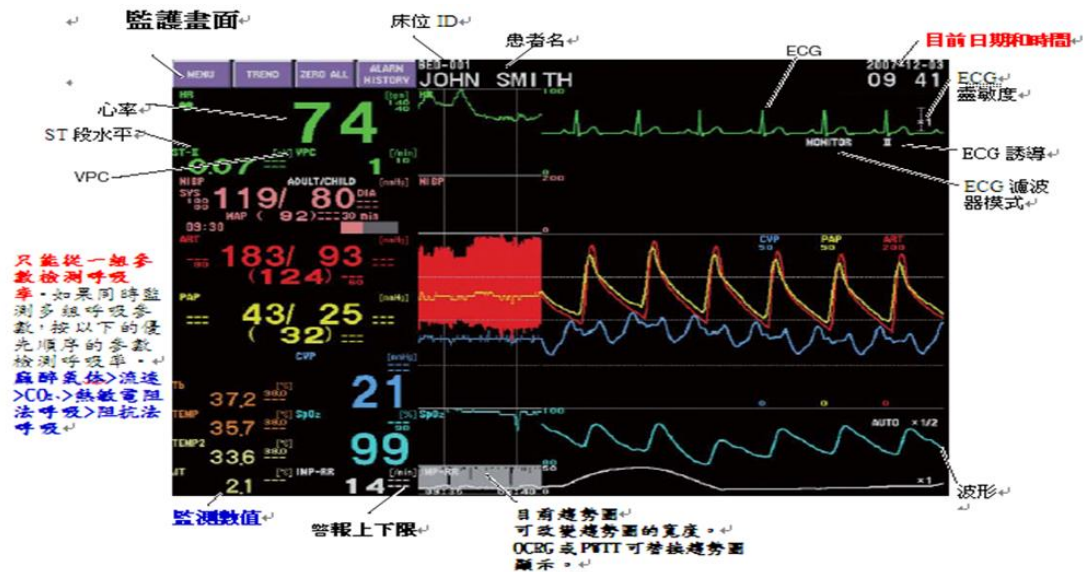

項目	步驟	說明
1	按下開關	按一下開機，長按 3 秒關機
2	螢幕顯示	依導線設定會顯示不同之參數畫面
3	連接導線	視需求連接相關參數導線至左側模組，導線正確接入時會聽到"卡"一聲

1. 控制面板各硬體鍵操作

項目	按鍵介紹	說明
1	警報靜音 (Silent Alarm)	當監視器產生警告，可消除警告聲三分鐘後自動恢復警告
2	NIBP 定時區間 (NIBP Interval)	根據所設定的重複時間自動測量血壓
3	NIBP Start/Stop	NIBP 自動/手動開始停止
4	選單 (Menu)	可設定生理參數及觀察波形、趨勢圖、警報紀錄
5	標準畫面 (Home)	按下此鍵即可回到標準畫面
6	記錄器 (內置列印)	可即時連續列印波形，直到按下停止紀錄鍵為止；延遲記錄長度為 10、20、30 秒，依裝機時之設定（預設為延遲）

2. 選單介紹

項目	名稱	說明
1	回放 (Review)	包含趨勢圖、不整脈回朔、警報歷史紀錄、全波形檢閱、ST Record、12 誘導、aEEG
2	患者管理	包含進/出病人監護、警報上下限設定、不整脈警報設定
3	操作設定	包含日期、音量、顯示、內置列印、系統設定

主題名稱	生理監視器 NIHON KOHDEN BSM-6701K 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C26	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	3/8

項目	名稱	說明
4	基本參數	包含 ECG、RESP/CO2、SPO2、NIBP、PRESS、TEMP、BIS、CO、麻醉氣體
5	其他參數	包含 O2、VENT（呼吸器）、TOF、CCO、FLOW/PAW、EEG、tcPO2/tcPCO2、類比電路（外部輸入訊號）、rSO2
6	其他功能	包含 12 誘導分析、藥物計算、肺功能、床際（別床訊號）、關閉觸控、數字放大、定時設定
7	警報	包含暫停監護、警報暫停

3. 心電圖設定

項目	步驟	說明
1	點選畫面 HR 數字處	
2	改變誘導	
3	調整大小（靈敏度）	預設為自動可依需求手動調整大小 1/4、1/2、1、2、4
4	波形干擾過濾選擇	其他設定>濾波器；指定相關過濾器（分為診斷、中、最上限）

主題名稱	生理監視器 NIHON KOHDEN BSM-6701K 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C26	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	4/8

項目	步驟	說明
		
5	調整警報上下限	

4. 呼吸設定

項目	步驟	說明
1	點選畫面 RR 數字處	
2	調整呼吸方式 R-L、R-F	依病人胸式或腹式呼吸調整

主題名稱	生理監視器 NIHON KOHDEN BSM-6701K 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C26	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	5/8

項目	步驟	說明
3	調整大小（靈敏度）	依需求手動調整大小 1/4、1/2、1、2、4
4	調整警報上下限	可設定 RR、APNEA、CO2 上下限

5. 非侵入式血壓設定

項目	步驟	說明
1	點選畫面 NIBP 數字處	
2	自動/手動測量切換	自動方式：根據所設定的重複時間自動測量血壓； 手動方式：按下模組面板之 Start 鍵即測量一次。
3	改變重複測量時間	改變每次測量時間，可設定在 1 分鐘至 8 小時之間
4	連續測量	可依設定在 5 或 10 分內重複測量血壓，預設為 5 分鐘

6. SPO2 設定

項目	步驟	說明
1	點選畫面 SPO2 數字處	
2	調整大小（靈敏度）	預設為自動可依需求手動調整大小 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8

主題名稱	生理監視器 NIHON KOHDEN BSM-6701K 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C26	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	6/8

3	調整警報上下限	如上限數值為 100 時請設定為 OFF
---	---------	----------------------

(三) 異常簡易故障排除

項目	異常狀況	發生原因	處理方法
1	按下開關後無法開啟	1.電源線未接上。 2.插座電壓不足。 3.電源連接電路板故障。	1.接上電源線，按下開關。 2.測量插座電壓(100-240±10%)。 3.電源燈未亮，更換電源連接電路板。
2	生理參數未出現	1.導線未接上。 2.導線故障。 3.模組無反應。 4.數字被關閉(ECG)。	1.檢查病人端是否接妥。 2.更換導線。 3.重新安裝模組 4.重新打開數字開關。
3	無畫面	1.顯示器故障。 2.主機電路板故障。	1.確認電源線是否接上 2.觀察 error code，並記錄下來。

(四) 清潔保養注意事項

項目	說明
1	使用完畢後，使用清水擦拭即可
2	平常使用需維護監視器清潔
3	儀器電線不可對折，以免毀損漏電

(五) 警告說明

警告顏色	警告聲	代表意義
紅色	連續急促聲<ding ding>	VT、VF、ASYSTOLE、EXT TACHY、EXT BRADY
黃色	連續音調<咚咚>	病患參數值超越設定範圍，如心跳超越上下限 開機預設 HR：50-120 次/分，SPO2：90-100%，Resp：8-20 次/分
藍色	單一音調<咚~>	導線脫落


(六) 蓄電說明

生理監視器型號	充電時間	蓄電時間
BSM-6701K	關機狀態 6HR，開機狀態 10HR	單一電池 30 分鐘，可配備兩顆電池
BSM-6301K	關機狀態 6HR，開機狀態 10HR	單一電池 45 分鐘，可配備兩顆電池

Battery operation

← Operating on battery

→ Battery is being charged

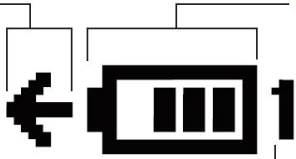

Battery slot No.

Remaining battery power

- more than 90%
- more than 60%
- more than 40%
- more than 25%
- less than 25%



主題名稱	生理監視器 NIHON KOHDEN BSM-6701K 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C26	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	7/8

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 生理監視器評核表 NIHON KOHDEN BSM-6701K (編號：A31000-Q18-F-C26)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	生理監視器 NIHON KOHDEN BSM-6701K 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C26	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	8/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
105.02.02	1.0	新制定。	105 年 02 月 02 日 護理部照護標準委員會通過；105 年 02 月 02 日公布
106.05.31	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	1.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	1.2	第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議通過；108 年 06 月 12 日護理長會議通過；108 年 06 月 18 日督導會議通過公布。
109.06.04	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.04.06	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	