

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	水療床操作標準 Carevo Shower Trolley Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C30	制定者	BC 李沁蓁	公布日期	109 年 06 月 16 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	109 年 06 月 16 日
版本/總頁數	第 1.0 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解水療床設備的操作步驟、要點說明及清潔保養注意事項。

二、範圍

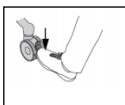
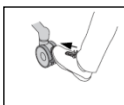
燒傷加護病房。

三、說明

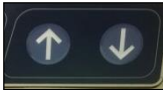
(一) 廠牌規格：ArjoHuntleigh



(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 確認煞車已採下	所有四個腳輪上均有腳輪煞車器。 啟用：按下腳輪煞車桿 釋放：輕輕抬起腳輪煞車桿   

主題名稱	水療床操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C30	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
2. 將側邊暗紅色手柄同時張開，將可放下床欄	
3. 控制面板：位於床的頭部、左側、右側	 可控制病床上升/下降  可調節背部支撐
4. 清洗蓮蓬頭出水調整	順時針打開 
5. 清洗蓮蓬頭/蓮蓬頭出水按鈕	按壓此按鈕可使蓮蓬頭出水 
6. 給水溫度調整	依病人感覺調整適當溫度，約 28-32 度 
7. 水溫計	
8. 蓮蓬頭手柄座	每個側面支撐上都配有蓮蓬頭手柄座

主題名稱	水療床操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C30	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/5

步驟	說明
	
9. 消毒清潔蓮蓬頭/消毒蓮蓬頭出水按鈕	結束水療後，使用消毒蓮蓬頭進行水療床消毒。 
10. 消毒清潔劑放置處	為原廠配置消毒清潔劑，量不夠時直接更換即可 
11. 消毒清潔劑流量表	可看出消毒清潔劑剩餘量 
12. 馬桶沖水閥	按此按鈕將皮屑沖掉 
13. 電池 位於頭部面板的下方，使用 NEA0100-083 電池	將電池插入到電池箱中，帶圓角的電池突出部分朝上，直接向外拉出即可取下電池 電池電量不足時會發出嗡嗡聲，應儘快充電  

主題名稱	水療床操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C30	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/5

步驟	說明
14. 緊急停止符號 位於頭部面板的下方	若因其他原因控制面板不能使用，則按停止符號；若不小心誤觸緊急按鈕，可順時針轉動，緊急按鈕會自行彈起 

（三）清潔保養注意事項

1. 電池：電池電量不足時會發出嗡嗡聲，應儘快充電
2. 消毒溶液使用廠商原裝溶液，使用完後更換

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	水療床操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C30	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
109.06.16	1.0	新制定。	109 年 06 月 10 日護理長會議通過；109 年 06 月 16 日督導會議通過公布。
110.02.04	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.11	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	