

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	電動病床操作標準 Hill-Rom 900Accella Electric Hospital Bed Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C31	制定者	CCU 李涵蓁	公布日期	110 年 04 月 06 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	110 年 04 月 06 日
版本/總頁數	第 1.0 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解電動床之操作步驟、要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

燒傷加護病房。

三、說明

(一) 廠牌規格：Hill-Rom (900Accella)



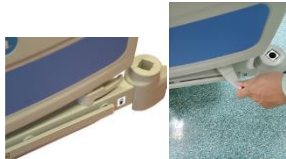
(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 確認病床已插上電源	電源連接於床頭藍色電動床專用插座。
2. 確認煞車已踩下	前腳輪上及床尾有腳輪煞車器。 

主題名稱	電動病床操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C31	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明
3.將床欄拉起，向內推進，直到卡進鎖定位置。	當床欄上拉至鎖定位置卡住時，會聽到喀噠一聲。
4.將藍色面板往上拉，將可放下床欄。	
5.開啟安全啟用。	長按 2 秒後開啟，啟動時安全啟用指示燈會亮 60 秒。 
6.控制病床上升/下降	
7.控制頭部及膝部向上/向下	床頭端床欄上有頭部角度指示器，會顯示抬高角度。  
8.控制床頭仰臥式和頭高腳低式。	床尾端床欄上有垂頭仰臥式頭高腳低式角度指示器。  
9.腳部控制鍵（病床上升/下降）。	先踩踏板 1 秒解鎖後，再踩下所需功能的踏板，直達到所需的位置。 
10.床尾板固定系統。	平時鎖定避免床尾板自床架脫落。

主題名稱	電動病床操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C31	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
	
11.手動延伸床架	不可坐或攀爬在延伸部分上，延伸部分可拉出 20cm，中間階段可以多 4cm。 
12.圖形看護者介面控制器	於腳部護欄上為觸碰螢幕。如欲解鎖，請按下圓形符號直到上方綠燈出現，之後用力按壓並將手指滑向右方，剩下的 LED 會出現。 
13.控制器主畫面	 床頭高度 床體高度
14.秤重系統（重新歸零體重計）	依照訊息調整醫療床。將床上的物品移除，螢幕顯示 0.0 kg 以及 >0< 燈號出現。 
15.秤重系統（量體重）	病人靜止的躺在床墊中間，床欄拉起，身上管路、導線懸空，按下按鍵。

主題名稱	電動病床操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C31	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/6

步驟	說明
	
16.秤重系統（增加／移除醫療床上的部件）	病人躺於床上需移除床尾板時，按下按鈕後顯示移除或增加，移除床尾板後按下 Continue，即可磅體重。 
17.離床警報（病人定位模式/離床模式/下床模式）。	等待選擇螢幕來開啟，利用蜂鳴聲確認啟動。 
18.床背角度通知	限制病患床背>30 或 45 度，若大於設定高度呈綠色（如圖二），小於設定高度則 Alarm 警示（如圖三） 
19.緊急心肺復甦術控制	可利用位於床頭及下方的 CPR 握把，按下握把，可調整頭部回到平坦位置，頭部平放之後，可以鬆開握把，腳會繼續進行自動平放。另按下床頭握柄上 CPR 按鈕可將床面的所有位置都回歸平坦。 

主題名稱	電動病床操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C31	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/6

（三）異常簡易故障排除方法

異常狀況	處理方法
病床控制鍵無法使用。	重新開啟電源，若仍無法啟啟請廠商維修。
病床無法降低。	檢視床底的障礙物偵測感應器間有無物品。
觸控螢幕無法使用。	確認醫療床是否為電池模式。

（四）清潔保養注意事項

- 1.以 0.05% (500ppm)漂白水擦拭，感染傳染性病人則以 0.5% (5000ppm)擦拭。
- 2.每月定期檢視電動床功能及床墊是否破損。
- 3.電源連接於床頭藍色電動床專用插座。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- （一）電動病床使用說明評核表 Hill-Rom 900Accella（編號 A31000-Q18-F-C31）。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	電動病床操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C31	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
110.04.06	1.0	新制定。	110 年 03 月 17 日 護理長會議通過；110 年 04 月 06 日督導會議通過公布。
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.04.06	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	