

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血氧濃度感測儀NELLCOR PM10N操作標準 NELLCOR PM10N Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C35	制定者	SI 朱卉愉	公布日期	113 年 02 月 06 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 04 月 08 日
版本/總頁數	第 1.1 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 04 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解血氧濃度感測儀(NELLCOR PORTABLE PM10N)之操作步驟、要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

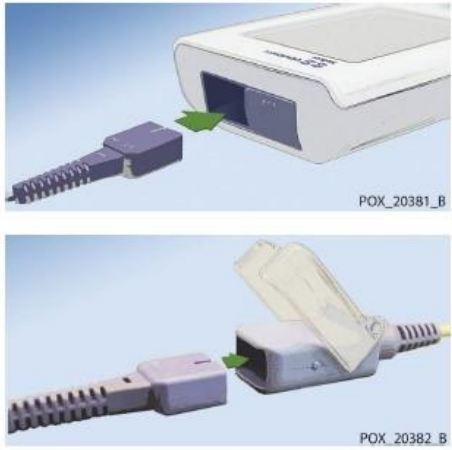
三、說明

(一) 廠牌規格：NELLCOR PM10N



主題名稱	血氧濃度感測儀 NELLCOR PM10N 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C35	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	2/8

(二) 儀器面板功能鍵說明

	1.顯示幕 2.向上鍵 3.返回按鈕 4.確定(選擇)按鈕 5.警報暫停按鈕 6.向下鍵 7.電源打開指示燈 8.電源開/關閉按鈕 9.功能表按鈕
	1.感測器的連接器 2.維修連接器
	將 SpO2 感應器(sensor)連接到儀器正面的傳感器連接口
	1.將 SpO2 感應器(sensor)定位夾在病人手指上後，儀器上的螢幕約 5 秒鐘內開始顯示血氧飽和度(SpO2)和脈搏(Pulse)數值及圖形信號 2.在連續測量下，應每 2-3 小時檢查病人手指上的 SpO2 感應器(sensor)位置 3.如果病人手指表面長時間暴露於 SpO2 感應器(sensor)內，應將 SpO2 感應器(sensor)變換連接其他手指

主題名稱	血氧濃度感測儀 NELLCOR PM10N 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C35	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	3/8

1. 患者類型和患者模式區域 2. SpO2 即時數值 3. 電池狀態圖示 4. 日期/時間 5. SpO2 警報上限和下限 6. 脈搏幅度(光點條) 7. 脈率(BPM)的警報上限和下限值 8. 脈率即時數值 9. 脈搏跳動(心臟搏動)圖示 10. 脈搏圖示 11. 脈動波形圖 12. SatSeconds™ 圖示 13. SpO2 圖示	1.患者類型和患者模式區域 2.SpO2 即時數值 3.電池狀態圖示 4.日期/時間 5.SpO2 警報上限和下限 6.脈搏幅度(光點條) 7.脈率(BPM)的警報上限和下限值 8.脈率即時數值 9.脈搏跳動(心臟搏動)圖示 10.脈搏圖示 11.脈動波形圖 12.SatSeconds™ 圖示 13.SpO2 圖示
--	---

(三) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 電源開/關鍵  ：按壓約1秒鐘以上即可開/關機。	按此鍵可以開啟/關閉電源。
2. 將SpO2感應器(sensor)定位夾在病人手指上後，即可測量。	
3. 按下功能表按鈕進入系統設定，選單欄(Menu)項目說明如下： (1)保存熱點讀數：保留此刻數據。 (2)警報限值：設定警報上下限值。 (3)設備設置：調整監護系統的亮度和音量。 (4)監護歷史紀錄：讀取熱點或歷史紀錄。 (5)更改患者模式：選擇患者模式。	

主題名稱	血氧濃度感測儀 NELLCOR PM10N 操作標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q17-W-C35	版本	第 1.1 版
		頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
4. 進行保存熱點讀數的步驟： (1) 按下“功能表”按鈕。 (2) 如果尚未選中，滾動至“保存熱點讀數”。 (3) 按下“確定”按鈕選擇該項。 (4) 螢幕上將顯示消息“熱點讀數已保存”。 (5) 參閱“監護歷史記錄”查看已保存的熱點讀數，在原測量畫面按下Menu按鍵。	 The screenshot shows the main monitoring screen with SpO2 at 97 and Pulse at 60. A menu is open, and '保存热点读数' (Save Hotspot Reading) is highlighted.
5. 進行設置報警限值的步驟： (1) 按下“功能表”按鈕。 (2) 按下“向下鍵”的按鈕和“確定”按鈕，選擇“報警限值”功能表。 (3) 報警設置包括： - 脈搏(PR)和SpO2上下限值範圍。 - 按下“向上鍵”的按鈕或者“向下鍵”的按鈕，突出顯示所需的選項。 - 按下“確定”按鈕選擇所需的選項。 - 按下“向上鍵”的按鈕或者“向下鍵”的按鈕更改數值。 - 按下“確定”按鈕保存所需的數值。 - 按下“向上鍵”或者“向下鍵”的按鈕突出顯示另一個選項，或者按下“返回”按鈕返回“主功能表”。	 The screenshot shows the '报警限值' (Alarm Limits) menu. 'SpO2 上限' (SpO2 Upper Limit) is set to 100%, and 'SpO2 下限' (SpO2 Lower Limit) is set to 85%. Other settings like '脉搏上限' (Pulse Upper Limit) at 170BPM and '脉搏下限' (Pulse Lower Limit) at 40BPM are also visible.
6. 進行調整監護系統的亮度和音量： (1) 按下“功能表”按鈕。 (2) 按下“向上鍵”或者“向下鍵”的按鈕，突出顯示“設備設置”功能表，然後按下“確定”按鈕選擇“設備設置”功能表。 (3) 調整亮度 - 按下“向下鍵”的按鈕降低亮度。 - 按下“向上鍵”的按鈕提高亮度。 - 按下“確定”按鈕保存所需的亮度。 (4) 調整音量 - 按下“向下鍵”的按鈕，降低音量格數。 - 按下“向上鍵”的按鈕，提高音量格數。 - 按下“確定”按鈕保存所需的音量格數。	 The screenshot shows the '设备设置' (Device Settings) menu. '保存热点读数' (Save Hotspot Reading) and '报警限值' (Alarm Limits) are at the top, and '设备设置' (Device Settings) is highlighted.

主題名稱	血氧濃度感測儀 NELLCOR PM10N 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C35	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	5/8

步驟	說明
	
7. 進行監護歷史記錄的步驟： (1) 按下“功能表”按鈕。 (2) 按下“向上鍵”或者“向下鍵”的按鈕，突出顯示“監護歷史記錄”功能表，然後按下“確定”按鈕選擇該功能表。 (3) 在“監護歷史記錄”功能表上選擇“查看熱點資料”或者“查看連續資料”。 (4) 查看“熱點資料”螢幕僅顯示使用主功能表的“保存熱點讀數”項目保存的讀數。 (5) 查看“連續資料”時，按下“確定”按鈕可以調整顯示讀數的間隔，每個間隔是100秒可以調整每1、5、100或者500個資料點顯示。	 熱點資料

主題名稱	血氧濃度感測儀 NELLCOR PM10N 操作標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q17-W-C35	版本	第 1.1 版
		頁碼/總頁數	6/8

步驟	說明
	 連續資料
8. 進行選擇患者模式的步驟： (1) 按下“功能表”按鈕。 (2) 滾動至“更改患者模式”並按下“確定”按鈕。 (3) 根據患者的體重，選用合適的患者模式和脈搏血氧飽和度測量感測器。 ■ 成人—供成人和兒童患者使用。 ■ 嬰兒—供新生兒使用。 (4) 按下“確定”按鈕確認選擇的患者模式。 (5) 按下“功能表”或者“返回”按鈕返回監護螢幕。	

(四) 異常簡易故障排除方法

項目	故障問題	處理方法
1	感測器消息 搜尋脈搏 干擾 感測器從患者體表脫落 SpO2 電纜/感測器斷開連接 未檢測到脈搏	1. 檢查患者狀態 2. 讓患者保持靜止，檢查供血情況 3. 檢查所有的連接 4. 更換感測器的部位 5. 檢查或更換粘貼型纏繞帶 6. 選擇其他部位 7. 預熱部位 8. 覆蓋感測器
2	按下“電源開/關”按鈕後 無回應	1. 按住“電源開/關”按鈕 1 秒以上 2. 更換新的鋰電池 3. 若無回應，請聯繫醫工組處理
3	按下按鈕後無回應	檢查是否未在標準螢幕按下“返回”按鈕
4	打開電源後在 POST 時停滯不前	按住“電源開/關”按鈕至少 10 秒鐘重啟系統，若無法啟動，請聯繫醫工處理

主題名稱	血氧濃度感測儀 NELLCOR PM10N 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C35	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	7/8

5	系統停滯	如果系統停滯，則會發出蜂鳴音。按住電源按鈕約 10 秒鐘，強制關閉監護系統
6	空白螢幕	確定“電源打開”指示燈點亮。如果不亮，短促按下“電源開/關”按鈕檢查監護系統是否處於“睡眠模式”
7	日期和時間不正確	“服務功能表”設置日期和時間
8	未發出聲音	1. 核對音量設置的格數足夠聽清楚 2. 核對監護系統沒有處於“睡眠模式” 3. 核對沒有暫停警報音訊
9	電池電量低/電池電量極低	立即更換新的鋰電池

(五) 清潔保養注意事項

1. 以非腐蝕性的清潔劑或酒精，輕輕擦拭儀器的表面。
2. 勿將液體噴濺、傾倒到儀器及配件上。
3. 感應器可使用清水沾濕抹布輕輕擦拭。

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 血氧濃度感測儀(NELLCOR PM10N)使用說明評核表（編號：A31000-Q18-F-C35）。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

