

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	Hemochron血凝分析儀操作標準 Hemochron Signature Elite Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C36	制定者	SI 朱卉愉	公布日期	113 年 02 月 06 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 02 月 06 日
版本/總頁數	第 1.0 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

建立使用Heparin處置之患者進行血液凝血檢查之標準操作程序，以提供正確可信的檢查結果，供醫師診斷凝血之狀態。檢查項目包含ACT (Activated Clotting Time)。

二、範圍

內外科加護病房。

三、說明

(一) 廠牌規格：Hemochron signature elite



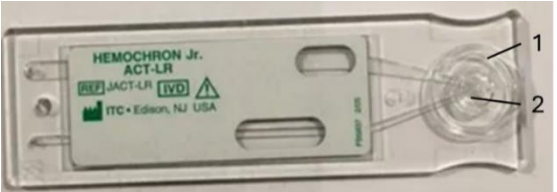
主題名稱	Hemochron 血凝分析儀操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C36	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/6

(二) 儀器面板功能鍵及 ACT-LR Cuvette 試片說明

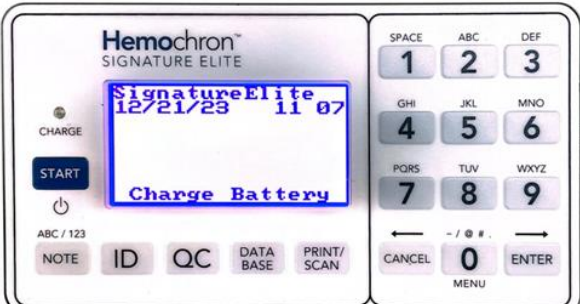
1. 儀器面板功能鍵說明

	1. 充電指示器：充電中會顯示綠燈，待機時應持續充電。 2. 啟動鍵：啟動或關閉儀器。 3. 操作鍵：切換數字/英文字母。 4. ID鍵：鍵入病人或操作人員ID 5. QC鍵：啟動電子品管測試(EQC)。 6. 資料庫：顯示現有儲存於本儀器中的測試結果(含QC)，以及可儲存測試結果的筆數。 7. 列印/掃描鍵：外接印表機列印測試結果和品管資料庫、掃描病人ID或操作人員ID。 8. 顯示板：操作畫面顯示處。 9. 雷射掃描裝置：讀取病人ID或操作人員ID。 10. 數字鍵盤/選項鍵盤：依照顯示板畫面選擇對應選項，手動鍵入病人ID、操作人員ID、試片批號、QC批號、時間或日期。未執行測試而出現選單時，按下0的數字鍵，顯示主選單。於資料庫畫面時點選Enter鍵可查看下一筆。 11. 測試室：插入試片處。
---	---

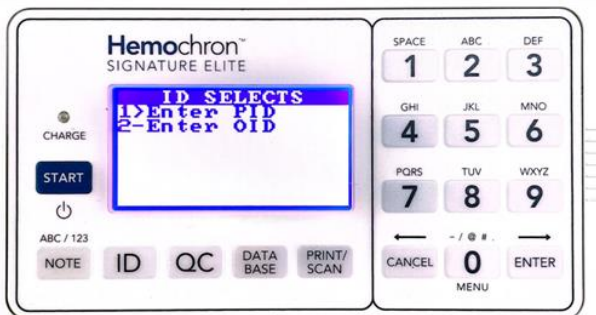
2. ACT-LR Cuvette 試片說明

	1. 溢出區：多餘血量可撥移至此處。 2. 血品注入區。 ■ 儲存方法：置於2-8度C冰箱，使用前回溫至室溫，室溫下可儲存12周。
---	---

(三) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 預先將試片從冰箱取出至少1小時回溫。	
2. 待機畫面直接插入已回溫的試片。	

主題名稱	Hemochron 血凝分析儀操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C36	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
3. 插入試片後，儀器會加熱至37度C，耗時約30-90秒。	
4. 加熱中按下ID鍵輸入病人及操作者ID後按Enter鍵或按下PRINT/SCAN掃描病人或操作者ID，輸入完後長壓Enter儲存，全部輸入完成後，按下Cancel回到操作頁面。	
5. 儀器預熱完成後發出滴滴聲，五分鐘內注入檢體，檢體量僅需一滴，血量到平面就好，低於平面或呈表面張力都不行，若血量太多，可將多餘血量撥至溢出區，注入完成後按下Start鍵。	   Dips  Domes
6. 分析完成後螢幕出現Remove Cuvette，移開檢體後回到待機畫面。	

主題名稱	Hemochron 血凝分析儀操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C36	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/6

(四) 異常簡易故障排除方法

項目	故障問題	處理方法
1	電池充電 (CHARGE BATTERY)	電量不足，將電池連續充電 8 小時，若錯誤訊息仍然出現時，請聯絡醫工。
2	電池故障 (BATTERY FAULT)	電池持續充電 8 小時後，訊息仍然出現，請聯絡醫工。
3	加熱器溫度過低 (Heater Too Cool)	電池充電後，再重新測試，若錯誤訊息仍然存在，請聯絡醫工。
4	加熱器溫度太熱 (Heater Too Hot)	更換新試片測試，若錯誤訊息仍然存在時，請聯絡醫工。
5	偵測器故障 (Detector Fault)	更換新試片測試，若錯誤訊息仍然存在，請聯絡醫工。
6	樣本過量/樣本不足 (Sample Too Large/ Sample Too Small)	打入檢體過多或過少，請更換試片測試，若錯誤訊息仍然存在時，請聯絡醫工。
7	低於下限 (Out of Range-Lo)	測試結果超出測試範圍，檢體可能凝固或有氣泡，重新抽取檢體再測試。
8	超出上限 (Out of Range-Hi)	測試結果超出測試範圍，檢體可能混合到抗凝劑，重新抽取檢體再測試。

(五) 清潔保養注意事項

1. 使用沾水棉布清潔儀器外殼與試片插入處，建議於關機狀態下進行。
2. 若使用酒精棉片擦拭受到血漬污染的部位，務必再以濕布將酒精擦掉，最後以乾布擦乾。
3. 不得使用溶劑或強效清潔液，可能會損傷儀器的塑膠元件。

(六) 品管機制：24 小時會自動進行 QC 測試，QC 後按  + ，QC 結果會上傳至系統。若 QC 測試失敗則通知醫工。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) Hemochron Hemochron 血凝分析儀使用說明評核表 (編號：A31000-Q18-F-C36)。

主題名稱	Hemochron 血凝分析儀操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C36	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/6

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

