

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	保溫箱 C450 操作標準 Incubator Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-D03	制定者	IR 黃淑媛	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 2.2 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解保溫箱(C450)之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

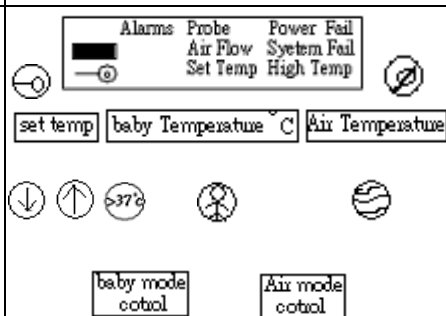
二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：C450

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 按下右側邊電源開關（白色按鈕）。	⊙
2. 螢幕顯示。	 The diagram shows the control panel of the incubator. At the top, there are several status indicators: 'Alarms', 'Probe', 'Power Fail', 'Air Flow', 'System Fail', 'Set Temp', and 'High Temp'. Below these are three main display areas: 'set temp', 'baby Temperature °C', and 'Air Temperature'. There are also several control buttons: a down arrow, an up arrow, a button with '>37°C', a button with a person icon, and a button with a globe icon. At the bottom, there are two buttons labeled 'baby mode control' and 'Air mode control'. ■ 顯示設定溫度 ⊗ 若有裝置 skin sensor 時，則可監測嬰兒體溫的功能，若無裝置 skin sensor 時，則選 ⊕。 - 按 ⊕ ⊗ 調整好溫度後按下 ⊙ 鈕可鎖定預設好的溫度。
3. 調整保溫箱溫度。	調整 Air 處為保溫箱溫度，baby mode 處為嬰兒溫度。
4. 覆蓋保溫箱左右側開口。	為防止溫度及溼度之喪失。保溫箱上層及內層

主題名稱	保溫箱 C450 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
	再安裝透明片兩片則可以達到 double warm 的功效。
5. 打開保溫箱。	旋轉保溫箱左右側兩邊白色卡損  。
6. 鋪床單。	打開保溫箱後，再將箱門往外拉，整片箱門即可打開，得以鋪床。
7. 關上保溫箱門。	等待溫度上升至設定溫度。
8. 溫度升至設定溫時，即可將嬰兒抱入保溫箱。	白色卡損要記得卡穩，注意嬰兒安全，防止跌落。
9. 當實際溫度與設定溫度相差兩度以上，保溫箱即會 Alarms。	按下右上方之 Silence 鍵  。

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 出現「嗶嗶」聲警告	當溫度超過預設值時	調整合適溫度。
2. 沒有保溫效果	保溫箱壞掉或沒插電	插頭插好觀察溫度是否上升。
3. 運送時不好推	可能輪子卡棉屑或輪子壞了	若輪子卡棉屑平時就要清潔，必要時上油使運送時更易推動。

(四) 清潔保養注意事項

1. 觀察有無溫控異常狀況。
2. 輪子平時就要清潔，必要時上油使運送時更易推動。
3. 主機每月 2 次清潔，將卡住的棉屑清除乾淨，使用軟毛刷，勿用濕布或硬刷子，以免毀損。
4. 觀察門栓有無異常，若故障立即請修，避免病人從保溫箱內跌落。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 保溫箱使用說明評核表 C450 (編號：A31000-Q18-F-D03)。

主題名稱	保溫箱 C450 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	3/5

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	保溫箱 C450 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.2	第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改 為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會議 通過公布。
109.04.09	2.2	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
110.07.08	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.11	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	保溫箱 C450 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
114.06.05	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	