

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	嬰兒保溫箱 Isolette Dräger Incubator C2000 操作標準 Dräger Incubator C2000				
編號	A31000-Q17-W-D08	制定者	NI 邱曉彤	公布日期	106 年 07 月 05 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 1.2 版/13 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 04 月 10 日

一、目的

讓護理人員、照顧服務員了解 Isolette Dräger Incubator C2000 之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

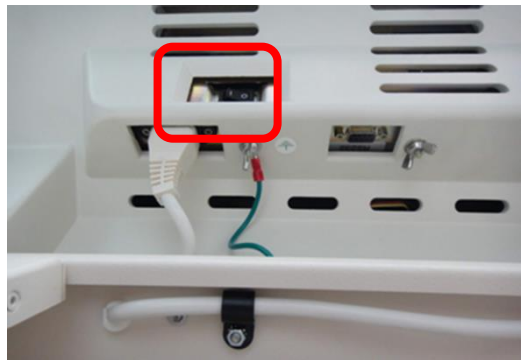
二、範圍

護理部各單位。

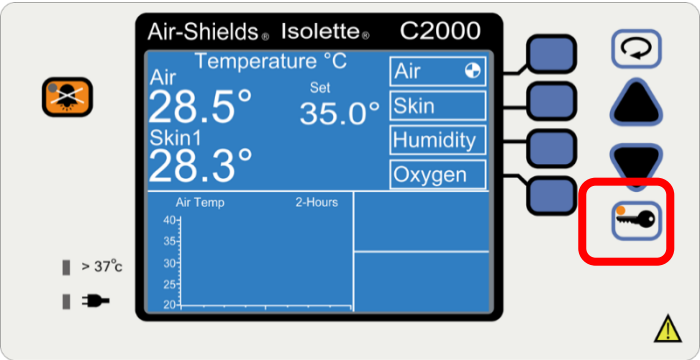
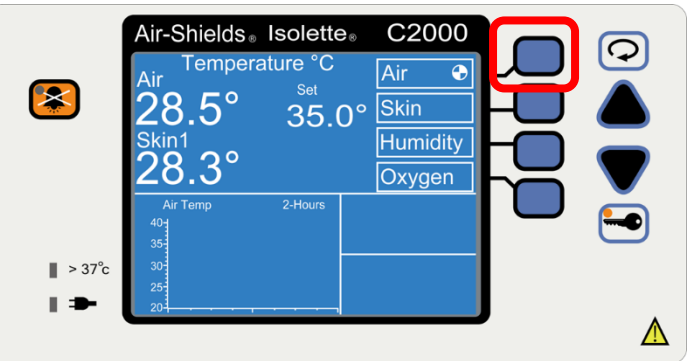
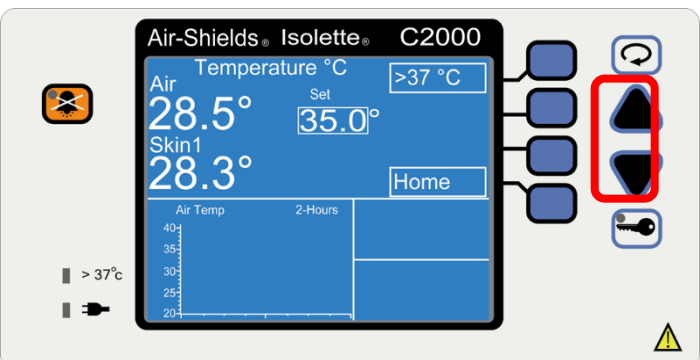
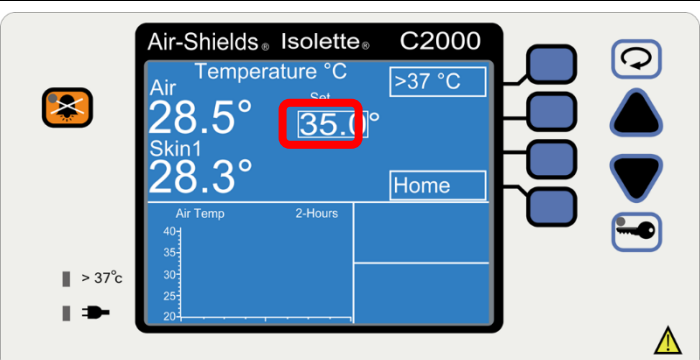
三、說明

(一) 廠牌規格：Isolette Dräger Incubator C2000

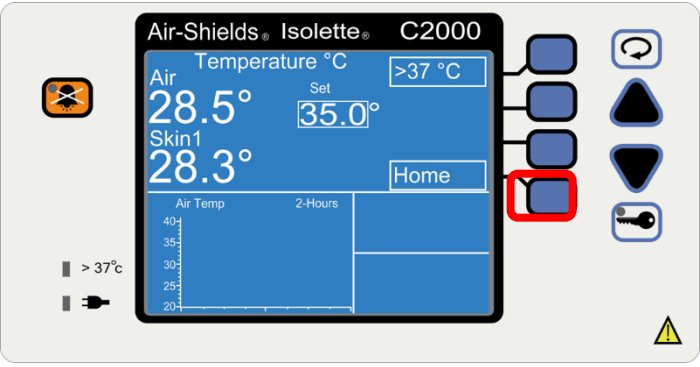
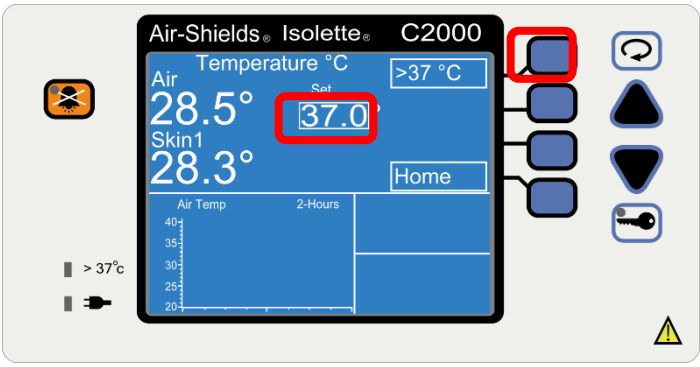
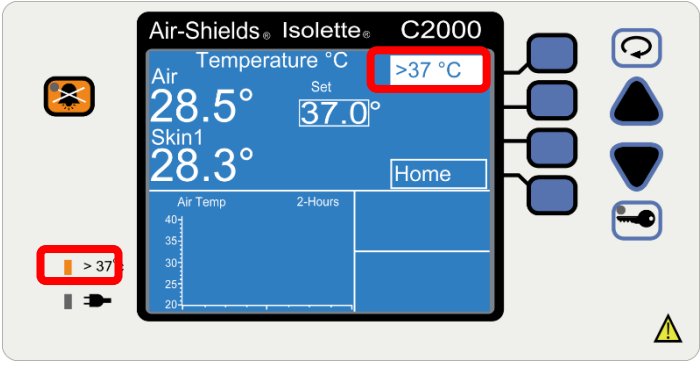
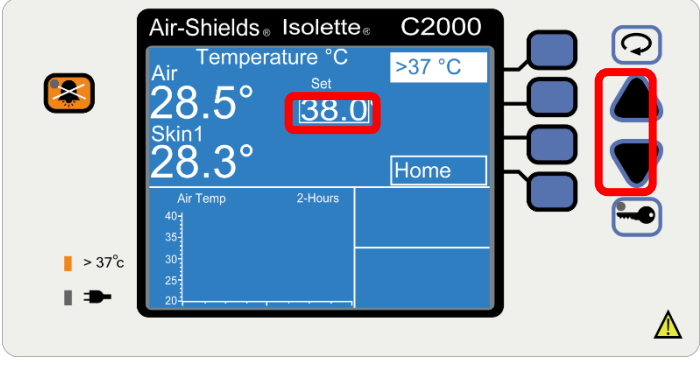
(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
(一) 開機	
1. Dräger Incubator C2000 嬰兒保溫箱。	
2. 按壓螢幕下方開/關機鍵。(圖片中紅色框內)	

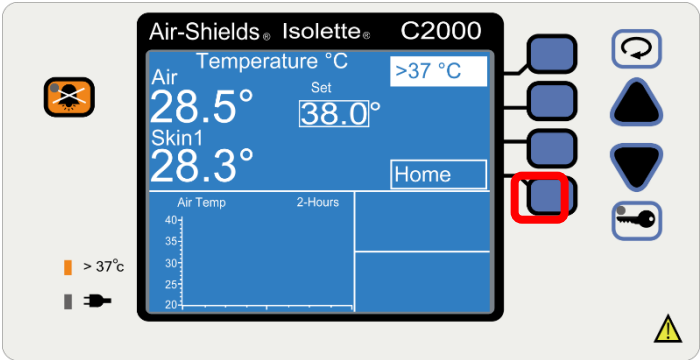
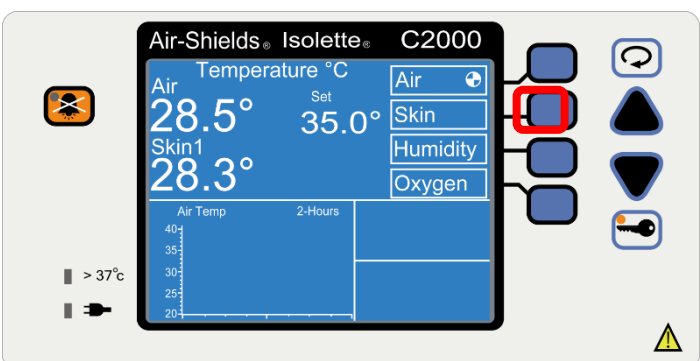
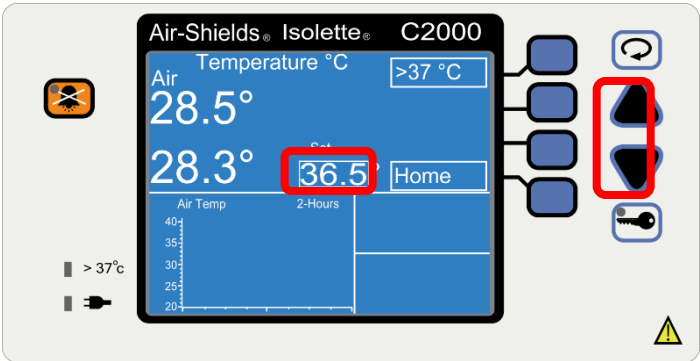
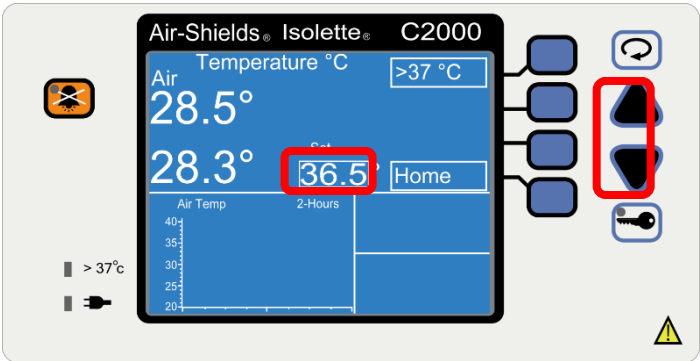
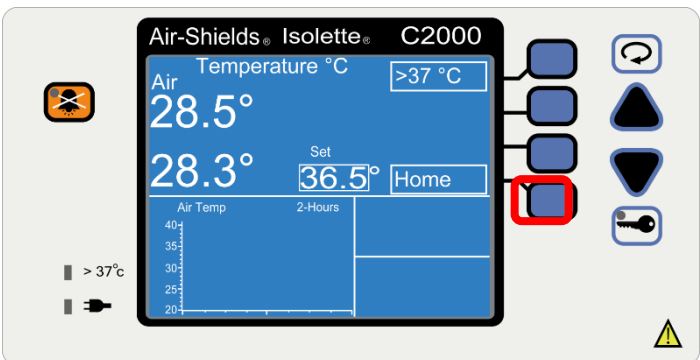
主題名稱	嬰兒保溫箱 Isolette Dräger Incubator C2000 操作標準	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q17-W-D08	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數 2/13

步驟	說明
3. 視情況需要、按一下”鍵盤鎖”，解除鎖定狀態。(圖片中紅色框內)	
(二) 設定 Air 空氣控制模式參數	20~37°C
1. 按”Air”軟鍵，設定『空氣溫度控制模式』。(圖片中紅色框內)	
2. 按”上、下”鍵確認溫度參數。(圖中紅色框內)	
3. 確認所需的設定溫度。(圖片中紅色框內)	

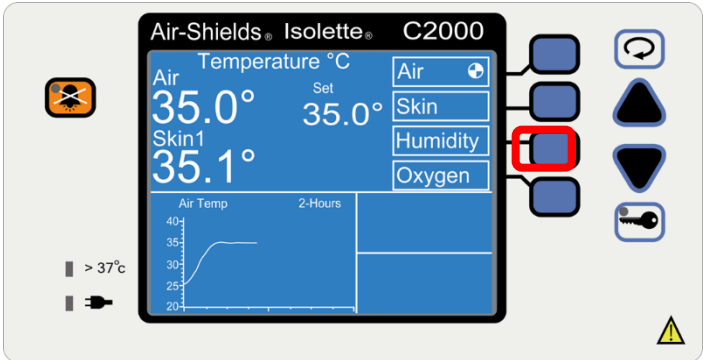
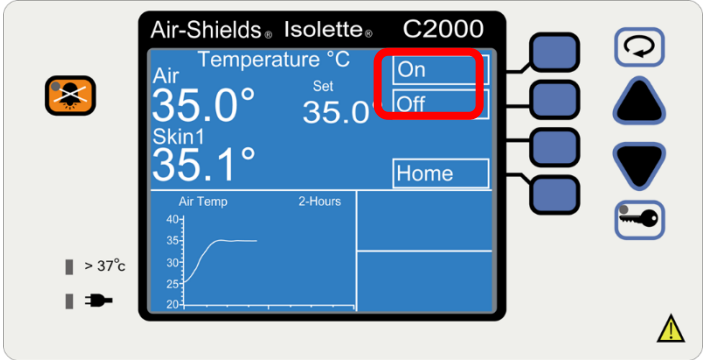
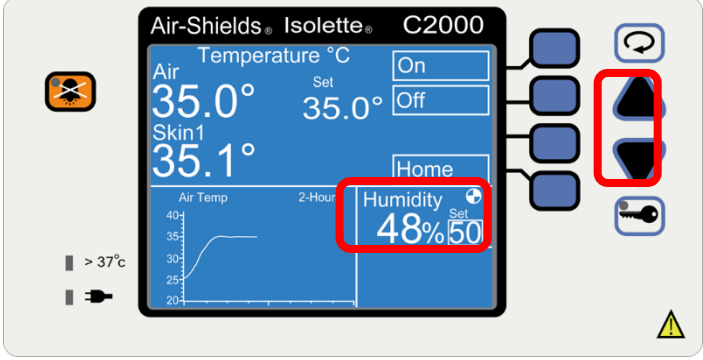
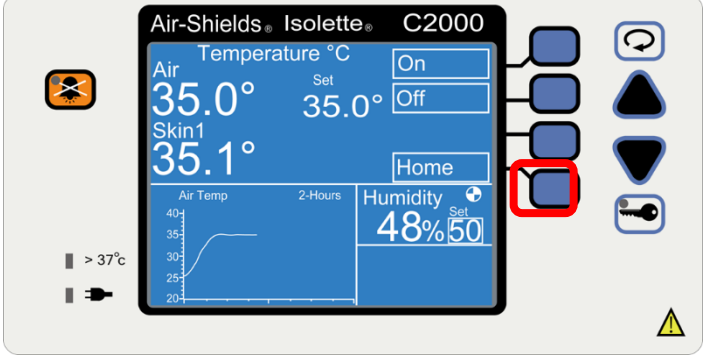
主題名稱	嬰兒保溫箱 Isolette Dräger Incubator C2000 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-D08	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	3/13

步驟	說明
4. 確認完畢，按”Home”鍵退出。(圖片中紅色框內)	
(三) 設定 Air 超溫模式	37~39°C
1. 將溫度設定到 37°C 後，按”>37°C”鍵。(圖片中紅色框內)	
2. 此時面板顯示”>37°C”會反白，且>37°C 燈會亮起。(圖片中紅色框內)	
3. 按”上、下”鍵，去設定所需的超溫溫度。(圖片中紅色框內)	
4. 確認設定溫度。(圖片中紅色框內)	

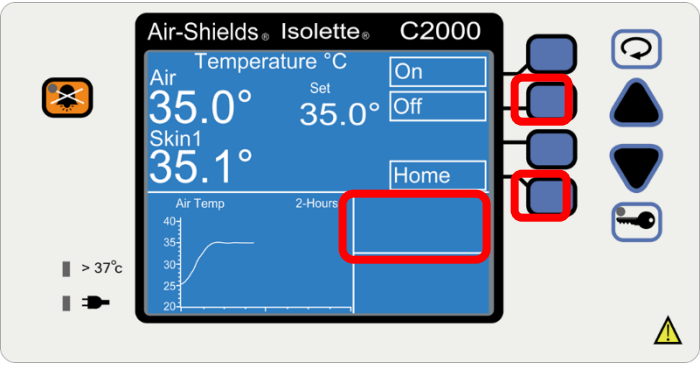
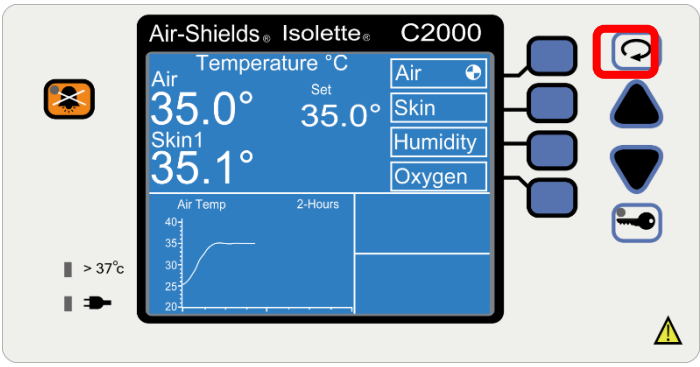
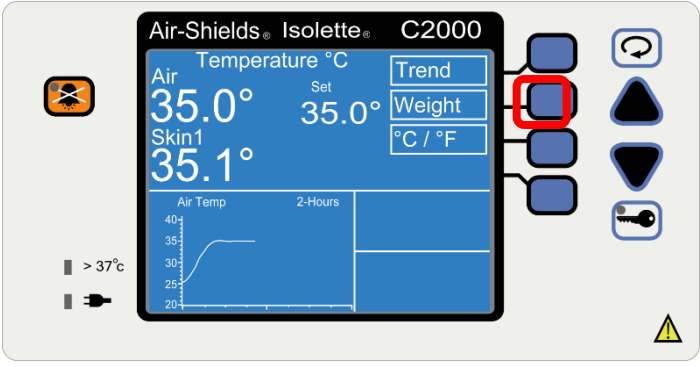
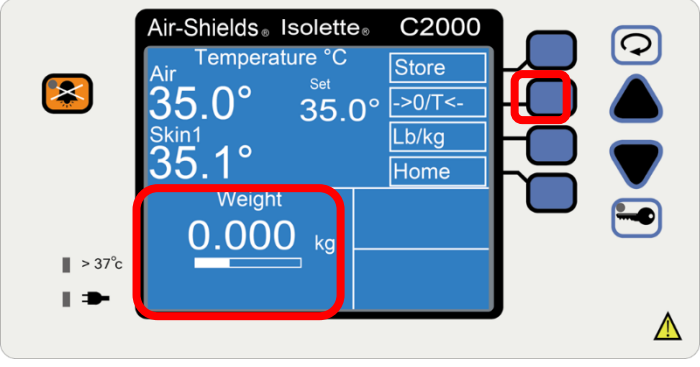
主題名稱	嬰兒保溫箱 Isolette Dräger Incubator C2000 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-D08	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	4/13

步驟	說明
5. 確認完成後，按”Home”鍵退出到主畫面。(圖片中紅色框內)	
(四) 設定 Skin 皮膚控制模式參數	34~37°C
1. 按”Skin”軟鍵，設定『皮膚溫度控制模式』(圖片中紅色框內)	
2. 按”上、下”鍵確認溫度參數。(圖中紅色框內)	
3. 確認所需的設定溫度。(圖片中紅色框內)	
4. 確認完成後，按”Home”鍵退出到主畫面。(圖片中紅色框內)	
(五) 設定 Skin 超溫模式	同設定 Air 超溫模式 37~38°C
(六) 濕度控制模式	

主題名稱	嬰兒保溫箱 Isolette Dräger Incubator C2000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D08	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	5/13

步驟	說明
1. 按”Humidity”鍵。(圖片中紅色框內)	
2. 按”On”開啟潮濕功能。(圖片中紅色框內) 3. 按”Off”關閉潮濕功能。(圖片中紅色框內)	
4. 按 On 鍵後，下方螢幕會出現 Humidity 濕度%。(圖片中紅色框內) 5. 按”上、下”鍵，設定所需濕度。(圖片中紅色框內)	
6. 設定完，按”Home”鍵，退出回到主畫面。(圖片中紅色框內)	

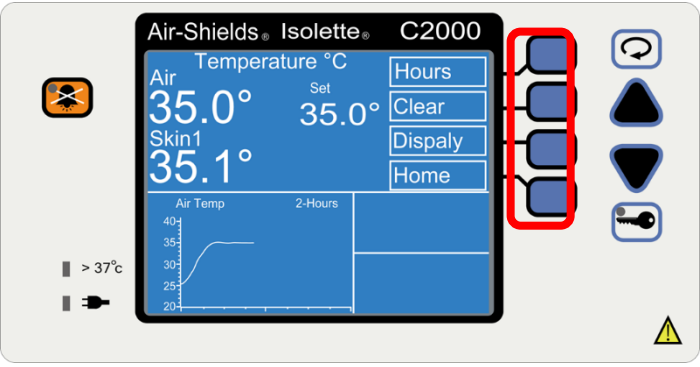
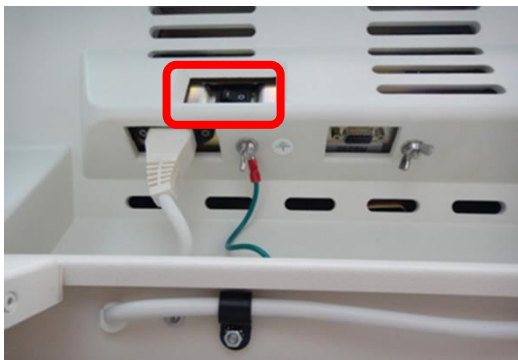
主題名稱	嬰兒保溫箱 Isolette Dräger Incubator C2000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D08	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	6/13

步驟	說明
7. 關閉 Humidity 功能。 8. 按”Off”鍵，下方 Humidity 框的字都消失，就關閉了。(圖片中紅色框內) 9. 按”Home”鍵，退出到主畫面。(圖片中紅色框內)	
(七) 磅秤操作	
1. 按”迴圈”鍵，跳到第二頁螢幕。(圖片中紅色框內)	
2. 按”Weight”鍵，進入磅秤模式。(圖片中紅色框內)	
3. 如已歸零過，則此時會自動開始測量體重，當 bar 停止時，則為測量結束。(圖片中紅色框內) 4. 如未歸零過，請按”->0/T<-“做歸零校正。(圖片中紅色框內)	

主題名稱	嬰兒保溫箱 Isolette Dräger Incubator C2000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D08	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	7/13

步驟	說明
5. 按歸零校正時，畫面出現嬰兒抱起的畫面，此時將嬰兒抱起來，離開床墊。 (圖片中紅色框內)	
6. 當 Weight 顯示”0.000”時，則歸零結束。(圖片中紅色框內)	
7. 將嬰兒放下至床墊上，此時 Weight 會重新測量，當 Bar 停止時則為測量結束，此時的重量為嬰兒的重量。(圖片中紅色框內)	
8. 如要儲存可按”Store”紀錄。(圖片中紅色框內)	
9. 測量結束可按”Home”退回主畫面。(圖片中紅色框內)	
(八) 趨勢圖設定	
1. 切換到螢幕第二頁，按”Trend”鍵。(圖片中紅色框內)	

主題名稱	嬰兒保溫箱 Isolette Dräger Incubator C2000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D08	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	8/13

步驟	說明
2. Hours 鍵可設定顯示時間區間：2、4、8、12、24 小時。 3. Clear 鍵，可清除先前趨勢圖。 4. Display 鍵，可切換顯示類型(Air Temp、Skin Temp...)。 5. 確認完成按”Home”回到主畫面。 (圖片中紅色框內)	
(九) 關機	
1. 按壓電源開關->關機。(圖片中紅色框內)	

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
無系統電源，且電源失敗  (面板)	保溫箱主電源開關是關著	打開主電源開關 
電源失敗警報動作  (面板)	無 UPS 系統： 電源線無插上電源	確認電源線接上 AC 電源，如電源線為可拆式，請確認電源線是牢固於機器上。
	非 UPS 系統： 電源線是接上的	重新連接電源線於插座上。
低空氣/皮膚溫度警報聲響  Low Air /Skin Temperature	門是開啟的	關起所有的門與手圍的門
	皮膚模式下感測器黏貼位置不對	檢查皮膚感測連線
存在低氧氣濃度	門是開啟的	關起所有的門與手圍的門
	門是打開或套子安裝錯誤	檢查安裝套子部分
	管子配件部分安裝不正確	檢查安裝管子配件部分
	空氣進氣過濾器蓋子未牢固	檢查過濾器蓋

主題名稱	嬰兒保溫箱 Isolette Dräger Incubator C2000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D08	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	9/13

異常狀況	發生原因	處理方法
	空氣過濾器未安裝	檢查空氣過濾器
	內部管路未連接	關掉保溫箱並且不要使用。 聯絡維修人員。
存在高氧氣濃度	空氣過濾器是髒的	更換過濾器
	保溫箱在缺乏空氣流通的環境	檢查風扇是否安裝，若以安裝則關掉保溫箱且不要使用，聯絡維修人員。
無法調整保溫箱高低	主機電源沒有開啟	開啟主機電源
馬達失敗聲響  Motor Failed (面板)	風扇馬達無功能	關掉保溫箱並且不要使用。 聯絡維修人員。
加熱器失敗警報動作  Heater failure (面板)	風扇馬達無功能或加熱器失敗	關掉保溫箱並且不要使用。 聯絡維修人員。
控制器失敗警報  Controller failure # (面板)	內部故障	關掉保溫箱並且不要使用。 聯絡維修人員。
	第一次安裝或加裝新的軟體	壓靜音/重置鍵，如仍失敗關掉保溫箱並且不要使用。 聯絡維修人員。
按鍵卡住警報  Key Stuck (面板)	控制器按鍵功能故障	關掉保溫箱並且不要使用。 聯絡維修人員。
空氣感測失敗警報  Air Probe Failure (面板)	空氣感測器故障	關掉保溫箱並且不要使用。 聯絡維修人員。
低空氣流量警報	保溫箱在缺乏空氣流通的環境	檢查風扇是否安裝，若以安裝則關掉保溫箱且不要使用，聯

主題名稱	嬰兒保溫箱 Isolette Dräger Incubator C2000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D08	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	10/13

異常狀況	發生原因	處理方法
 Low Air Flow (面板)		絡維修人員
感測器模組警報  Sensor module # (面板)	感應器模組故障	查看感應器正確位置，假如警報仍存在，則關掉保溫箱不要使用，聯絡維修人員。
感測器模組超出位置警報  Sensor Out of Position (面板)	感應器模組未在正確位置校正與操作	查看感應器正確位置，假如警報仍存在，則關掉保溫箱不要使用，聯絡維修人員。
感測器無連線警報  Sensor Disconnected (面板)	感應器模組通訊失敗	接上感應器模組。如訊息仍存在： 1.更換氧氣感應器 2.關掉保溫箱並重新調整感應器位置。 3.如警報仍存則關掉保溫箱且聯絡維修人員。
移開皮膚 2 感溫器警報  Remove Skin 2 Probe (面板)	而在皮膚模式，第二個探頭連接到感應器模組。	移開了第二探頭或在空氣控制模式。
	雖然在兩個連接的探針與空氣模式，使用者試圖進入皮膚模式。	移開了第二探頭且按壓靜音/重置鍵。
 低濕度警報 Low Humidity (面板)	無水在潮濕瓶	裝水，假如警報仍存在，則關掉保溫箱且不要使用並聯絡維修人員。

主題名稱	嬰兒保溫箱 Isolette Dräger Incubator C2000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D08	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	11/13

異常狀況	發生原因	處理方法
濕度加熱器失敗警報  Humidity Heater Failed (面板)	潮濕系統故障	關掉保溫箱並且不要使用。 聯絡維修人員。
過重訊息警報  Too Much Weight (面板)	重量超過 7 公斤 當磅秤在歸零，重量超過 3500 克	移開過重物品。 移開過重物品。
磅秤未連接警報  Scale Disconnected (面板)	磅秤與感應器模組未連接 磅秤與感應器模組線斷了	重新連接磅秤與感測器模組 關掉保溫箱並且不要使用。 聯絡維修人員。
磅秤失敗訊息警報	磅秤功能故障	關掉保溫箱並且不要使用。 聯絡維修人員。
校正失敗訊息顯示 Cal Fail (面板)	伺服控制氧氣系統故障校正。	重複校正過程。 如果校正過程失敗，聯絡維修人員。
無安裝訊息顯示 Not Installed (面板)	伺服控制氧氣和/或加濕系統是無安裝的	安裝氧氣和/或加濕系統。
	伺服控制氧氣和/或加濕系統是無動作的	設定伺服控制氧氣和/或加濕系統系統配置目錄 (看“系統配置”在 5-22 頁)。

(四) 清潔保養注意事項

1. 檢查電源線是否完整及保溫箱外觀是否完整。
2. 每次使用完執行清潔保養，維持保溫箱之清潔。
3. 保溫箱上方不可擺置液體類或其他部品，維持清空狀態，並保持機器正常使用。
4. 每三個月更換過濾棉。

主題名稱	嬰兒保溫箱 Isolette Dräger Incubator C2000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D08	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	12/13

5. 清潔內部時請於 45 分鐘或機器冷卻後在進行清潔，以免燙傷。且清潔完以乾淨的布或紙巾擦乾，以免損壞馬達軸心。
6. 機器外部以清水初步清潔後再以高效能表面清潔殺菌劑擦拭即可。勿使用酒精清洗以免發生設備損壞。
7. 清潔後勿使用酒精擦拭，容易造成保溫箱外部壓克力產生清晰的裂紋。亦勿將紫外線殺菌燈直接照射保溫箱外部，易引起外部壓克力表面的龜裂。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 嬰兒保溫箱使用說明評核表 Isolette Dräger Incubator C2000 (編號：A31000-Q18-F-D08)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	嬰兒保溫箱 Isolette Dräger Incubator C2000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D08	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	13/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
106.07.05	1.0	新制定。	106 年 07 月 05 日 護理部照護標準 委員會通過；106 年 07 月 05 日公 布
107.06.13	1.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	1.2	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施， 改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布 實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會議 通過；108 年 06 月 18 日督導會議通 過公布。
109.06.04	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.04.01	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.04.10	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	