

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	小兒百靈耳溫槍 Pro-6000 操作標準 Ear Thermometer Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-D09	制定者	R10 陳倩芳	公布日期	109 年 06 月 16 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	109 年 06 月 16 日
版本/總頁數	第 1.0 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 02 月 06 日

一、目的

讓兒科護理人員了解耳溫槍Pro-6000之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

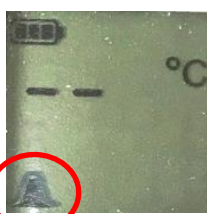
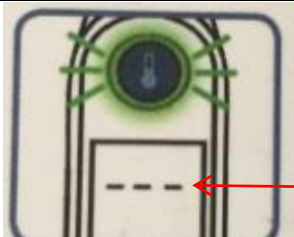
二、範圍

兒童科病房及兒童血液腫瘤病房。

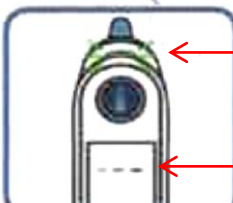
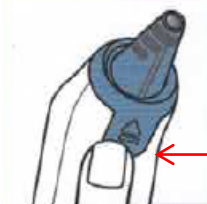
三、說明

(一) 廠牌規格：Pro-6000

(二) 儀器操作步驟及要點說明

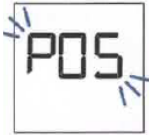
步驟	說明
1. 抓住耳溫槍底部並向上拿取耳溫槍。耳溫槍拿起時會自動開機，螢幕會指示套上新的耳套。	 
2. 套上耳套盒內的乾淨耳套。	 
3. 當測量按鍵周圍亮起綠燈，出現"嗶"聲，且螢幕顯示三條線，即代表耳溫槍探頭已完成預熱，可進行測量。	 顯示三條線代表可進行測量

主題名稱	小兒百靈耳溫槍 Pro-6000 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-D09	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
4. 將耳溫槍置於病人耳道內並維持探頭位置穩定，紅外線多點偵測，同時偵測耳道內 8 個位置，取得耳道內的最高溫，確保量測到準確的數值。	
5. 按一下測量按鍵即可測量。	
6. 測量時：三條線會輪流閃爍->同時 Exac Temp 燈號也會閃爍。	 Exac Temp 燈閃爍 三條線輪流閃爍
7. 測量完成：Exac Temp 燈號恆亮->體溫值顯示於螢幕。	 Exac Temp 燈號恆亮 表示測量完成 體溫值顯示於螢幕
8. 按下退耳套環，退掉用過的耳套（請單次拋棄耳套，以避免交叉感染），下次測量前請換新耳套。	 量測完成，按下退耳套  單次拋棄耳套

主題名稱	小兒百靈耳溫槍 Pro-6000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D09	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/5

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
螢幕會顯示： 	測量位置不正確。	請重新裝耳套，將探頭置於耳道內正確位置並重新測量。
螢幕會顯示： 	環境溫度不在操作範圍內 (10°C_40°C) 或環境溫度改變差異太大。	請將耳溫槍靜置於室溫下 30 分鐘後再使用。
螢幕會顯示： 	系統錯誤	待 10 秒至耳溫槍自動關機後再次開機;若錯誤仍存在，請重新裝置電池。

(四) 清潔保養注意事項

1. 耳溫槍鏡面不可用酒精擦拭，用乾淨棉花棒擦拭即可。
2. 去除耳溫槍膠膜時，須用手指輕壓彈圈，避免折斷。
3. 清潔時須小心，避免掉落。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 小兒百靈耳溫槍使用說明評核表 Pro-6000 (編號：A31000-Q18-F-D09)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

主題名稱	小兒百靈耳溫槍 Pro-6000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D09	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/5

七、附件

(略)

主題名稱	小兒百靈耳溫槍 Pro-6000 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-D09	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
109.06.16	1.0	新制定。	109 年 06 月 10 日護理長會議通過；109 年 06 月 16 日督導會議通過公布。
110.02.04	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.02.06	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	