

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血液透析機 B.Braun Dialog+操作標準 Hemodialysis Machine Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-F06	制定者	HD 林卉嫻	公布日期	110 年 08 月 03 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	110 年 08 月 03 日
版本/總頁數	第 1.0 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的


讓護理人員了解血液透析機之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

血液透析室。

三、說明

(一) 廠牌規格：B.Braun Dialog+

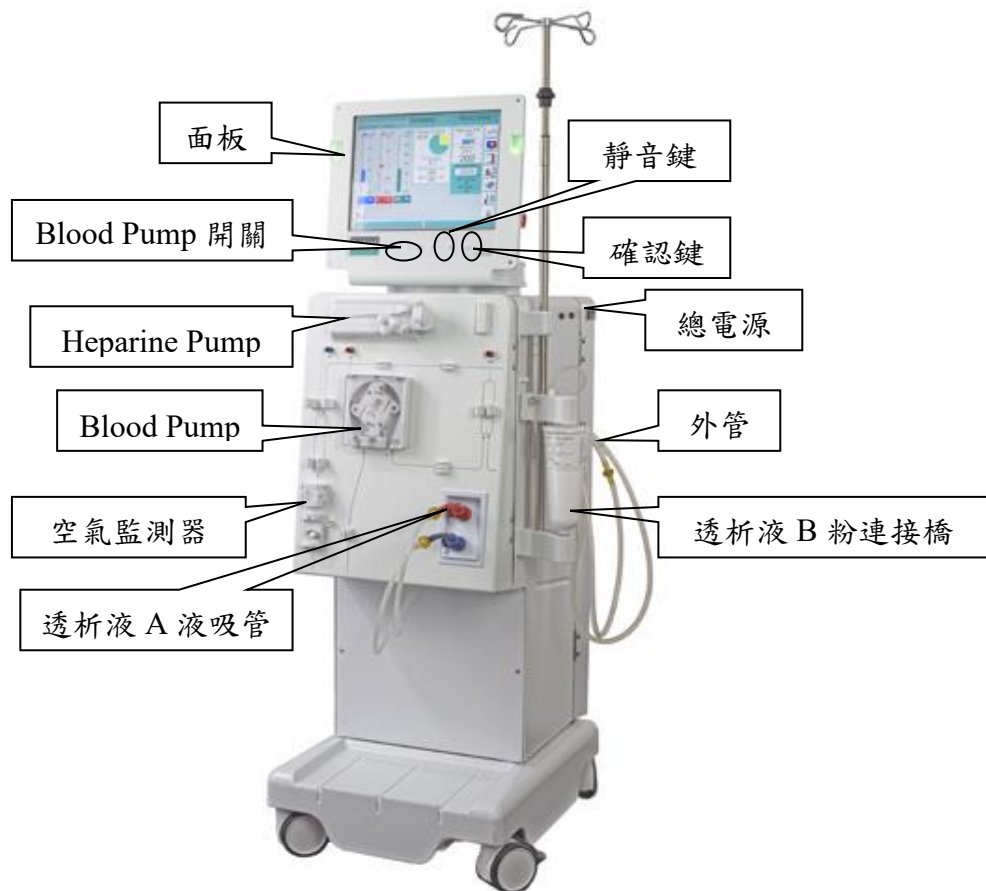

主題名稱	血液透析機 B.Braun Dialog+操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-F06	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/5

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
一、開機	
1. 確認  機器逆滲透水的接頭接好並打開水閥，機器插上電源插座  ，開機器總電源開關 	
2. 面板選擇血液透析模式  ，再按壓消毒完成確認鍵。	
二、自我測試	
1. 機器消毒完成會自動進入第一階段自我測試。 	如果未裝置藥水，自我測試會完成其他部份並發出提示，等待藥水裝置後，再執行藥水測試。
2. 血液迴路管預沖結束後，將血液迴路管對接並接外管後壓下“←”確認鍵  ，機器才會執行第二階段的脫水測試及管路密閉漏血測試。	此時血液迴路管應正確連接，保護罩夾與生理食鹽水夾要在打開狀態。
三、開始透析	
1. 當機器版面出現  ，代表自我測試完成，可以上機進行血液透析治療，血液引出後壓  鍵，變成  鍵，即進入血液透析治療。	自我測試完成，面板會出現待機省水模式，當準備上機時，則壓  鍵，即恢復正常透析液流速。
2. 脫水設定  ：在準備中設定總脫水量，壓下  再壓  鍵出現透析數據設定，並依開始值按“±”鍵設定總脫水量。	最小脫水量：50 ml/h 最大脫水量：4000 ml/h
3. 時間設定  ：在準備中設定治療時間，壓下  再壓  鍵出現透析數據設定，並依開始值按“±”鍵設定治療時間。	
4. 肝素設定  ：在準備中設定肝素劑量，壓下  再壓  鍵出現透析數據設定，依需求按“±”鍵設定所要的劑量及關閉肝素時間，若病人治療中無使用抗凝劑則先壓  鍵再壓確認鍵。	給予肝素初劑量，則壓面板  鍵。
5. 血液流速設定：Blood Pump 每壓一下“+”，則血液流速上升 10cc/min，壓住不放則快速上升最高 400 cc/min；每壓一下“-”，則血液流速下降 10 cc/min，壓住不放則快速下降最低 0 cc/min。	Blood Pump 開關亮燈時為關掉，若開關燈滅掉時，則為打開。

主題名稱	血液透析機 B.Braun Dialog+操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-F06	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/5

步驟	說明
四、結束透析	
1. 壓下機鍵  ，將血液趕回病人體內再拔除穿刺針，並將血液迴路管互接及靜脈腔上段的管路反摺，藍色外管以塞子塞住。	
2. 壓排空人工腎臟鍵  ，螢幕提示”排空透析器嗎？”按確認“  ”，將透析器藍端接頭連接至沖洗橋上機器會自動排空透析器  ，待排空後將紅端連接至沖洗橋上  。	
3. 排空 B 粉桶：排空人工腎臟後，壓  鍵，B 粉桶排空水份，接回 A 液接頭。	
五、機器消毒	
1. 班消：壓程序選擇鍵  ，選擇消毒鍵，螢幕左上方壓  鍵。	消毒完成後機器會自行跳至自我測試的模式。
2. 末班消毒：壓程序選擇鍵  ，選擇消毒鍵，螢幕左上方壓  鍵後再壓  進入自動開機畫面壓下啟動，此時機器執行末班消毒並自動關機，且明天在設定時間自動開機。	

（三）異常簡易故障排除方法

- 1.微量空氣警示：空氣監測器監測靜脈迴路管的腔室有微量空氣，則按壓面板之  鍵，利用調升靜脈迴路管腔室的液面排除微量空氣，再按壓靜音鍵兩次消除警示。
- 2.大量空氣警示：空氣監測器監測靜脈迴路管有大量空氣，則按壓  鍵，使用體外循環方式，並打開生理食鹽水管夾，使血液迴路管充滿生理食鹽水，排除血液迴路管的空氣，再按壓  鍵回到透析模式。
- 3.漏血警示：透析機內部遠紅外線監測透析液的通透亮度低於標準範圍，則按壓靜音鍵兩次消除警示，如多次無法排除請通知醫工人員處理。
- 4.靜脈壓力警示：監測靜脈壓力低於或高於安全範圍，則需檢查病人及管路狀態，在排除病人及管路問題後壓下“”確認鍵，恢復透析治療，如無法恢復透

主題名稱	血液透析機 B.Braun Dialog+操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-F06	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/5

析，則通知醫工人員處理。

（四）清潔保養注意事項

- 1.每班透析結束後以0.05%漂白水擦拭血液透析機，壓下  鍵，擦拭螢幕10秒
不會因擦拭螢幕而改變設定。
- 2.班與班以熱消毒血液透析機管路。
- 3.每天最後一班結束透析，以4%的過醋酸消毒血液透析機管路。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- （一）血液透析機使用說明評核表 B.Braun Dialog+（編號：A31000-Q18-F-F04）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	血液透析機 B.Braun Dialog+操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-F06	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
110.08.03	1.0	新制定。	110 年 07 月 14 日護理長會議通過；110 年 08 月 03 日督導會議通過公布。
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.04.06	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	