

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	連線型血糖機 Bionime Rightest (GM700Pro II)操作標準 Bionime Rightest (GM700Pro II) Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B27	制定者	N14 李美樺	公布日期	108 年 11 月 18 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 1.4 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解血糖機之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法、清潔保養注意事項與品管測試操作法。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

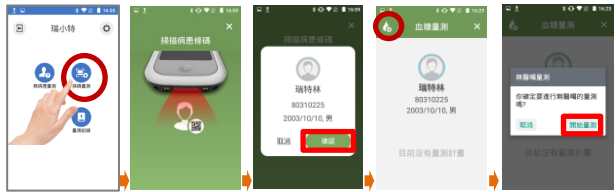
(一) 廠牌規格：Bionime Rightest (GM700 ProII)如圖一。



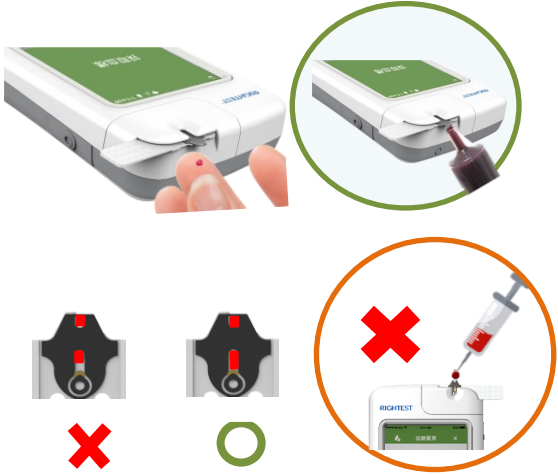
圖一

主題名稱	血糖機 Bionime Rightest (GM700Pro II)操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B27	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	2/10

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 掃描員工條碼進行登入。 登入一次可量測多位病患。	
2. 每次操作前請先確認是否為自己的帳號，登入成功後即可進入主選單。	
3. 掃描病患手圈 (1) 儘量讓手圈條碼平整進行掃描。 (2) 由遠而近是較好的掃描方式。 (3) 手圈條碼若不清晰時，請申請重新印製。	
4. 執行血糖量測 (1) 核對醫囑 A. 《有 HIS 醫囑情況》 執行前，當班人員必須在 HIS 系統先核對醫囑確認正確，血糖機才會帶入醫囑訊息，方可進行血糖量測。 B. 《無 HIS 醫囑情況》 若病患發生緊急情況，依口頭醫囑則須點選新增量測。檢測結果不自動回傳至 HIS 系統，報告資料儲存在血糖機內，由護理師將檢測結果輸入 HIS 系統。	《有 HIS 醫囑》  《無 HIS 醫囑》 
(2) 從試片罐中取出一片試片，取出後立即關緊試片罐。	
(3) 請以三指方式拿持試片，並依照試片指示符號方向，插入試片。	 

主題名稱	血糖機 Bionime Rightest (GM700Pro II)操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B27	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	3/10

步驟	說明
(4)採血：待血糖機螢幕出現”採血字樣”才可進行採血，請將機身傾斜，由上而下，以試片前端接觸血樣。僅需 0.75 微升血量聽到”嗶“一聲才移開採血處，螢幕出現倒數計時模式，5 秒鐘後將顯示量測結果。 ※注意事項 A. 採血量請一次完成，不可二次補血。 B. 禁止從針筒將血樣打入試片口。	 不可二次補血 勿將血樣滴在試片口
(5)量測結果紀錄 A. 數值於正常值範圍之內，以黑字顯示；數值於非正常值範圍之內，以紅字顯示。 B. 量測結果會依循醫囑自動帶入時段，如需異動可至時段處進行修改。 C. 可於量測結果頁面備註訊息，帶入護理紀錄中。 D. 血糖量測超過危急值範圍（如下），與血糖量測值顯示“Lo”或“Hi”，出現警示文字，請與醫師聯絡，依醫囑進行相關處置（如：送檢驗科複驗），以維護病人安全。 ※危急值範圍 成人血糖值>600mg/dL 或<50mg/dL 新生兒血糖值>300mg/dL 或<30mg/dL	檢測結果可進行備註  ※血糖機可顯示的數據範圍為： 10~600mg/dl(0.6~33.3mmol/l)
(6)測完血糖，請迴旋往左上角移除試片。	 往左上角提起

主題名稱	血糖機 Bionime Rightest (GM700Pro II)操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B27	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	4/10

步驟	說明
5. 資料上傳 (1)請務必於量測結果頁面，按壓打勾鍵確認上傳，資料才會自動傳送至 HIS 系統。 (2)如有量測結果未上傳至 HIS 系統，而後再執行同一位病患量測，在醫囑選擇畫面，會顯示上一筆未上傳的量測資料，請點選該筆資料，並上傳至 HIS 系統。	  量測時間 病患資訊 捨棄資料 被捨棄的資料只存於血糖機 日期 醫囑時間 血糖值 Breakfast AC 101 102

(三) 異常簡易故障排除方法

故障代碼	問題說明與排除方式
1001	試片已受損，請使用新試片進行檢測。
1002	血糖機故障，請將血糖機送修。
1003	信號傳輸中斷，請重新進行檢測。
1004	血樣不足，請使用新試片進行檢測
1005	血糖試片錯誤，請重新插入試片;如該狀況仍出現，請將血糖機送修
1007	環境溫度超出儀器操作範圍，待溫度回至儀器操作範圍後，再重新進行檢測。
1008	血樣或品管液過早取樣，請使用新試片進行檢測
1010	量測閒置時間過久，請重新進行檢測。
1012	試片型號錯誤，請使用正確試片型號

(四) 清潔保養及注意事項

1. 血糖機和測試片須避免有灰塵、水或其他液體。清潔時使用酒精棉片擦拭螢幕後，務必再以濕布將酒精擦掉，最後以乾布擦乾。



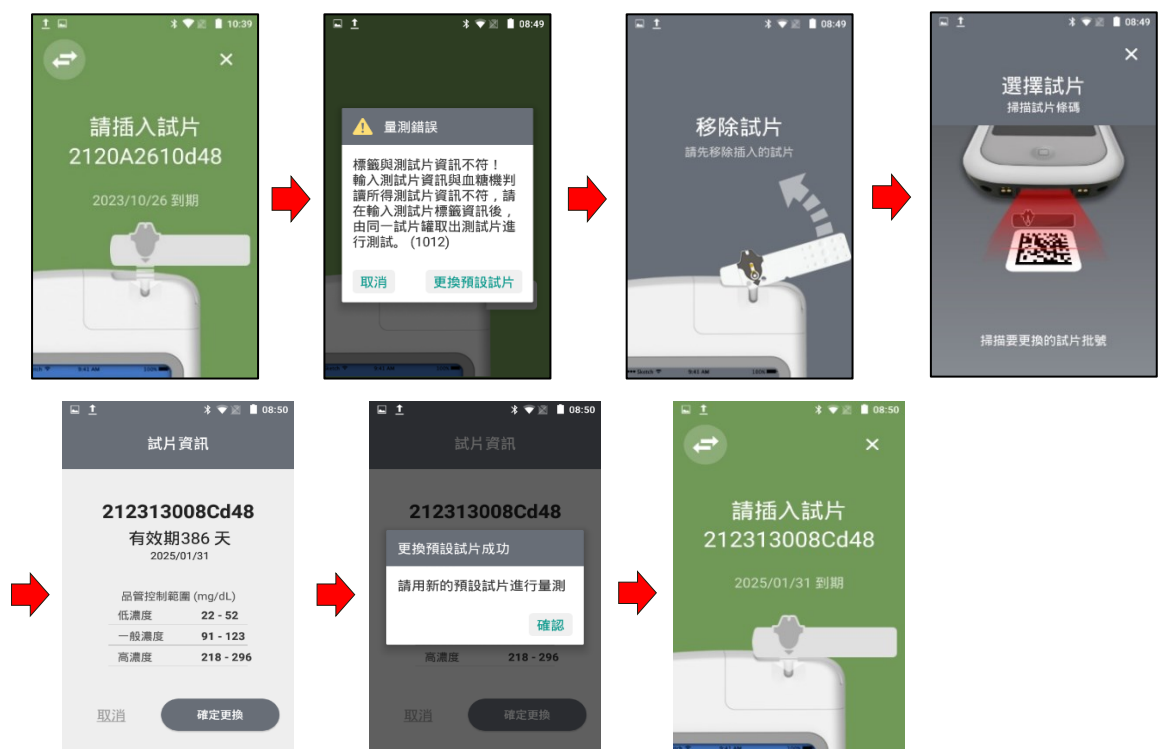
血糖測試座清潔



部件清潔

主題名稱	血糖機 Bionime Rightest (GM700Pro II) 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B27	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	5/10

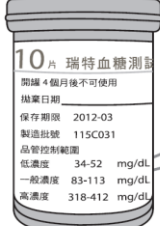
2. 試片保存有效期限為開封後12個月，未開封則以瓶身標示日期為主；若開封有效日期期短於瓶身標示日期，以最短日期為主，開封後請於瓶身標示起訖日。
3. 每日需進行血糖機品管監控測試。
4. 本血糖機只適於全血，勿用血漿或血清進行量測。
5. 採血時務必適量的血液，只要血量可充滿觀察窗即可。
6. 血球容積比過高或過低，會造成血糖值誤差，如：血球容積比超過70%或低於20%。
7. 病人若有脫水現象血糖值亦會受影響。
8. 偵測到非預設批號試片，啟動選擇更換試片批號，執行步驟如下：「請插入試片」頁面使用非預設試片→出現「量測錯誤」視窗→點選「更換預設試片」→在「移除試片」頁面，取出血糖機上的試片→在選擇試片頁面「掃描試片」，掃描欲更換的試片→出現「試片資訊」頁面，點選「確定更換」→顯示「更換預設試片成功」→點選「確認」→出現「請插入試片」並顯示新的試片批號，此時試片已更改完成。



主題名稱	血糖機 Bionime Rightest (GM700Pro II)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B27	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	6/10

(五) 血糖機品管測試操作法

1. 測試頻率：每日需於**02:00**後進行品管液高、低兩濃度檢測使用葡萄糖去氫酶品管液（高、低）濃度進行品管測試。
2. 操作人員：由單位護理長考核授權始得操作，每年進行能力評估，合格者使得授權血糖機。
3. 品管液保存：
 - (1)保存條件：溫度2~30℃
 - (2)有效期限：開封後3個月，未開封則以瓶身標示日期為主；若開封有效日期短於瓶身標示日期，以最短日期為主，開封後請於瓶身標示起訖日。
4. 品管測試環境條件：操作適用溫度6~44℃
5. 品管控制範圍：

	品管控制範圍		mg/dL	mmol/L
	低濃度		37-57	2.1-3.2
	一般濃度		114-154	6.3-8.6
	高濃度		318-430	17.7-23.9

6. 血糖機品管測試操作方法，操作前請確認品管液在效期三個月內及試片在效期十二個月內，另禁止將品管液直接滴落試紙上，操作步驟如下說明：

(1) 掃描員工條碼 	(2) 進入主選單→選取「品管控制」 	(3) 掃描識別品管 
(4) 確認品管液點選「開始測試」 	(5) 插入試片 	(6) 採取品管液，輕搖品管液，滴一滴在瓶蓋上 

主題名稱	血糖機 Bionime Rightest (GM700Pro II)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B27	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	7/10

(7)將結果上傳至醫院 HIS 系統



7. 血糖機品管作業操作說明-臨床人員，請特別注意：

- (1)異常回覆：當品管異常時，護理長填寫處理意見並進行重測試或進行請修
- (2)品管鎖定（逾期進行品管測試、品管不通過），無法執行檢測及資料檢視。
若僅有一種濃度品管不通過，僅需執行未通過品管濃度即可。
- (3)報表查詢：每日護理長、血糖機負責督導、檢驗科急診檢驗組長或其職務指定代理須進行簽核單位血糖機品管數據資料，進行了解。檢驗科急診檢驗組長或其職務指定代理人，每月彙整品管資料計算品管異常率、品管異常原因分析並填寫品管執行狀況，連同每月品管資料送交檢驗科品管組、品質主管審查。

（六）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- （一）血糖機使用說明評核表 Bionime Rightest (GM700Pro II)（編號：A31000-Q18-F-B18）。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

主題名稱	血糖機 Bionime Rightest (GM700Pro II)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B27	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	8/10

七、附件

（一）血糖機 Bionime Rightest (GM700Pro II)品管測試教育訓練。

主題名稱	血糖機 Bionime Rightest (GM700Pro II)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B27	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
108.11.18	1.0	新制定。	108 年 11 月 13 日 護理長會議通過； 108 年 11 月 18 日 督導會議通過公布。
109.06.04	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.04.01	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.09.05	1.1	第三項第二目步驟 4.(5)D.內容說明修正。	112 年 08 月 03 日 照護標準組會議通過；112 年 08 月 09 日 護理長會議通過；112 年 09 月 05 日 督導會議通過公布。
113.01.09	1.2	1. 第三項第五目之 2.內容說明修正。 2. 第三項第五目之 7.新增內容說明(4)。	112 年 12 月 07 日 照護標準組會議通過；112 年 12 月 20 日 護理長會議通過；113 年 01 月 09 日 督導會議通過公布。
113.04.16	1.3	1. 主題名稱修訂。 2. 第三項第二目步驟及說明內容說明修正。 3. 第三項第四目之 8.內容說明修正。 4. 第三項第五目之 1.6.內容說明修正。 5. 刪除第三項第五目之 7.(1)內容說明。	113 年 04 月 11 日 照護標準組會議通過；113 年 04 月 16 日 督導會議通過公布。
114.02.06	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	血糖機 Bionime Rightest (GM700Pro II)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B27	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
115.01.06	1.4	第三項第五目之 6.內容修正。	114 年 12 月 04 日照護標準組會議通過;114 年 12 月 10 日護理長會議通過;115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。