

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	條碼輸血作業標準 Barcode blood transfusion operation				
編號	A31000-Q02-W-D07	制定者	戴佳月	公布日期	115 年 07 月 07 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 07 月 07 日
版本/總頁數	第 1.0 版/14 頁	審查者	黃麗華	檢閱日期	115 年 07 月 07 日

一、目的

旨在提供護理師操作步驟指引，採用掃描條碼方式執行輸血作業，以確保病人輸血安全。

二、範圍

所有使用條碼輸血作業系統之護理單位。

三、說明


(一) 醫師開立備/輸血醫囑後，備血及領血流程依據護理部_A31000-Q02-W-D02_備/輸血及領用血液輸血作業標準執行。

(二) 護理師接獲血品後，條碼輸血作業操作步驟如下：

1. 輸血作業登入

順序	操作步驟	系統畫面	備註
1-1	登錄中山附醫 APP		登錄方式有兩種，分別說明如下： (1)輸入 HIS 帳號、密碼，點選「登入」。 (2)點選員工卡 NFC 感應：將員工識別證放置於工規行動手機背面上半部進行感應登錄。
1-2	點選行動護理		

主題名稱	條碼輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D07	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/14

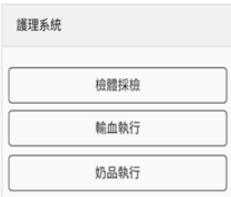順序	操作步驟	系統畫面	備註
1-3	點選輸血執行		
1-5	進入輸血作業選單		

2. 簽收

順序	操作步驟	系統畫面	備註
2-1	點選簽收		
2-2	進入血品簽收介面		
2-3	掃描醫囑號條碼		(1) 醫囑號條碼位於血袋下方  血袋醫囑號條碼

主題名稱	條碼輸血作業標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q02-W-D07	版本	第 1.0 版
		頁碼/總頁數	3/14

順序	操作步驟	系統畫面	備註																																				
2-4	掃描血品號碼	🏠 血品簽收 掃描步驟：1.醫囑號碼->2.血品號碼 請掃描 醫囑號碼/血品號碼 醫囑號：224586189 血品名稱：Leucocyte-Poor RBC 已掃描血品單位：2U <table><thead><tr><th>血品號碼</th><th>回傳狀態</th><th>數量</th></tr></thead><tbody><tr><td>0000000001 0000000002</td><td>已簽收</td><td>2</td></tr></tbody></table>	血品號碼	回傳狀態	數量	0000000001 0000000002	已簽收	2	(1) 單一輸血醫囑，血庫出庫血品可掃描多袋血品號碼執行簽收。 (2) 掃描血品號碼，淺粉色訊息框會呈現該血品之醫囑號；逐一掃描血品號碼時，「已掃描血品單位」數據會累加。 醫囑號：127328030 血品名稱：Platelet concentrate 已掃描血品單位：5U <table><thead><tr><th>血品號碼</th><th>回傳狀態</th><th>數量</th></tr></thead><tbody><tr><td>0999999995</td><td>已簽收</td><td>1</td></tr><tr><td>0999999997 0999999996</td><td>已簽收</td><td>2</td></tr><tr><td>0999999999 0999999998</td><td>已簽收</td><td>2</td></tr></tbody></table> (3) 掃描血品號碼後，「血品號碼」欄呈現該血品號碼、「回傳狀態」欄呈現『已簽收』，即完成血品簽收。 (4) 其他警示視窗畫面(見下圖)： • 血品已簽收時，回傳狀態會呈現血品已被簽收與簽收人員姓名。 <table><thead><tr><th>血品號碼</th><th>回傳狀態</th><th>數量</th></tr></thead><tbody><tr><td>0999999998</td><td>血品已被簽收(簽收人員:戴)。</td><td></td></tr></tbody></table> • 血品號碼無法讀取。 <table><thead><tr><th>血品號碼</th><th>回傳狀態</th><th>數量</th></tr></thead><tbody><tr><td>No Read</td><td>無此血品資訊</td><td></td></tr></tbody></table> • 血品號碼非該筆醫囑號時，回傳狀態會呈現無此血品資訊。 <table><thead><tr><th>血品號碼</th><th>回傳狀態</th><th>數量</th></tr></thead><tbody><tr><td>0444040003</td><td>非醫囑號:127328030的血品，不可簽收</td><td></td></tr></tbody></table>	血品號碼	回傳狀態	數量	0999999995	已簽收	1	0999999997 0999999996	已簽收	2	0999999999 0999999998	已簽收	2	血品號碼	回傳狀態	數量	0999999998	血品已被簽收(簽收人員:戴)。		血品號碼	回傳狀態	數量	No Read	無此血品資訊		血品號碼	回傳狀態	數量	0444040003	非醫囑號:127328030的血品，不可簽收	
血品號碼	回傳狀態	數量																																					
0000000001 0000000002	已簽收	2																																					
血品號碼	回傳狀態	數量																																					
0999999995	已簽收	1																																					
0999999997 0999999996	已簽收	2																																					
0999999999 0999999998	已簽收	2																																					
血品號碼	回傳狀態	數量																																					
0999999998	血品已被簽收(簽收人員:戴)。																																						
血品號碼	回傳狀態	數量																																					
No Read	無此血品資訊																																						
血品號碼	回傳狀態	數量																																					
0444040003	非醫囑號:127328030的血品，不可簽收																																						
2-5	血品簽收完成	🏠 血品簽收 請掃描血品號碼 醫囑號：47777122 血品名稱：Packed RBC 已掃描血品單位：1U <table><thead><tr><th>血品號碼</th><th>回傳狀態</th><th>數量</th></tr></thead><tbody><tr><td>0241234565</td><td>已簽收</td><td>1</td></tr></tbody></table>	血品號碼	回傳狀態	數量	0241234565	已簽收	1	(1) 結束血品簽收階段後，若要緊接進行血品核對時，則點選登入者姓名後方向下箭頭處(咖色方框處)，即出現下拉選單，點選『輸血作業』返回輸血作業。																														
血品號碼	回傳狀態	數量																																					
0241234565	已簽收	1																																					

主題名稱	條碼輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D07	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/14

3. 核對/輸血

順序	操作步驟	系統畫面	備註
3-1	點選 核對/輸血		(1) 血品核對/輸血階段須採雙人覆核。 (2) 進行核對/輸血前，應有另一位護理師與主護共同進行雙人覆核。
3-2	掃描 病人手圈條碼		(1) 掃描病人配戴之病人手圈條碼。
3-3	進行病人辨識 資料正確 按『確定』		(1) 採用二種以上方法進行病人辨識(護理部_A31000-Q02-W-A09_病人辨識作業標準)。
3-4	掃描醫囑號 條碼	 	(1) 醫囑號條碼位於血袋下方
3-5	掃描 血品號碼		(1) 掃描血品號碼時，系統自動檢視登入者身分。若非該病人主護登入系統時，會出現警示視窗且無法進行血品核對/輸血。 「https://mdevws.csh.org.tw」 網頁指出： 非主護人員，無法核對血品 確定

主題名稱	條碼輸血作業標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q02-W-D07	版本	第 1.0 版
		頁碼/總頁數	5/14

順序	操作步驟	系統畫面	備註
3-5 (續)	掃描 血品號碼		(2) 單一輸血醫囑：輸血量小於等於 4U 時，須逐袋掃描血品號碼執行核對/輸血。 (3) 輸血量大於等於 5U 時，可掃描多袋血品號碼執行核對/輸血，刷畢血品號碼後，點選『確認核對』
3-6	雙人檢視 檢核項目 資料正確性		(1) 由主護與覆核者共同檢視血袋外觀資訊與檢核項目系統資訊，應正確一致。 (2) 檢核項目為「病人血型」、「血品血型」、「病人血型」、「血液成分」、「血量」、「血品外觀正常」。
3-7	勾選資料正確 之檢核項目 按『完成』		(1) 單一輸血醫囑 - 輸血量小於等於 4U 時，須逐袋掃描血品號碼執行檢核。 - 輸血量大於等於 5U 時，可掃描多袋血品號碼執行檢核。

主題名稱	條碼輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D07	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/14

3-8	雙人覆核		覆核登錄方式有兩種，分別說明如下： (1) 自行鍵入：點選身分證號與密碼欄位，分別輸入覆核者身分證號與 HIS 密碼後，按下『覆核』。 (2) 點選 NFC 感應：員工識別證放置於工規行動手機背面上半部進行感應登錄。
3-9	雙人覆核完成		(1) 血品號碼資訊欄右下角呈現覆核人員姓名(圖片紅框處)
3-10	量測病人輸血前生命徵象		
3-11	掛上血袋		
3-12	鍵入輸血前生命徵象按『存檔』		
3-13	狀態呈現患者輸血中		

主題名稱	條碼輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D07	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	7/14

4. 輸血後回報：HIS 住院護理系統或行動護理-輸血作業皆可進行。

(1) 行動護理-輸血作業：輸血回報方式說明如下：

順序	操作步驟	系統畫面	備註
4-1	進入輸血作業 點選 輸血後回報		
4-2	掃描 病人手圈條碼		(1) 掃描病人配戴之病人手圈條碼。
4-3	進行病人辨識 資料正確 按『確定』		(1) 採用二種以上方法進行病人辨識(護理部_A31000-Q02-W-A09_病人辨識作業標準)。
4-4	進入掃描 血品號碼介面		
4-5	掃描血品號碼		(1) 單一輸血醫囑 • 輸血量小於等於 4U 時，須逐袋掃描血品號碼執行輸血回報。 • 輸血量大於等於 5U 時，可掃描多袋血品號碼執行輸血回報。

主題名稱	條碼輸血作業標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q02-W-D07	版本	第 1.0 版
		頁碼/總頁數	8/14

順序	操作步驟	系統畫面	備註
4-6	點選輸血反應 與鍵入輸血後 生命徵象 按『存檔』		(1) 無輸血反應： A. 點選『無』，往上滑動將畫面移至生命徵象欄位；鍵入輸血後量測數據後，按『存檔』。 B. 輸血後：狀態呈現「完成輸血」、輸血反應呈現「無」。 
4-6 (續)	點選輸血反應 與鍵入輸血後 生命徵象 按『存檔』		(2) 有輸血反應： A. 點選『有』，進入輸血反應紀錄畫面，鍵入通報醫師代碼、點選使用藥物種類及輸血反應類型後，按『確定』。  B. 系統自動返回生命徵象欄位畫面，此時鍵入輸血後量測數據後，按『存檔』。  C. 輸血後：狀態呈現「完成輸血」、輸血反應呈現「有」。

主題名稱	條碼輸血作業標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q02-W-D07	版本	第 1.0 版
		頁碼/總頁數	9/14

順序	操作步驟	系統畫面	備註
			
4-7	材料記帳		(1) 有使用材料(耗材)： A. 按『材料記帳』，進入材料清單選擇並確認使用材料之品項與數量後，按『材料記帳存檔』。  B. 出現材料附加成功訊息視窗，按『確定』後，系統自動返回輸血作業清單。  (2) 無使用材料(耗材)：按『無材料返回輸血作業』，系統自動返回輸血作業。

(三) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。


主題名稱	條碼輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D07	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	10/14

四、使用表單

(略)


五、流程圖

(一) 血品簽收

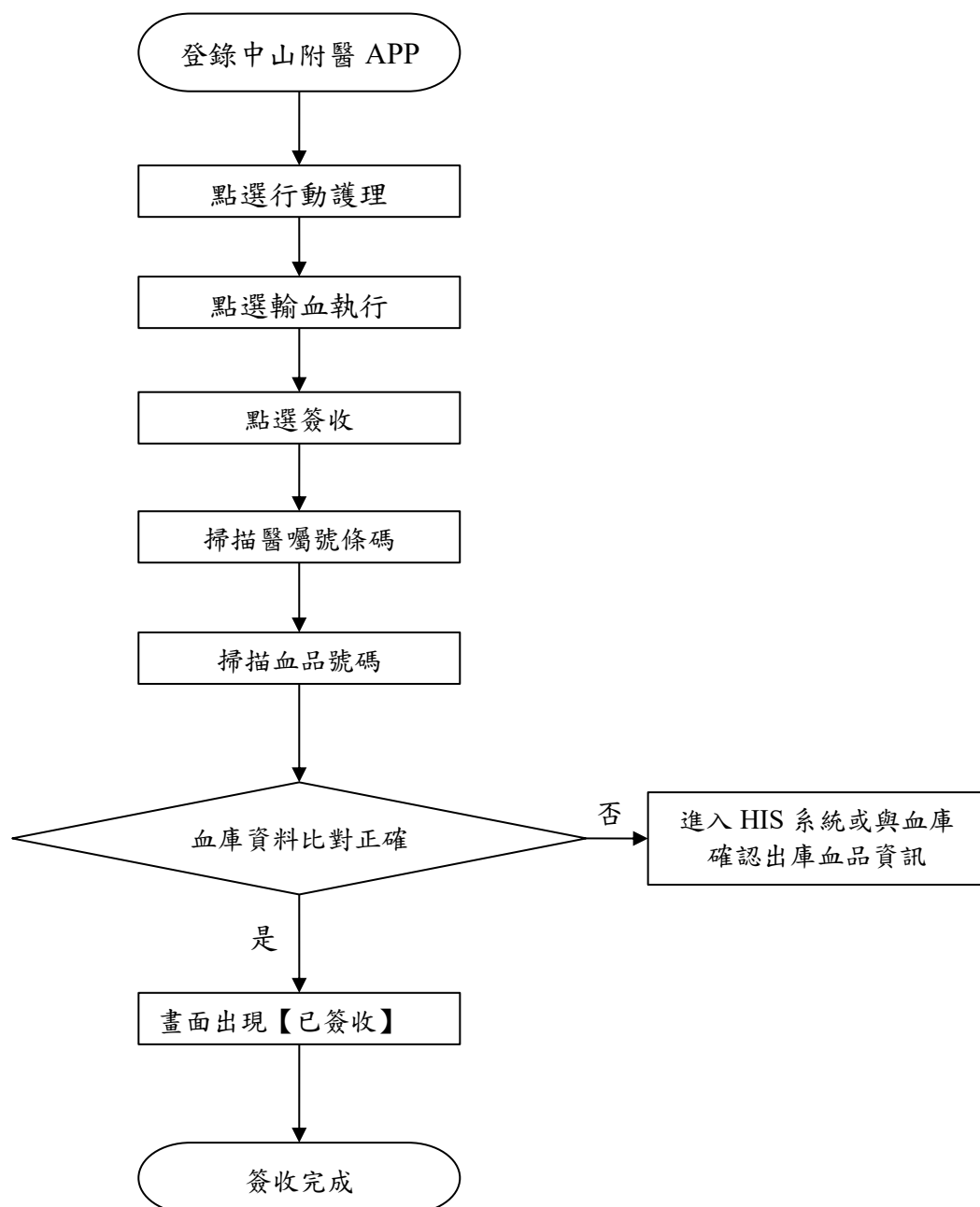


主題名稱	條碼輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D07	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	11/14

(二) 核對/輸血

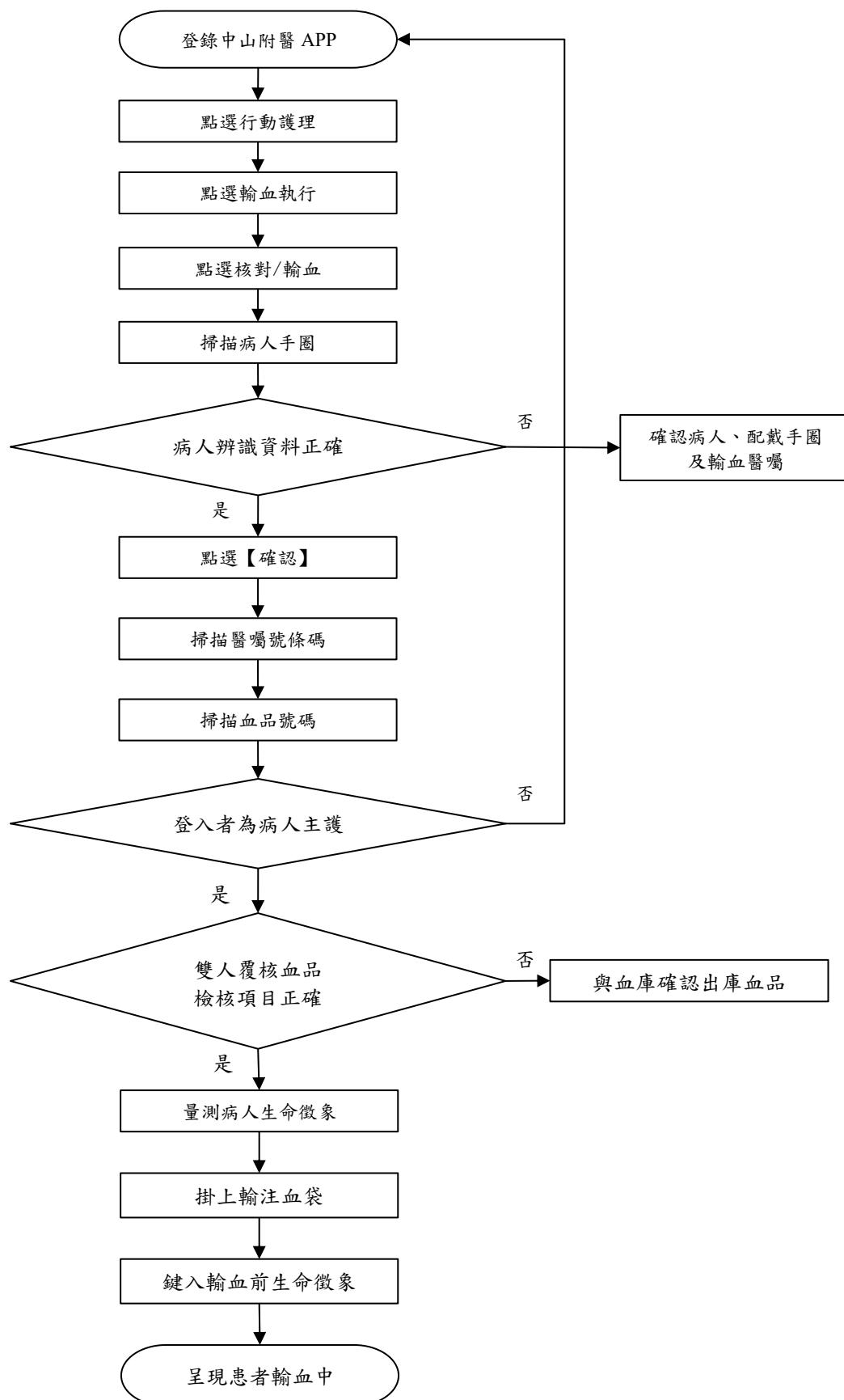

主題名稱	條碼輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D07	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	12/14

(三) 輸血後回報

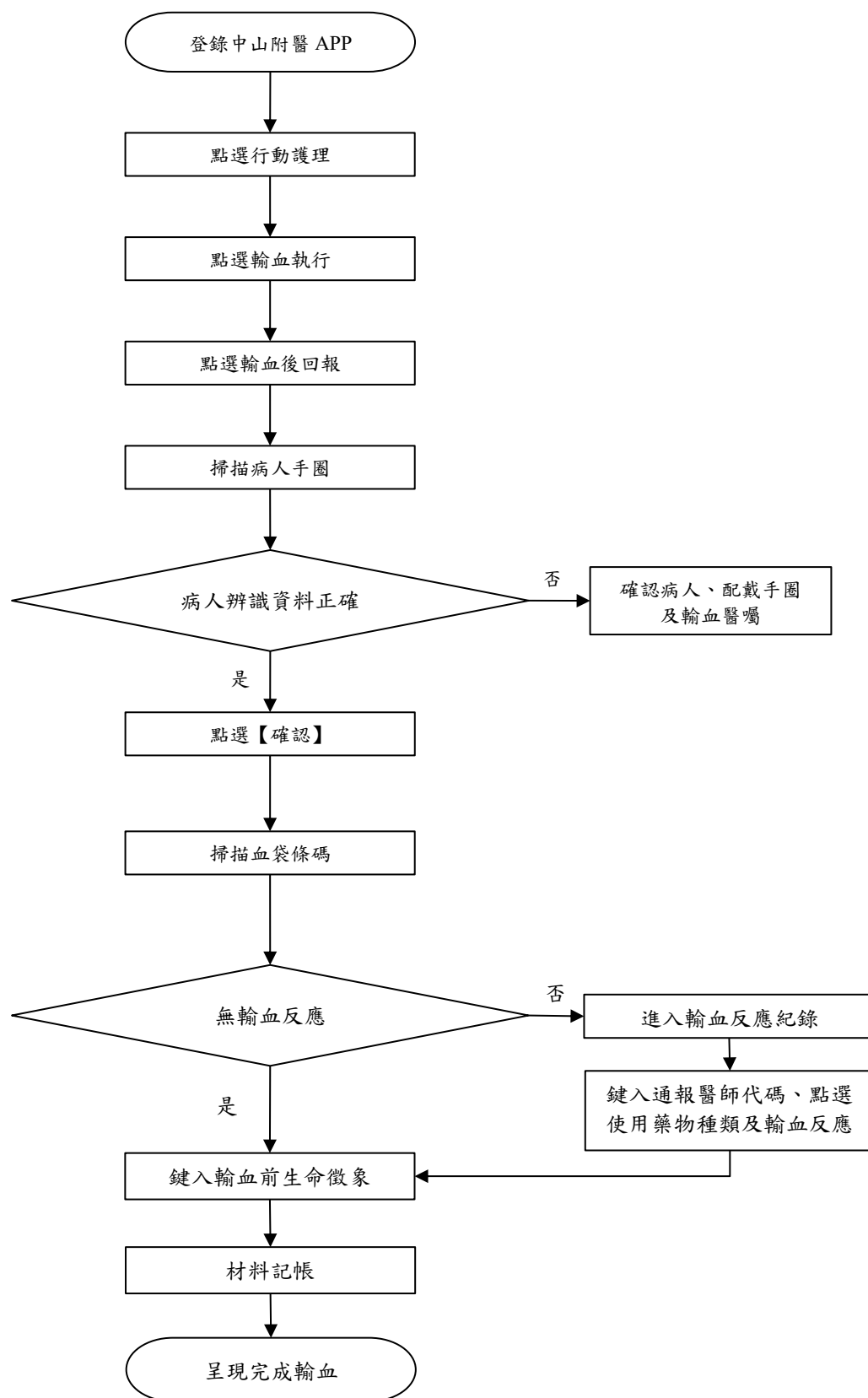

主題名稱	條碼輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D07	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	13/14

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

