

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	檢體採檢、送檢及退檢須知 Guide for Specimen Collection, Transportation and Rejection				
編號	A31000-Q02-W-I01	制定者	R14 卓瑞萍	生效日期	88 年 11 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 5.7 版/12 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員正確執行各項檢體採檢、送檢及退檢之前中後作業規範，了解正確的採檢試管、採血量、報告時間與注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 住院病人流程

護理人員執行各項採檢時，需核對電腦 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱，核對檢驗單上之姓名、床號、病歷號及檢驗項目，依醫囑中採檢項目取出正確之採檢容器（電腦 HIS 護理系統處方圖示或請見檢驗科檢驗手冊），醫師開立檢驗醫囑時已一併產生「試管號」，護理人員核對檢驗醫囑正確後於核對狀態核簽「正確」，手動印出檢驗條碼標籤（如圖一），護理人員於採檢容器上貼檢驗條碼標籤。用物置於治療盤或治療車上，攜至病人單位，以兩種以上方式辨識病患並再次核對採檢容器上之檢驗條碼標籤是否正確。護理人員採集檢體後，確認檢體上貼病人檢驗條碼標籤並核對檢驗單病人資料正確，於檢驗單上蓋章，將檢體及檢驗單核對後放入雙層檢體袋，至檢驗檢體傳送系統，逐筆以條碼器刷入每一個預送檢的檢體條碼，按完成後產生總包條碼貼於袋外，再放入非透明之檢體盒內，通知傳送人員運送檢體（請見 A31000-Q02-W-I02_一般檢體運送原則）。


主題名稱	檢體採檢、送檢及退檢須知	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-I01	版本	第 5.7 版	頁碼/總頁數	2/12



處方名稱	單位	執行量	途徑	頻率	預定時間	實際時間	核對狀態	執行狀態
CBC-IC	1.00	次	STAT	06/22 20:41	01/09 23:14	正確	已執行	
WBC-d	1.00	次	STAT	06/22 20:41	01/09 23:14	正確	已執行	
glucose	1.00	次	STAT	06/22 20:41	01/09 23:14	正確	已執行	
Na Clod	1.00	次	ONCE	11/22 15:37	01/09 23:14	正確	已執行	
K Pot	1.00	次	ONCE	11/22 15:37	01/09 23:14	正確	已執行	
CBC-IC	1.00	次	ONCE	11/22 15:37	01/09 23:14	正確	已執行	
WBC-d	1.00	次	ONCE	11/22 15:37	01/09 23:14	正確	已執行	
Na Clod	1.00	次	ONCE	12/14 14:05	01/09 23:14	正確	已執行	
K Pot	1.00	次	ONCE	12/14 14:05	01/09 23:14	正確	已執行	
Procalc	1.00	次	ONCE	12/14 14:05	01/09 23:14	正確	已執行	
APTT	1.00	次	ONCE	12/14 14:05	01/09 23:14	正確	已執行	
Prothrom	1.00	次	ONCE	12/14 14:05	01/09 23:14	正確	已執行	
NT-pro	1.00	次	ONCE	12/14 14:05	01/09 23:14	正確	已執行	
P Throm	1.00	次	ONCE	12/14 14:05	01/09 23:14	正確	已執行	
Ca Clod	1.00	次	ONCE	12/14 14:05	01/09 23:14	正確	已執行	
Blood	1.00	次	ONCE	12/14 14:05	01/09 23:14	正確	已執行	
CBC-IC	1.00	次	ONCE	12/14 14:05	01/09 23:14	正確	已執行	
glucose	1.00	次	ONCE	12/14 14:05	01/09 23:14	正確	已執行	
Blood culture	1.00	次	ONCE	12/14 14:05	01/09 23:14	正確	已執行	
WBC differential count	1.00	次	ONCE	12/14 14:05	01/09 23:14	正確	已執行	

圖一

(二) 退檢或檢體不足時，HIS 護理系統於檢驗項目會以粉紅底黑字「退檢」呈現（如圖二），此時檢驗科會以電話方式通知護理人員，雙方需核對退檢檢體之姓名、床號、病歷號、檢驗類別（生化、血液、血清）、檢驗種類支數（綠頭 PST 管/1 支）並瞭解退檢原因，最後取得雙方的員工代號以示完成電話告知，之後重新依據檢體採檢標準完成檢體採檢，放入雙層檢體袋，通知傳送人員運送檢體。

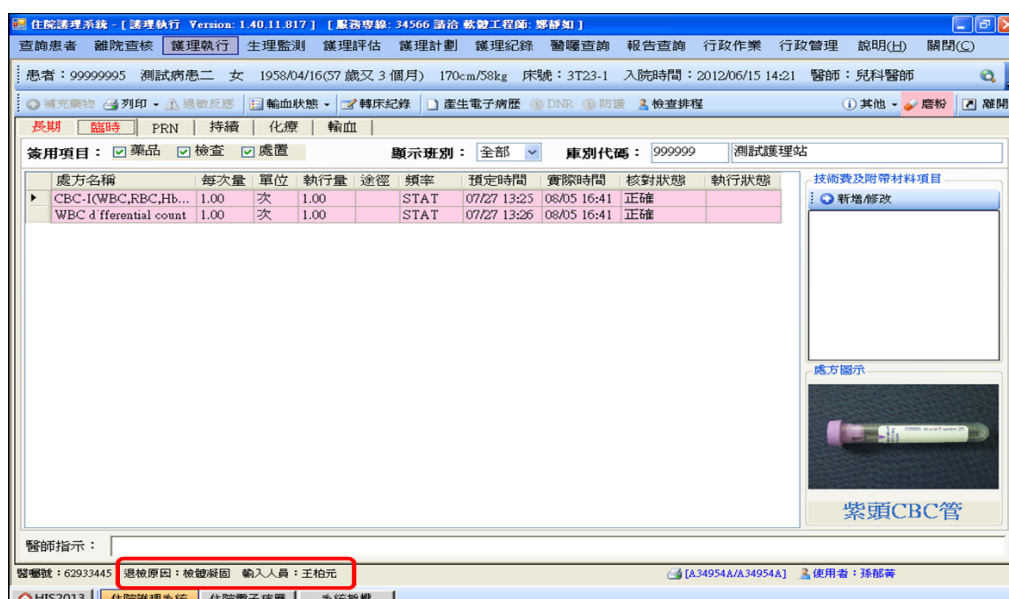

處方名稱	單位	執行量	途徑	頻率	預定時間	實際時間	核對狀態	執行狀態
CBC-IC(WBC,RBC,Hb...	1.00	次	STAT	07/27 13:25	08/05 16:41	正確	已執行	
WBC differential count	1.00	次	STAT	07/27 13:25	08/05 16:41	正確	已執行	

圖二

(三) HIS 護理系統於檢驗項目新增檢驗報到稽催功能（如圖三）

檢驗項目已到預定時間未核對：藍字「未核」

檢驗項目已到預定時間未執行：藍字「未執」

檢驗項目已執行檢驗科尚未報到：紅字「待報」

檢驗項目尚未執行檢驗科已報到：綠底黑字「待執」

檢驗項目退檢：粉紅底黑字「退檢」

主題名稱	檢體採檢、送檢及退檢須知	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-I01	版本	第 5.7 版	頁碼/總頁數	3/12

住院護理系統 - [工作清單 Version: 1.6.0.59] [服務專線: 83312 請洽 軟體工程師: 鄭靜如]

查詢患者 離院查核 護理執行 生理監測 護理評估 護理計劃 護理紀錄 醫囑查詢 報告查詢 行政作業 行政管理 說明(H) 關閉(C)

患者: 99999998 測試病患五 女 2014/10/01(1 歲又 3 個月) 165cm/64kg 床號: 3T37-2 入院時間: 2011/03/31 15:25 醫師: 復健科醫師

調閱病歷 營養科回覆 產生電子病歷

請輸入查詢條件: 護理站 TEST 護理人員: P032 孫郁菁 查詢 列印

紀錄日期: 105/01/08 紀錄班別: 小夜

輸血	床號	病歷號	姓名	入評	計劃	衛教	紀錄	檢驗	跌評	瘡評	營養	出準	約束	藥評	心理
	3T22-1	99999999	測○患者	未	評	EER	未	待報	未	未	未評估	未評估			
	3T22-2	99999994	測試病患一	未	劃	EER	未	未核	跌	未	未評估	未評估			
	3T23-1	99999995	測試病患二	暫	劃		未	未執		未	已評估	高危險			
輸血	3T23-2	99999996	測試病患三	暫	評	評	未	待執	未	未	已評估	未評估			
	3T37-1	99999997	測試病患四		評	缺	未	退檢	未	瘡	已評估	高危險			
	3T37-2	99999998	測試病患五	未	劃	EER	未	待報	未	未	已評估	高危險			

圖三

(四) 生化室檢驗項目 (請依最新版檢驗科檢驗手冊或公告為主)

檢驗項目	試管	須抽血量(ml)	可查詢報告時間	注意事項
緊急生化	綠色頭 	3	50 分	檢驗單上需標註緊急
血糖	灰色頭 	1.5-2	急作 50 分 非急作 6 小時	請空腹 12 小時 可適量飲用少量開水
一般生化	綠色頭 	5	6 小時	Lipase 檢體須於大慶檢驗
Li	黃頭促凝管頭 	1.5	急作 60 分鐘	檢體須於大慶檢驗
Alcohol	綠色頭 	3	急做 50 分 非急作 6 小時	需冰浴送檢 抽血時, 勿用酒精消毒 檢體須於大慶檢驗
Lactic acid	灰色頭 	1.5-2	急做 50 分 非急作 6 小時	1.須冰浴並立即送檢 2.24 小時收檢 3.檢體須於大慶檢驗
ICG	黃頭促凝管頭 	打藥前 8.5ml 打藥後 6ml	需一天	W1-W5 早上 7AM 至 3PM 收檢, 檢體須於大慶檢驗
Osmolality	綠色 PST 管 	1.5	3 天	檢體須於大慶檢驗 24 小時收檢

主題名稱	檢體採檢、送檢及退檢須知	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-I01	版本	第 5.7 版	頁碼/總頁數	4/12

檢驗項目	試管		須抽血量(ml)	可查詢報告時間	注意事項
HS CRP	綠色頭		1.5	急做 50 分 非急做 6 小時	檢體須於大慶檢驗
G6PD	紫色頭		1	1 星期	檢體須於大慶檢驗
Fe.TIBC	綠色頭		3-5	3	

(五) 血液室檢驗項目 (請依最新版檢驗科檢驗手冊或公告為主)

檢驗項目	試管		須抽血量(ml)	可查詢報告時間	注意事項
CBC.DC	紫色頭		1-2	急做 30 分 非急做 6 小時	G-6-PD 採檢亦同，最好分 2 管
ESR			1ml 需抽到與刻度 平行線	1 天	須充分混合姓名標籤要貼在內管的管蓋處，不可貼到刻度下方的管壁
PT.PTT、 FDP	藍色頭		1.8	急做 30 分 非急做 6 小時	檢體須於大慶檢驗，須充分混合

(六) 血清室檢驗項目 (請依最新版檢驗科檢驗手冊或公告為主)

檢驗項目	試管		須抽血量(ml)	可查詢報告時間	注意事項
HbA1c	紫色頭		2	7 天	不可凝固、量不可太少 檢體須於大慶檢驗 24 小時收檢

1. Rota virus Ag：糞便常規檢查反應瓶 (即 stool routine 罐)，檢體是 stool，檢驗科星期一、三、五做。
2. 綠色頭試管無法操作血清項目。
3. 緊急生化無法與血清項目共用一支試管。

主題名稱	檢體採檢、送檢及退檢須知	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I01	版本	第 5.7 版	頁碼/總頁數	5/12

(七) 鏡檢室檢驗項目 (請依最新版檢驗科檢驗手冊或公告為主)

檢驗項目	試管		須檢體量(ml)	可查詢報告時間	注意事項
Urine Routine	尿液定量管		12	急做 30 分 非急做 2 小時	中段尿
Body fluid Routine	紫色頭		3-4	急作送檢 1 小時後 非急作送檢 2 小時後	
Stool Routine/ Occult blood (stool test)	糞便常規檢查反應瓶		成形，至少一粒花生米大小		1.受檢前三天禁食含阿斯匹靈藥物、鐵劑、維生素 C 等 2.女性生理期間請暫停
Stool Occult Blood (EIA/LIA)	定量糞便採集裝置		成形，至少一粒花生米大小	急診：1 天 住院：急作 1 天 非急作 1 天	以採便棒在糞便上 4-7 個不同處戳刺及滾動刮取糞便檢體 (務必填滿溝槽)
糞便阿米巴 Direct smear method 檢查	糞便濃縮集卵瓶		一粒花生米大小之糞便	急作 3 天 非急作 3 天	1.需於30分鐘內送至檢驗科，並於檢驗單上註明採檢時間 2.檢體勿用衛生紙包裹或沾到水或尿液
Stone analysis	無菌培養瓶		至少一顆	送檢三星期後	用空瓶裝即可
Pregnancy test EIA	尿液定量管		12ml	急做 30 分 非急做 6 小時	無須中段尿
Inf A/B 流感核酸快篩	病毒小瓶			急作 1 小時 非急作 2 小時	檢體須冰浴送檢

主題名稱	檢體採檢、送檢及退檢須知	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I01	版本	第 5.7 版	頁碼/總頁數	6/12

(八) 細菌室檢驗項目

檢驗項目	試管		須抽血量(ml)	可查詢報告時間	注意事項
沙門氏、志賀氏桿菌或其他致病菌培養	(黑頭) 活性碳傳送培養管			急作 5 天 非急作 5 天	1.採檢後室溫下 2 小時內立即送檢，若無法馬上送檢，須將檢體放置 4℃ 冷藏，並於 24 小時內送檢 2.不可氣送 3.若檢體為直腸拭子，則採檢深度為插入肛門口約 2-3 公分處，輕輕旋轉以便使之與直腸黏膜之表層接觸

請參閱細菌檢驗單背面說明。

(九) 血庫組檢驗項目 (請依最新版檢驗科檢驗手冊或公告為主)

檢驗項目	試管		須抽血量(ml)	可查詢報告時間	注意事項
ABO 血型測定	紫色頭-小		2 ml	急做 1 小時 非急做 8 小時	未先做血型交叉急於輸血，請於血型檢驗單上加註『輸血』！
Rh(D) 血型測定					
Cross match 交叉配合	紫色頭-大		5 ml	急做半小時 非急做 2 小時	申請檢驗之單位，採檢時須於電腦雙重核對，抽血貼紙才可印出
Ab. Sceening	黃頭促凝管頭		4 ml	急做 1 小時 非急做 8 小時	輸血前檢驗項目，輸血病人不需另外開單
Ab. Identification	黃頭促凝管頭		8 ml	2 天 (不含例假日)	鑑定病人的不規則抗體
Rh 血型抗原—D.E.C.e.c	紫色頭		2 ml	1 天 (不含例假日)	又稱 Rh Subgroup
MN 血型測定	紫色頭		2 ml	1 天 (不含例假日)	MN 血型系統抗原分型

主題名稱	檢體採檢、送檢及退檢須知	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q02-W-I01	版本	第 5.7 版	頁碼/總頁數 7/12

檢驗項目	試管		須抽血量(ml)	可查詢報告時間	注意事項
輸血反應調查	紫色頭		1 ml	1 天 (不含例假日)	1.普通蕁麻疹不須作調查 2.其他輸血反應類型則由醫師決定是否要做
	黃頭促凝管頭		5 ml	1 天 (不含例假日)	
抗 A、抗 B 力價	黃頭促凝管頭		5 ml	1 天 (不含例假日)	又稱 Ab.Titration
Weak Rh(D)血型測定	紫色頭		2 ml	急做 1 小時 非急做 8 小時	又稱 Du Test
Direct Coombs' polyspecific test	紫色頭		2 ml	1 天 (不含例假日)	直接抗球蛋白試驗
Indirect Coombs' polyspecific test	黃頭促凝管頭		4 ml		間接抗球蛋白試驗
Direct Coombs' IgG monospecific test	紫色頭		2ml	1 天 (不含例假日)	直接抗球蛋白試驗：陽性， 進一步檢查是 IgG 或 C3d 的檢驗項目。
Direct Coombs' C3d monospecific test	紫色頭		12ml		

(十) 分子檢驗組檢驗項目 分機 34255 (請依最新版檢驗科檢驗手冊或公告為主)

檢驗項目	試管		須抽血量(ml)	可查詢報告時間	注意事項
Tissue typing Class I HLA-ABC	ACD 管		需抽 2 管 各 8 ml	12 天	1.24 小時收檢 2.請於當天下午 1 點前送達
Tissue typing Class II HLA-DR	ACD 管		需抽 2 管 各 8 ml	12 天	※ 檢體送達前請平躺放置 ※ 規定不可使用晨血採檢
T 淋巴球毒殺試驗	Donor : ACD 管		需抽 4 管 各 6 ml	2 天	器官移植檢驗項目 (此為緊急腦死器官捐贈 或活體器官移植專屬檢驗)

主題名稱	檢體採檢、送檢及退檢須知	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-I01	版本	第 5.7 版	頁碼/總頁數	8/12

檢驗項目	試管	須抽血量(ml)	可查詢報告時間	注意事項
	Recipient 黃頭促凝管頭	 需抽 1 管 5 ml		項目請提早通知分子檢驗組醫檢師以預作準備事宜)
B 淋巴球毒殺試驗	Donor 黃頭管	 4 管 各 6 ml		
	Recipient : 黃頭促凝管頭	 5 ml		

(十一) 體液檢驗 (請依最新版檢驗科檢驗手冊或公告為主)

檢驗項目	試管	須抽血量(ml)	可查詢報告時間	注意事項
CBC routine	紫色頭	 3 ml		
體液生化常規	綠色頭	 3 ml		
culture	藍頭離心管	 15ml		1. 分子組： CSF/Nasopharyngeal aspirate 病毒檢測 2. 生化組：CSF 生化項目檢測、CSF-IEP 3. 鏡檢組：CSF 常規檢查 4. 血清組：CSF/羊水血清項目檢查 注意事項： 1. 分子檢驗組：CSF 檢體需冰浴送檢。 2. CSF 檢體需至少 1~2mL。 3. 羊水檢體需至少 2 mL。

(十二) 檢驗科收檢項目

除細胞學檢查及病理檢查之檢體外均收。

(十三) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	檢體採檢、送檢及退檢須知	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I01	版本	第 5.7 版	頁碼/總頁數	9/12

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	檢體採檢、送檢及退檢須知	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I01	版本	第 5.7 版	頁碼/總頁數	10/12

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
88.11.30	1.0	新制定。	88 年 11 月 30 日通過護理部照護標準委員會。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.07.13	2.1	增加護理人員執行各項採檢之前中後作業規範。	100 年 07 月 13 日護理部臨時小組會議。
101.10.03	2.2	新增試管圖片及修正試管頭顏色。	101 年 10 月 03 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.03	4.0	1. 更新生化、血液、血清及血庫組檢驗項目試管及說明。 2. 新增分子檢驗組檢驗項目、體液檢驗之說明	102 年 12 月 03 日護理部照護標準委員會通過。
103.04.01	4.1	更新及修正生化室檢驗項目、血液室檢驗項目之說明及注意事項。	103 年 04 月 01 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.03	4.2	修改說明(一)生化室檢驗項目、(六)血庫組檢驗項目及(七)分子檢驗組檢驗項目之部份項目試管及須抽血量。	103 年 06 月 03 日護理部照護標準委員會通過。
103.10.07	4.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.10.06	4.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.02.02	5.0	1. 原主題名稱：檢驗科採檢須知；改為~檢體採檢、送檢及退檢須知。 2. 新增第三項第(二)(三)目說明內容及 HIS 畫面。	依據檢驗檢體異常事件通報案號：AM10406005、AM10405002、AM10312012 提出修正，於 105 年 02 月 02 日護理部照護標準委員會通過。

主題名稱	檢體採檢、送檢及退檢須知	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I01	版本	第 5.7 版	頁碼/總頁數	11/12

修正日期	版本	修正說明	備註
106.10.11	5.1	新增第三項第(七)、(八)目內容說明。	106 年 10 月 11 日 護理長會議通過。
107.06.29	5.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	5.2	1. 第三項第一目住院病人流程說明內容及 HIS 畫面修訂，原病患基本資料貼紙改為檢驗條碼標籤。 2. 第三項第九目血庫組檢驗項目：ABO 血型測定、Rh(D)血型測定、Cross match 交叉配合試管照片、注意事項說明內容修訂。	107 年 10 月 17 日 護理長會議通過。
108.11.05	5.3	第三項第十三日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 10 月 03 日 照護標準組會議通過；108 年 10 月 09 日 護理長會議通過；108 年 11 月 05 日 督導會議通過公布。
109.10.08	5.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	5.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目退檢或檢體不足時刪除重印檢驗單。	110 年 10 月 07 日 照護標準組會議通過；110 年 10 月 13 日 護理長會議通過；110 年 10 月 19 日 督導會議通過公布。
111.11.08	5.5	紫頭管試管更換，更新照片。	111 年 10 月 06 日 照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日 護理長會議通過；111 年 11 月 08 日 督導會議通過公布。
112.10.26	5.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	檢體採檢、送檢及退檢須知	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I01	版本	第 5.7 版	頁碼/總頁數	12/12

修正日期	版本	修正說明	備註
113.05.21	5.6	第三項第一目說明內容修訂。	113 年 05 月 08 日 護理長會議通過； 113 年 05 月 21 日 督導會議通過公布。
113.12.17	5.7	第二項刪除（含中興分院）。	113 年 10 月 15 日 照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日 護理長會議通過； 113 年 12 月 17 日 督導會議通過公布。
114.10.02	5.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	