

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	一般檢體運送原則 The General Principles of Samples Transported				
編號	A31000-Q02-W-I02	制定者	N08 李昀臻	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.9 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

瞭解一般檢體運送原則。

二、範圍

傳送組服務員、護理人員及護理員（含中興分院）。

三、說明

- （一）護理人員送檢前，確認檢體上貼病人檢驗條碼標籤並核對病人資料正確後，將檢體放入雙層檢體袋(ONCE 及 MORN 醫囑為一般檢體，使用透明雙層檢體袋；STAT 醫囑為急作檢體，使用黃條雙層檢體袋)，至檢驗檢體傳送系統，逐筆以條碼器刷入每一個預送檢的檢體條碼，按完成後產生總包條碼貼於檢體袋外，再放入非透明之檢體盒內，通知傳送人員以檢體傳送包運送，以維護檢體運送之病人隱私。
- 備註：ICG test、血型、Cross matching 之檢體，仍需附上檢驗單至檢驗科送檢。

- （二）通知傳送人員運送檢體。

	
急作檢體袋(醫囑為：STAT)	一般檢體袋(醫囑為：ONCE、MORN)

主題名稱	一般檢體運送原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I02	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/10

中山醫學大學附設醫院
大慶院區 (住)醫囑號 103816527

血液檢查

患者: [REDACTED] 主治醫師: 彭芷瑜

診斷碼

檢查碼	檢查及處置項目	次數	單位	使用頻率	自費	開始時間	檢查地點
08011	CBC-I(WBC, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLATELET)	1	次	STAT		09/27 14:02	
08013	WBC differential count	1	次	STAT		09/27 14:02	

檢驗備註: 使用 紫頭CBC管。

檢驗申請單上需蓋確認章

檢體上不需蓋章

開立醫師: 陳彥霖 / 陳彥霖 開立時間: 2018/09/27 14:02 列印時間: 2018/09/27 14:03
列印頁次: 1/0

標籤黏貼適當位置

一般試管

- 一維條碼在上
- 二維條碼在下
- 貼紙上緣不超過試管本身標籤



ESR 管

- 需貼二張標籤
- 內管貼簡易標籤
- 外管貼條碼標籤
- 一維條碼在上
- 二維條碼在下
- 貼紙上緣不超過試管本身標籤





主題名稱	一般檢體運送原則	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-I02	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/10

❖ 一維條碼必需平整、無折曲才可被讀取，檢驗科的掃描儀器，紅外線掃描方向與平面垂直。

❖ 試管會放到試管架，故一維條碼必須朝上，才不會架子遮蔽。

試管架

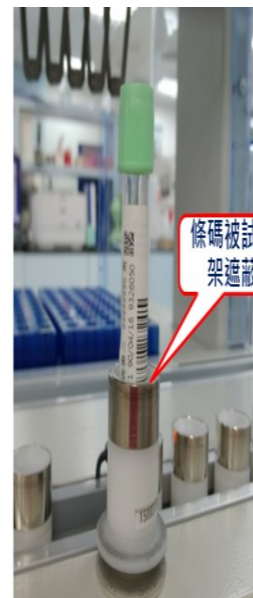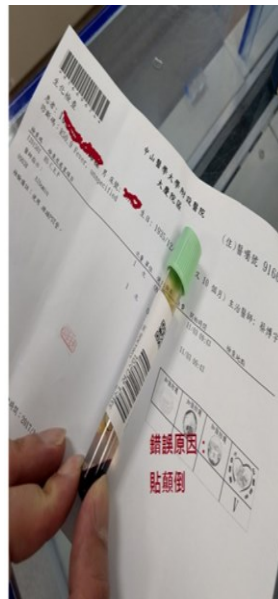

檢體乘載方式




沒載檢體



有載檢體



Blood Gas 檢體

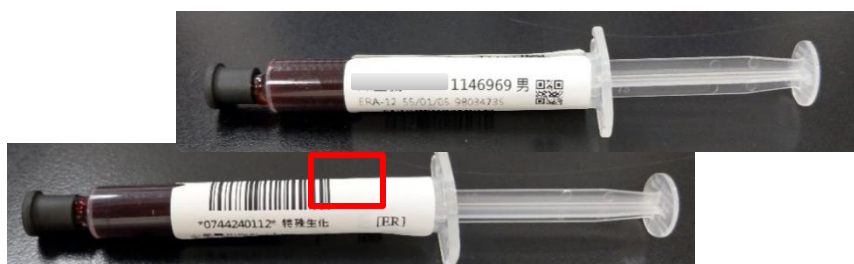

● 標籤缺口：朝蓋子、需讓條碼完整呈現、蓋子蓋緊

Blood Gas 送檢方式


● A. 小夾鏈袋：檢體

● B. 大夾鏈袋：冰塊+少量水

主題名稱	一般檢體運送原則	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-102	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/10

●將 A.放入入 B.中

●盡速送檢

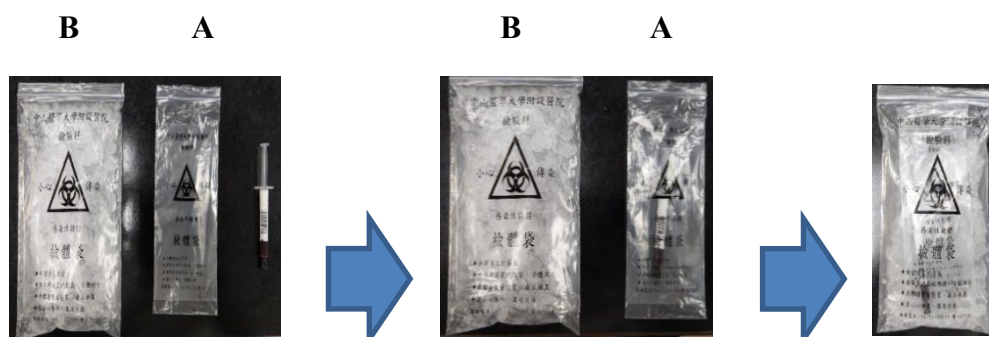

血液培養試管

●黏貼方式：標籤黏貼於手指標示欄位



標籤黏貼位置

血液培養試管

●採檢量：血量採檢達箭頭標示之高度



血量採檢達箭頭標示之高度

痰盒、便盒

●不需機器掃描，條碼標籤可橫貼

尿液檢體


(Urine routine + Pregnancy test)

●同時送檢時可併管

●檢體上黏貼一張標籤即可

●標籤缺口：對齊距離蓋子約 1.5 公分
(約兩條環狀線處)

主題名稱	一般檢體運送原則	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-I02	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/10

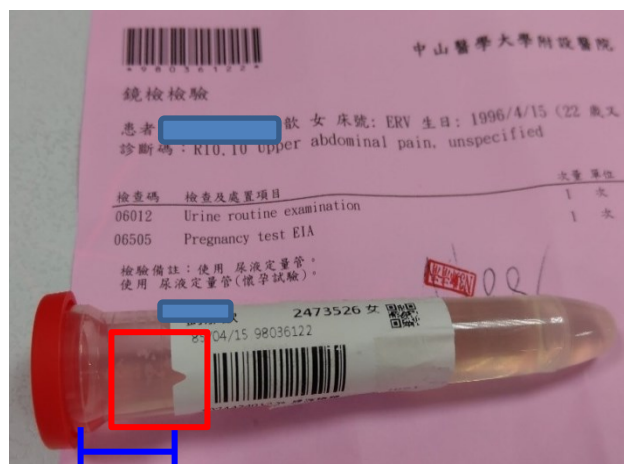

1.5 cm

標籤黏貼不適當之解決對策

- ❖ 變更標籤貼紙款式，增加左缺口
- ❖ 缺口一律朝上貼，可不需特別對齊試管標籤的標示



(三) 檢體上必須有正確之檢驗條碼標籤，若需附檢驗單之檢體，檢驗單上簽名字跡潦草者或無蓋章者檢驗科拒絕簽收。

(四) 檢驗條碼標籤黏貼不適當之影響如下說明

1. 標籤貼在蓋子上：蓋子會被拔除，檢體不易追溯。
2. 標籤外再貼透明膠帶：檢體變得太胖，會放不進或取不出載體。

主題名稱	一般檢體運送原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I02	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/10

3. 位置太低：標籤若反摺檢體會黏在載體內。
4. 整體影響：軌道會暫停須排除異常，報告時間會延長。

(五) 至檢驗科由檢驗科人員再核對。

(六) 注意事項

1. 同一檢驗項目需要送檢 2 套檢體以上，請分開單號開立檢驗單避免開在同一張檢驗單，以避免報告日後無法於電腦上查詢。
2. 檢體包裝以同一病人的檢體裝一個檢體袋為原則。
3. 護理人員執行檢體採檢時，應完成單一個案採檢程序後，才能執行下一個個案準備與採檢程序。如血液採檢：核對醫囑→試管貼上病人檢驗條碼標籤貼紙→核對病人→採血→送回護理站檢體放置盒。完成一個完整的抽血程序後，才能再進行下一個病人的抽血程序，嚴禁同時將多個病人檢驗條碼標籤貼紙黏貼後一起執行抽血動作。
4. 採檢、送檢前，請先確認檢體試管上之資料完整，以確保檢體正確性。
5. 標籤請勿重覆黏貼，請撕掉再貼。
6. 若同時開出多項檢驗項目，請執行併單動作，否則只能一管一單。
7. 檢驗科自 98.3.16 起實施：未使用雙層檢體袋包裝檢體者，一律拒收。
8. 常規尿液檢驗：檢體若無法馬上送至檢驗科請用冰箱冷藏；取得檢體後應於半小時之內送至檢驗科以免檢驗結果產生誤差。
9. 糞便檢查：採取之糞便檢體若無法立刻送至檢驗科，請以低溫冷藏保存，勿超過 1 天。
10. 痰液檢驗：痰液直接吐入無菌收集杯內，並立刻送檢或冷藏保存；若必須採取超過一套檢體時，請依醫師指示之時間採樣，勿同時分裝多套檢體或將不同時間採集之檢體留至最後一套檢體採樣完畢後一起送檢。
11. 檢體送檢：
 - (1) 採集之檢體須於 30 分鐘之內送達檢驗科。
 - (2) 特殊檢體請查閱：院內檢驗科檢驗手冊線上查詢系統。

主題名稱	一般檢體運送原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I02	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/10

12. 病毒培養檢體：未立即送檢驗科之檢體可暫時保存在 4°C（不超過 24 小時），隔天再送，切勿放置於冰箱冷凍層(-20°C)，否則病毒不容易培養。

（七）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	一般檢體運送原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I02	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	8/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	標準化文件改版。	
99.09.29	2.1	修訂說明內容。	
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.10.06	3.1	第三項說明內容將病患改為病人。	104 年 10 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過。
105.08.02	3.2	1. 105 年 7 月 6 日護理長會議決議刪除第三項第(二)目：傳送人員送驗前請先檢查檢體、標籤及檢驗單內容是否無誤及檢驗申請單是否有主護簽章。 2. 第三項說明新增：標籤黏貼適當位置、標籤黏貼不適當之影響、檢體乘載方式之圖示說明。	105 年 08 月 02 日 護理部照護標準 委員會通過。
105.10.04	3.3	第三項第(一)目新增：核醫大樓以 Dumb Waiter 放入檢體盒內送至檢驗科、內科及汝川大樓放隱密處，通知傳送人員以檢體傳送包運送，以維護檢體運送之病人隱私。	105 年 10 月 04 日 護理部照護標準 委員會通過。
106.10.02	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	3.4	1. 第三項第一目蓋確認章改為貼病人檢驗條碼標籤。 2. 第三項第二目說明內容新增檢體送檢圖片。 3. 第三項第三、四目檢體標籤改為檢驗條碼標籤。 4. 第三項第六目之 3 刪除基本資料改為檢驗條碼標籤貼紙。	107 年 10 月 17 日 護理長會議通過。

主題名稱	一般檢體運送原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I02	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	9/10

		5. 第三項第六目之 4、5、6 新增說明。	
108.11.05	3.5	第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 10 月 03 日照護標準組會議通過；108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.10.20	3.6	第三項第二目更新血液培養試管照片。	109 年 10 月 08 日照護標準組會議通過；109 年 10 月 14 日護理長會議通過；109 年 10 月 20 日督導會議通過公布。
110.10.19	3.7	第二項新增（含中興分院）。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.10.06	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.10.26	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.05.21	3.8	1. 第三項第一目說明內容修訂。 2. 刪除第三項第六目注意事項 13.說明內容。	113 年 05 月 08 日護理長會議通過；113 年 05 月 21 日督導會議通過公布。
115.01.06	3.9	1.第三項第一目說明內容修訂及新增檢體袋照片。 2. 第三項第三目說明內容修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01

主題名稱	一般檢體運送原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I02	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	10/10

			月 06 日督導會議 通過公布。