

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血糖測定技術				
	Blood Sugar Measurement Techniques				
編號	A31000-Q05-W-A43	制定者	N13 沈佳安	公布日期	102 年 12 月 27 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 1.7 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

護理人員能正確操作血糖測定技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

讓護理人員了解標準血糖測定流程。

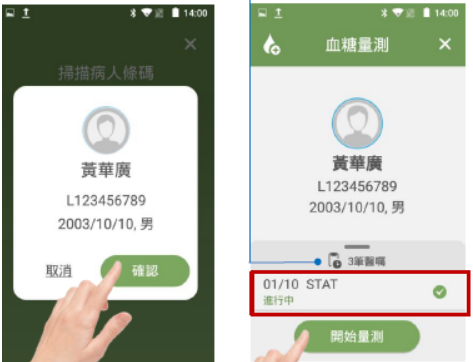
（二）用物準備

1. 血糖機。
2. 一次性採血針。
3. 血糖試紙。
4. 75% 酒精棉片。
5. 紙膠。
6. 尖銳物收集盒。
7. 治療盤。

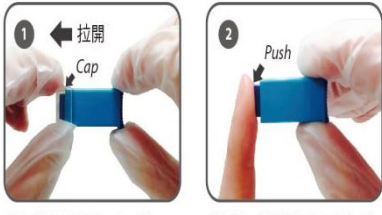
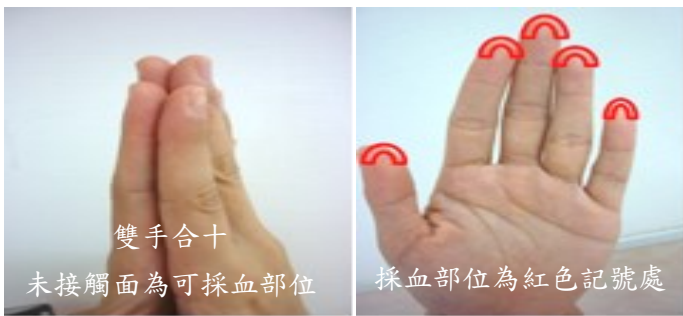
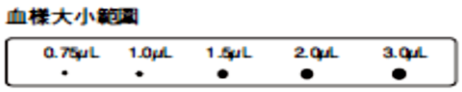
（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 醫師開立血糖測定醫囑。	
2. 護理人員核對 HIS 護理系統於護理執行，於核對狀態核對“正確”。	

主題名稱	血糖測定技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A43	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	2/8

步驟	說明
3.洗手後準備血糖機並將血糖機先讀取護理人員條碼、一次性採血針、血糖試片、75%酒精棉片、紙膠、尖銳物收集盒。用物置於治療盤上，攜至病人單位。	
4.以兩種以上病人辨識方式核對病人身分。確認無誤後將血糖機讀取病人手圈條碼並核對病人資料無誤後按確認。 5.確認醫囑，點選「開始量測」。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。  掃描病患手圈條碼  確認病患身份 確認醫囑 點選『開始量測』
6.向病人及家屬解釋目的並戴上手套。	

主題名稱	血糖測定技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A43	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
7.將血糖試片插入血糖機測試座上，置於治療盤上備用，並於 2 分鐘之內提供血樣。	 從血糖測試片罐中取出一片新測試片，然後立即蓋緊罐蓋，避免濕氣進入，影響準確度。
8.選擇採血部位後，按摩指腹使其充血後進行採血：選擇手指尖端，以 75%酒精棉片消毒採血部位，使用一次性採血針，緊貼採血部位，按壓採血針，擠壓指尖以便採血。若無任何地方可採血，需用到耳垂採血，請務必將「安全採血針蓋」置於耳垂後，再採血，以防針扎。  	1.指尖消毒後需待酒精乾燥後採血，避免因酒精造成血糖測試值不準確。 2.避開靜脈輸液中之肢體採血，避免輸液造成血糖測試值不準確。  3.需確保血量能夠覆蓋至晶片處，才能獲得準確的檢測結果，建議血樣量：0.75~3.0μL。 
9.將血液碰觸試片上端入血口，待血液吸入試片，螢幕出現倒數計時五秒後即出現血糖值。(正常血糖值：空腹 70-100mg/dl；飯後兩小時應小於 140mg/dl)。	1.血糖測試儀之血糖值介於 10 至 600mg/dl，小於 10mg/dl 顯示“Lo”；高於 600mg/dl 顯示“Hi”。 2.採血後會出現血糖數據，確認無誤後打✓上傳 HIS 系統，上傳後即不能修改。

主題名稱	血糖測定技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A43	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
	說明 檢測結果可進行備註 有整碼量測會自動帶出時段 確認無誤，點選打勾上傳 而後螢幕會回到主頁面 4.可按量測記錄查詢病患血糖數據。
10.採血部位以 75%酒精棉片、緊壓待止血方可鬆開。	若無法自行按壓止血之病人可使用紙膠黏貼。
11.整理用物，以逆時針旋轉方式取下試片，(勿碰觸血液)。 12.將測試片丟入感染性垃圾袋，採血針丟入尖銳物收集盒內。	

主題名稱	血糖測定技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A43	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	5/8

步驟	說明
13.若血糖機上沾染血液，即以酒精棉片擦拭清潔即可（若測試座已汙損，無法清潔乾淨則由書記請領新的測試座）。	每日需進行血糖機品管監測測試並將測試結果登記 HIS 系統血糖機作業。 1.選取品質控制。 2.選取藥水：紅色瓶蓋（測試高濃度）。綠色瓶蓋（測試低濃度）。 3.選取高濃度或低濃度後並插入試紙將試紙去吸取藥水後出現 PASS 並上傳系統。 
14.洗手。	
15.核對 HIS 護理系統於執行狀態核簽“已執行”。	

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

主題名稱	血糖測定技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A43	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	6/8

(略)

六、參考資料

- (一) 胡月娟(2022)・內分泌系統疾病之護理・於劉雪娥總校閱，內外科護理學(下冊)(八版，725-732 頁)・華杏。
- (二) 社團法人中華民國糖尿病學會(2022)・2022 第 2 型糖尿病臨床照護指引・社團法人中華民國糖尿病學會。

七、附件

(略)

主題名稱	血糖測定技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A43	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.12.27	1.0	新制定。	102 年 12 月 27 日 護理部技術標準委員會通過；102 年 12 月 27 日公布。
103.06.17	1.1	1. 說明（二）用物準備刪除：血糖筆。 2. 說明（三）步驟及要點說明 6、7、8、10、11。 項內容部份增修。	103 年 06 月 17 日 護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.12.16	1.2	說明（三）步驟 3、6、7、8、10 內容部份增修。	103 年 12 月 16 日 護理部技術標準委員會通過。
104.06.18	1.3	1. 第三項第(三)目相關 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 06 月 18 日 護理部技術標準委員會通過。
105.06.21	1.4	增加第三項第(三)目之 4 病人辨識說明。	105 年 06 月 21 日 護理部技術標準委員會通過。
106.06.19	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.25	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.06.17	1.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目之 3.4.5.7.8.9.10 說明內容修訂。 3. 第三項第三目之 13 新增步驟說明。 4. 第三項第三目之 14.15 刪除。 5. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 17 日 護理技術組會議通過；108 年 07 月 17 日 護理長會議通過；108 年 07 月 23 日 督導會議通過公布。
109.07.21	1.6	第三項第三目步驟及要點說明之 9 更改血糖值。	109 年 06 月 15 日 護理技術組會議通過；109 年 07 月 08 日 護理長會議通過；109 年 07 月 21

主題名稱	血糖測定技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A43	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	8/8

			日督導會議通過公布。
110.09.23	1.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.20	1.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.03	1.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	1.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	1.7	1. 第三項第三目步驟及要點說明之 4.5.11 說明內容部分修訂 2. 第三項第三目之 7.8.12 刪除 3. 更新第六項參考資料。	114 年 06 月 16 日護理技術組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。